



RealLab Co.



Real Lab System Guide Book

99 Abo El Ezz Street, El Mansourah Qesm 1, Egypt.

Sells : 0114 484 8686 – 0115 200 6062

Support : 011111 315 41 – 011111 315 61 – 011111 315 71

<http://reallabeg.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




المحتويات



1-1	إضافة مريض جديد
1-2	حساب المريض – التعديل في حساب المريض
1-3	تسليم نتائج المرضى وتصفية حساب المريض
1-4	التعديل في بيانات مريض أو تحاليله
1-5	إدخال نتائج التقارير
1-6	عمل تقرير مجمع
1-7	عمل تقرير فارغ
1-8	إدخال نتائج تقارير المزارع
1-9	البحث عن مريض
1-10	البحث عن مريض معين وإظهار جميع زيارته للمعمل بتاريخها والتحليل
1-11	متابعة تسجيل الحالات والتعديل عليها وإدخال النتائج وطباعة التقارير
1-12	تسليم نتائج المرضى عن طريق موقع نتيجة (NATIGH.COM)
1-12	كيفية فتح الموقع وعرض نتيجة المريض
1-12	بيانات موقع نتيجة الخاصة بالمريض وطباعتها على الإيصال
1-13	التاريخ المرضى للمريض




2-1	عمل ورقة عمل لمجموعة من المرضى في فترة زمنية محددة
2-2	عمل ورقة عمل لتحليل معين او مجموعة تحاليل في فترة زمنية معينة
2-2	تصنيف تحاليل الفترة المحددة لمعرفة عدد مرات اجراء التحليل

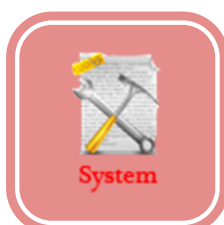

3-1	تعديل بيانات وأسعار التحاليل
3-2	إضافة تحليل جديد للبرنامج
3-3	تعديل القيم المرجعية الخاصة بالتحاليل
3-4	إضافة قائمة أسعار جديدة
3-4	طباعة قائمة أسعار التحاليل
3-5	إضافة كومت ثابت في تحليل معين

3-6	إضافة مجموعة تحاليل
3-7	إضافة طبيب معالج
3-7	إضافة جهة إحالة
3-8	إضافة مزرعة جديدة للبرنامج
3-9	إضافة مضاد حيوى للمزرعة
3-10	العينات المرسلّة إلى الخارج
3-11	إنشاء حساب للطبيب المعالج لإستخدام خدمة نتيجة
3-11	إنشاء حساب للمعمل لإستخدام خدمة نتيجة

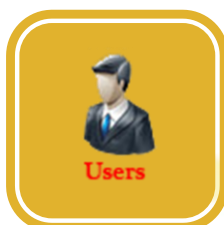

4-1	إضافة مستخدمين ومديرين للنظام
4-2	تعديل بيانات وصلاحيات المستخدمين والمديرين
4-3	تسجيل الحضور والإنصراف لمعرفة حركة المستخدمين فى الدخول والخروج من النظام



5-1	الإحصائيات ومتابعة أداء المعمل
5-2	مثال على احصائية عدد مرضى فى سنة محددة (فرز بشهور السنة – فرز بجنس المريض)
5-3	مثال على إحصائية على عدد مرضى فى شهر محدد
5-4	مثال على احصاء معدل طلب تحليل مجموعة معينة
5-4	مثال على احصاء عدد عينات التحاليل فى السنة



Accounts

6-1	الجرد وحساب المعمل
6-2	عمل جرد خلال فترة زمنية معينة لدخل المعمل
6-3	عمل جرد على فرع ضمن عدة فروع مرتبطة معا (نظام الفروع للمعامل)
6-4	عمل جرد لطبيب معالج معين او جهة احواله
6-4	عمل جرد على العينات المرسله أو نوع الحساب
6-5	تصفية حساب العينات المرسله للخارج



Setting

7-1	تعديل إعدادات النظام الأساسية
7-1	إعدادات التقارير
7-2	إعدادات هوامش التقرير
7-3	حجم الورق المستخدم فى الطباعة
7-4	إعدادات رأس وذيل التقرير
7-5	تعديل ألوان رأس وذيل التقرير
7-6	ضبط الطابعات المخصصة للطباعة
7-7	ضبط نوع الحساب الافتراضى للنظام
7-8	إعدادات الإيصال (رأس وذيل الإيصال – هوامش الإيصال)
7-9	إعدادات الظرف



**** مقدمة ****

يستخدم البرنامج فى ادارة معامل التحاليل الطبية من تخزين بيانات المرضى والتحليل المطلوبة لهم ونتائجها وطباعتها والبحث عنهم بطريقة سلسلة وسهلة وانشاء تاريخ مرضي لكل مريض والقيام بالحسابات والإحصائيات اليومية والشهرية والسنوية والحفاظ علي الخصوصية من العبث (تطبيق نظام صلاحيات المستخدمين)

وطباعة ورقة العمل للمرضي او التحاليل والمطالبات الحسابية وادارة العينات المرسله للخارج وايضا تعامل الاب تو لاب والتعاقدت مع الشركات والنقابات وامكانية عمل قوائم اسعار منفصلة لكل جهة .

كما يقوم البرنامج بطباعة ايصال للمرضي وظرف للنتائج وباركود للعينات وكود المعمل لسهولة التعامل مع المريض فى المستقبل والتقليل من الخطأ البشري .

for lab service



1- إضافة المرضى وتسجيل التحاليل

Real Lab System

المعروض فى هذا الجزء :-

- فى هذا الجزء سنقوم بعرض كيفية تثبيت برنامج ريال لاب سيستم و تثبيت برنامج ميكروسوفت سيكول سيرفر 2005 وربط قاعدة البيانات بالبرنامج .
- كيفية تسجيل مريض جديد وكيفية تسجيل التحاليل الخاصة به
- وكيفية طباعة الباركود الخاص بالمريض وطباعة الإيصال وعرض خدمة تسليم نتائج المريض من خلال موقع نتيجة (Natigh.Com)
- كيفية إدخال نتائج التقارير المختلفة وتعديل الثوابت وتقارير المزارع وحفظها وطباعتها
- كما سيتم عرض كيفية التحكم فى تنسيق التقارير وألوان التقرير
- كيفية البحث عن مريض محدد بطرق مختلفة أو عرض مرضى فترة زمنية معينة ومعرفة النتائج المنتهية والغير منتهية والتي لم تتم مراجعتها والتي لم تتم طباعتها
- تسليم نتائج المرضى وتصفيه حساباتهم وحصر النتائج الغير مسلمة .

داخل هذا الجزء :-

- 1 إضافة مريض جديد
- 2 البحث عن مريض
- 3 حساب المريض
- 4 تسليم نتائج المرضى
- 5 إدخال نتائج التقارير
- 6 عمل تقرير مجمع
- 7 التاريخ المرضى للمريض


تم عرض المواضيع المشار إليها فى الكتاب بشئ من التفصيل مرفقة بصور توضيحية من البرنامج لسهولة التطبيق وتجنباً لحدوث خطأ أو سوء إستقبال المعلومة المكتوبة .



كما يمكن الإطلاع على فيديو مسجل خاص بهذا الجزء على الرابط الآتى :

https://www.youtube.com/watch?v=qMgI0VQ_v60

1-1 تشغيل برنامج ريال لاب وإضافة مريض جديد :-

نقوم بتشغيل البرنامج من على سطح المكتب عن طريق الضغط على أيقونة البرنامج والتي تأخذ رمز (ورقة شجر خضراء) كما هو موضح

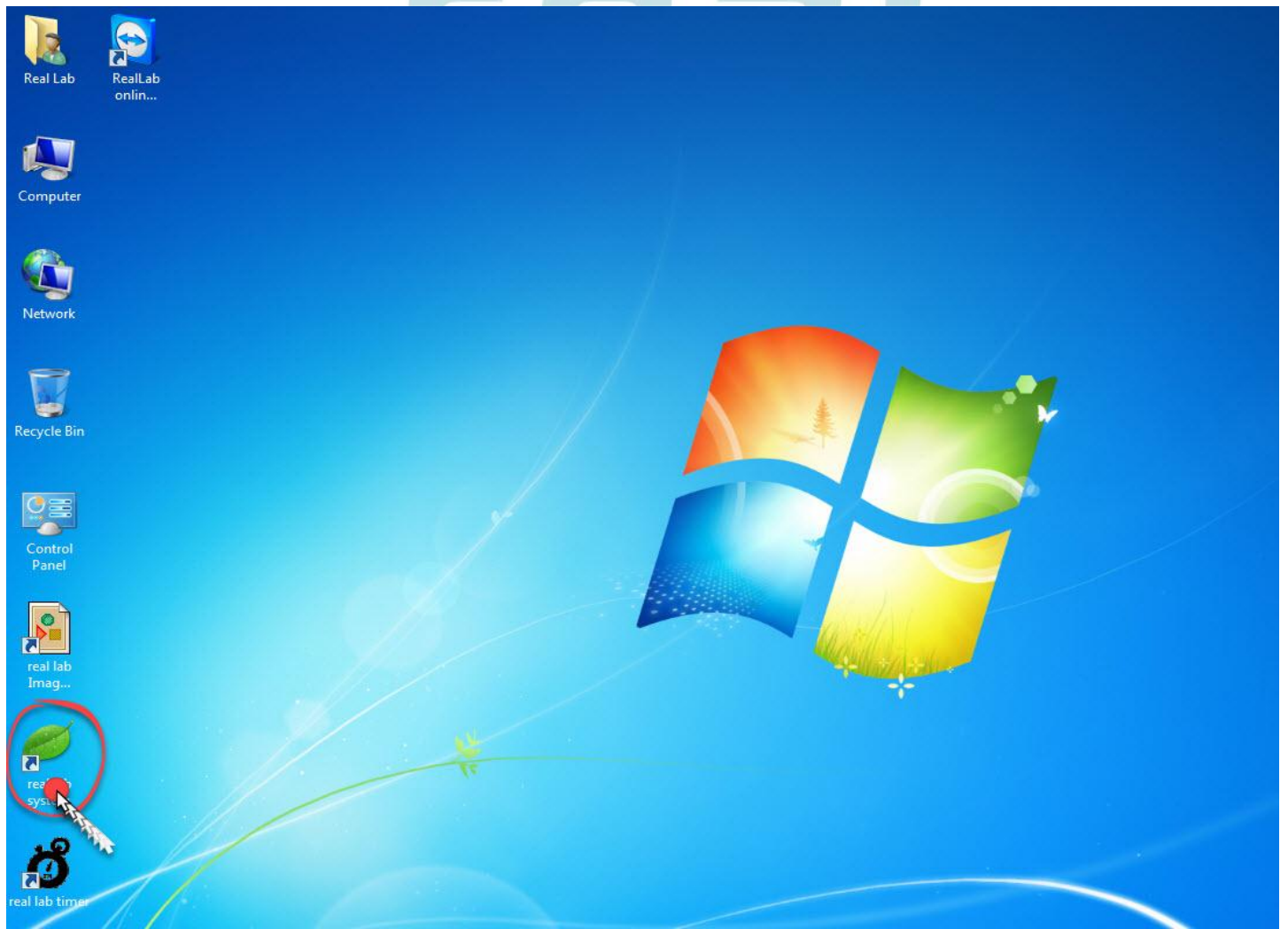

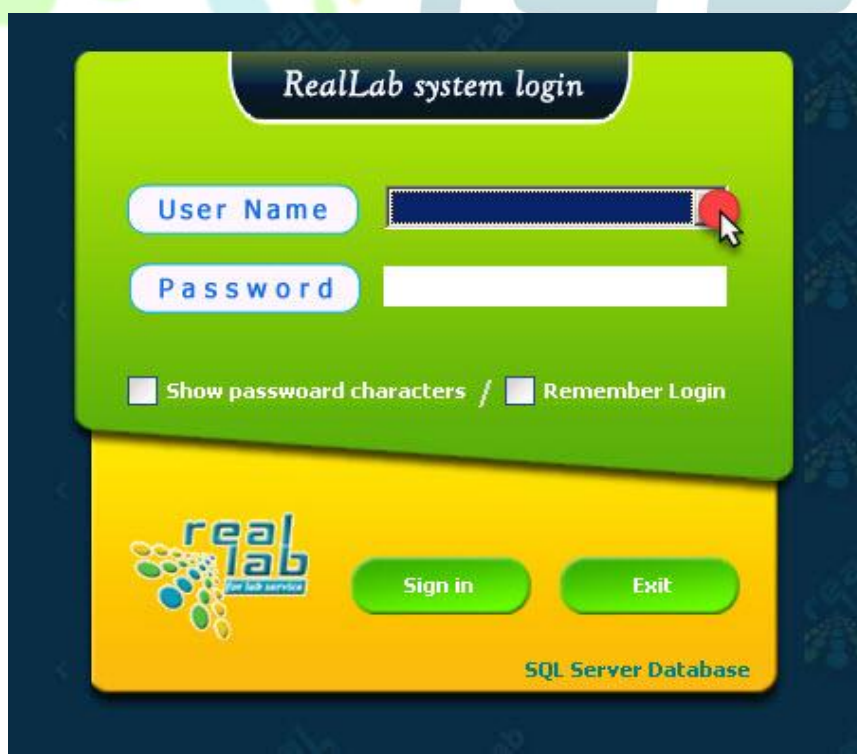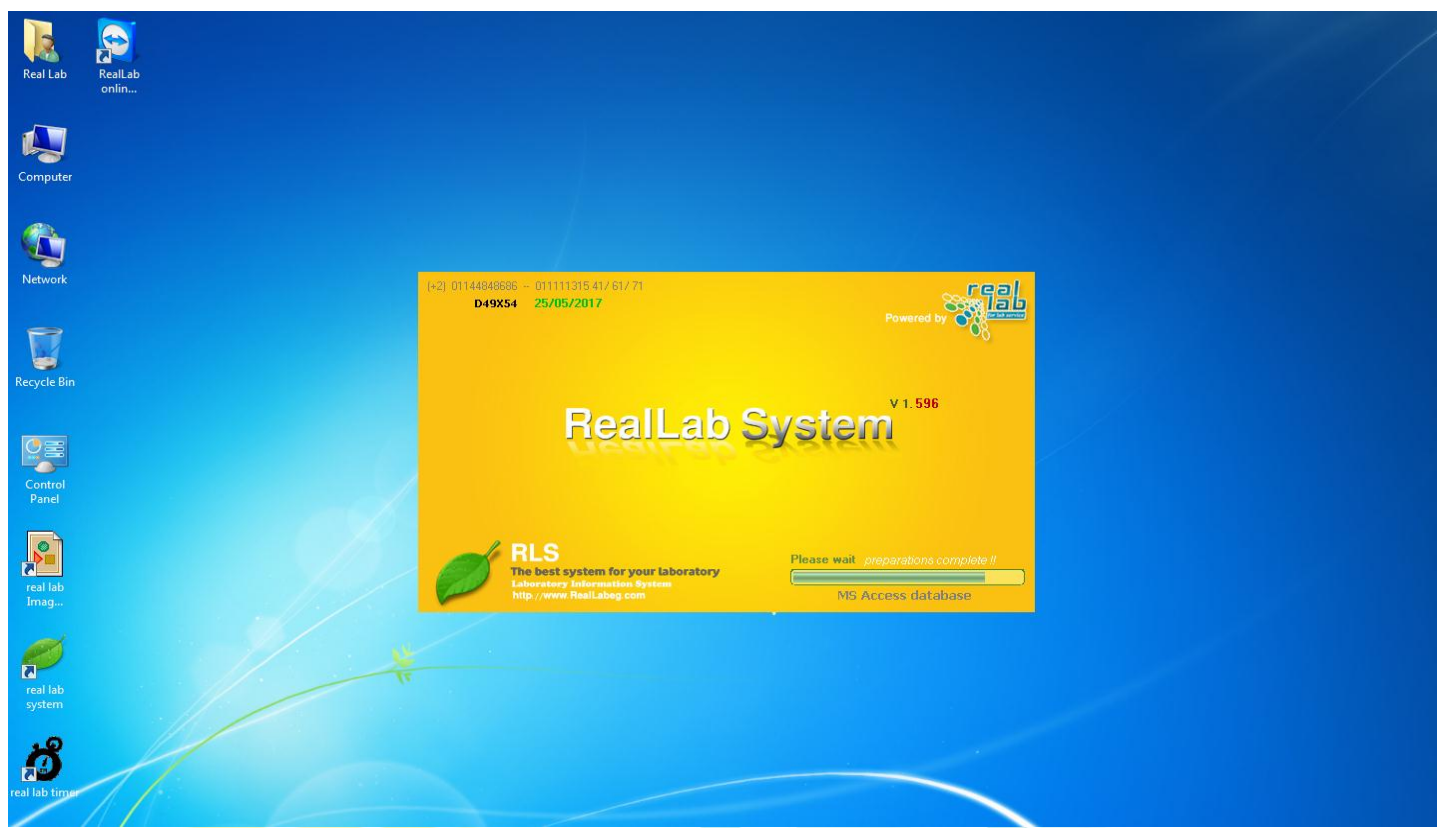

إضافة مريض جديد فى البرنامج نقوم بالضغط على أيقونة **Patient**
ونختار (إضافة وتعديل بيانات المرضى)



نقوم بالضغط على زر (إضافة) ثم نقوم بإدخال إسم المريض ونوعه وسنه كبيانات أساسية
كما يمكن إدخال بعض البيانات الاختيارية على حسب الحاجة مثل (أرقام التليفون - العنوان - الرقم
القومى - الطبيب المعالج -)
إذا وجدت بعض الملاحظات للمريض يمكن ادخالها فى خانة مخصصة (ملحوظات) وتظهر فى نافذة
إدخال نتائج التحاليل وتسليم نتائج التحاليل .

يمكن إدخال بعض المعلومات عن تاريخ المريض المرضى مثل :-

- هل يأخذ علاج لأي مرض (السكر - ضغط الدم - علاج للفيروسات - مضاد حيوى - علاج لسيولة الدم - علاج للكبد -)
- هل المريض يعانى من (فقر الدم - الذئبة الحمراء - الفشل الكلوى - ضغط الدم - إلتهاب المفاصل -)
- هل تم عمل إشاعة بالصبغة أو الموجات الصوتية خلال يومين
- يتم الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق الضغط على زر (بيانات المريض) فى نافذة إدخال التحاليل

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات يتم إدخال التحاليل الخاصة بالمريض من قائمة التحاليل الموجودة على يسار نافذة البرنامج

يتم إضافة التحليل عن طريق الضغط مرتين متتاليتين على التحليل ونلاحظ ظهوره أسفل (Patients tests)

لحذف تحليل غير مرغوب نقوم بالضغط مرتين على التحليل ونلاحظ اختفاؤه من (Patients tests)

لحذف جميع التحاليل الخاصة بالمريض نضغط على زر All الموجود أسفل قائمة (Patient tests) وذلك عند إضافة المريض أول مرة فقط

for lab service

فى حالة إذا كانت العينة تم أخذها خارج المعمل (Taken Out side Lab) نقوم بوضع العلامة فى خانة التحليل المسحوب خارج المعمل أسفل قائمة التحاليل وتظهر على هيئة ملحوظة فى التقرير الخاص بتحليل المريض

عند الإنتهاء من إدخال التحاليل نضغط على زر (حفظ)

14

لإضافة مجموعة تحاليل كاملة للمريض مثل (Kidney Function – Liver Profile -)

نقوم بإختيار **TG** كما هو موضح ثم نقوم بإضافة المجموعة كاملة عن طريق الضغط على اسم المجموعة المراد اضافتها مرتين بالماوس .

لحذف تحليل من مجموعة التحاليل المضافة للمريض نقوم بالضغط بالماوس على التحليل مرتين .

The screenshot displays a medical laboratory software interface. On the left, a 'test group menu' is visible with various test categories. The 'TG' (Total Glucose) option is selected, indicated by a red circle and a mouse cursor. Below the menu, there are buttons for 'Add all tests in group', 'Delete', and 'All'. A section labeled 'Taken outside lab' includes checkboxes for 'Urine', 'Stool', 'Blood', 'Semen', and 'CSF'. The main area shows a list of tests with their respective values and units. At the bottom, there is a grid for results, including fields for 'إجمالي التحاليل' (Total Tests), 'الباقي للمعمل' (Remaining for Lab), 'الباقي للمريض' (Remaining for Patient), 'المدفوع' (Paid), 'القيمة الخصم' (Discount Value), 'التكلفة بعد الخصم' (Cost after Discount), and 'المدفوع سابقا' (Previously Paid). The right side of the interface contains patient information, including name, gender, age, and date of birth, along with a section for 'ملاحظات' (Remarks) and a 'Print Result Password' field.

start

TM

TG

CG

test group menu

Aminogram

Antiphospholipid antibody synd

Autoimmune diseases

Blood Gases

BLOOD GLUCOSE

BLOOD GROUP

BLOOD PICTURE

Cardiac Markers

Coagulation Factors

Coagulation Profile

CSF Electrolytes

CULTURE AND SENSITIVITY

Diabetes profile

Drug Monitoring

Drugs of Abuse

Erythrocyte Sedimentation Rate

Fertility Hormones

HEMATOLOGY

Hemoglobin electrophoresis

Hepatitis Markers

Immunoglobulins

Patient's tests

5

LDH

CK (Total)

CK (MB)

Troponin (I)

Homocystein

Add all tests in group

Delete

All

Taken outside lab

Urine

Stool

Blood

Semen

CSF

09:00 PM

21-Feb-2017

تاريخ الاستلام

11:09 AM

21-Feb-2017

تاريخ الدخول

Lab. ID

VIP

كود المريض

Male

Female

اسم المريض

السيد / احمد ربيع عطا الله

Years

23

سن المريض

موبيل / تليفون

Individual

نوع الحساب

رقم بطاقة / الملف

عنوان المريض

معلومات اضافية

الطبيب المعالج

د. ف

جهة الإحالة

ملاحظات

مائم

عدد ساعات الصيام

هل يؤخذ علاج للسكر

هل يؤخذ علاج لسبولة الدم

هل يؤخذ علاج للفيروسات

للسيدات هل يوجد حمل

هل تم عمل اشاعة بالمبيعة او بالموجات الصوتية خلال يومين

مريض بفقر الدم

هل يؤخذ علاج للعدد

هل يؤخذ مضاد حيوي

هل يؤخذ علاج للكبد

مريض بالتغيب المفامل

مريض بالضغط الدم

مريض بالفشل كلوي

مريض بالذئبة الحمراء

NATIGH.COM

Print Result Password

Send SMS

Send E-mail

By Fax

تراجع

حفظ

تعديل

إضافة

الكارتونة

ورقة العمل

الباركود

الإيمصال

الطابعة الرئيسية

نتائج التحاليل

طابعة المرضى

375

الباقى للمعمل

375

اجمالى التحاليل

0.0

الباقى للمريض

%

0

الخصم

0

قيمة الخصم

375

التكلفة بعد الخصم

0.0

المدفوع سابقا

المدفوع

المدفوع

المدفوع

لإزالة تحليل معين من التحاليل المضافة نقوم بالضغط عليه مرتين بالماوس .
بعد الانتهاء نضغط (حفظ) .

2-1 حساب المريض :-

يظهر حساب المريض في خانة (إجمالي التحاليل) ويقوم البرنامج بحسابها طبقاً للأسعار المدخلة في البرنامج وسيتم إيضاح كيفية تعديل أسعار التحاليل في الفصل رقم (3) .

يتم إدخال قيمة المبلغ المدفوع من قبل المريض في خانة (المدفوع سابقاً) وقيمة الخصم إن وجد ثم نقوم بالضغط على Enter من لوحة المفاتيح مرتين

المرحلة الأولى يقوم البرنامج بإجراء العملية الحسابية لحساب المريض **والمرحلة الثانية** لحفظ العملية

لإضافة مبلغ غير مرتبط بالتحاليل على حساب المريض نظير خدمة معينة أو تكلفة إضافية يتم اضافتها في خانة المدفوع عن طريق ادخال المبلغ مسبقاً بعلامة (+) ويتم اضافتها على إجمالي التحاليل .

في حالة تسديد المريض للمبلغ كامل نضغط على (خالص) ثم نقوم بالضغط على (موافق) .

The screenshot displays the patient calculation software interface. The top section shows the patient's name, gender (Male/Female), age (23), and various IDs (Lab ID, VIP, 1016072810019). The middle section contains a list of tests (HDL, Hgb, ESR, etc.) and a 'Patient's tests' section with a list of 16 tests. Below this is a 'Taken outside lab' section with checkboxes for Urine, Stool, Blood, Semen, and CSF. The bottom left section shows a calculation table with columns for 'Total', 'Discount', 'Value of discount', 'Total after discount', and 'Previous total'. The bottom right section contains buttons for 'Delete', 'Add', 'Edit', 'Print', 'Send SMS', 'Send E-mail', 'By Fax', 'Barcode', 'Receipt', 'List of patients', and 'List of results'.

عند الرغبة في التعديل على المبلغ المدفوع نتيجة إدخال قيمة خاطئة أو تصفية الحساب الخاص بالمريض ، نقوم بالضغط على أيقونة (إجمالي التحاليل) فتظهر لنا النافذة الموضحة

start

☒ TM
☐ TG
☐ CG

complete test menu

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

R.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Alk. Ph.

Albumin

Bilirubin Total

Bilirubin Direct

Creatinine (Serum)

Uric Acid

Cholesterol

Triglyceride

HDL

Hgb

ESR

PT

ABO

Patient's tests

13

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

R.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Alk. Ph.

Albumin

ESR

Hgb

PT

Add select test

Delete

All

Taken outside lab

Urine

Stool

Blood

Semen

CSF

09:00 PM

02-Jan-2017

تاريخ الاستلام

10:22 AM

01-Jan-2017

تاريخ الدخول

Lab. ID

VIP

1017010110048

كود المريض

☒ Male
☐ Female

السيد / محمد محمد محمد

اسم المريض

السيد / محمد محمد محمد

Years

23

سن المريض

Individual

نوع الحساب

موبايل / تليفون

رقم البطاقة

عنوان المريض

معلومات اضافية

Himself

الطبيب المعالج

معلومات اضافية

جهة الإحالة

مريض بفقر الدم

هل يؤخذ علاج للسكر

عدد ساعات الصيام

مريض بالتهاب المفاصل

هل يؤخذ علاج للعقد

هل يؤخذ علاج لسهولة الدم

مريض بالضغط الدم

هل يؤخذ مضاد حيوي

هل يؤخذ علاج للفيروسات

مريض بالفشل كلوي

هل يؤخذ علاج للكبد

للستينات هل يوجد حمل

مريض بالذئبة الحمراء

هل تم عمل اشعاع بالمبيحة او بالموجات الصوتية خلال يومين

ملاحظات

NATIGH.COM

Print Result Password

Send SMS

Send E-mail

By Fax

52

الباقى للمعمل

152

اجمالي التحاليل

0.0

الباقى للمريض

%

0

النقص

المدفوع

0

قيمة الخصم

المدفوع بعد الخصم

152

المدفوع سابقا

100

حذف

حفظ

تعديل

اضافة

الكارنيه

ورقة العمل

الباركود

الإيصال

القائمة الرئيسية

نتائج التحاليل

قائمة المرضى

start

TM

TG

CG

complete test menu

Urine

Stool

CBC

PP.BI.G.

R.B.G.

F.B.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Alk. Ph.

Albumin

Bilirubin Total

Bilirubin Direct

Creatinine (S)

Uric Acid

Triglyceride

Cholesterol

HDL

Hgb

ABO

ESR

PT

Ad

Taken outside

Patient's tests

14

Urine

Stool

CBC

PP.BI.G.

R.B.G.

F.B.G.

SGPT (ALT)

09:00 PM

18-Feb-2017

تاريخ الاستلام

10:37 AM

16-Feb-2017

تاريخ الدخول

Lab. ID

VIP

1017021610018

كود المريض

Male

Female

محمد احمد على محمد

السيد

اسم المريض

Years

23

سن المريض

موبايل /تليفون

Individual

نوع الحساب

رقم بطاقة الملف

عنوان المريض

الطبيب المعالج

جهة الإحالة

عدد ساعات

مائم

هل يؤخذ علاج

هل يؤخذ علاج

للسيدات هل

هل تم عمل ان

ملاحظات

اضافة

الإيصال

قائمة المرضى

64

الباقى للمعمل

184

اجمالى التحاليل

0.0

الباقى للمريض

0

قيمة الخصم

%

0

0

الخصم

المدفوع

184

التكلفة بعد الخصم

120

المدفوع سابقا

صورتي

تاريخ

خالص

* لإضافة مبلغ اضافي على حساب المريض يتم وضع علامة جمع (+) قبل المبلغ في خانة المدفوع

Paid date	Money	User name	Edit date	Color code
16/02/2017	70	admin	Thursday, 16-Feb-17 10:53 AM	
16/02/2017	50	admin	Thursday, 16-Feb-17 10:53 AM	

دفع

استرداد

اضافى

رجوع

تفسير الحساب

حذف

تعديل

المبلغ المدفوع

64

0.0

صورتي

يمكن حذف العملية بالكامل عن طريق الضغط عليها ثم نضغط **حذف**

يمكن التعديل على المبلغ الذي تم إدخاله عن طريق تحديد المبلغ ثم نضغط **تعديل**

The screenshot displays a medical software interface. On the left, there's a sidebar with a list of tests: Urine, Stool, CBC, PP.BI.G., R.B.G., F.B.G., SGPT (ALT), SGOT (AST), Alk. Ph., Albumin, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Creatinine (S), Uric Acid, Triglyceride, Cholesterol, HDL, Hgb, ABO, ESR, and PT. The main area shows patient information: Name (السيد / محمد احمد على محمد), Age (23), Sex (Male), and Lab. ID (1017021610018). A modal window is open in the center, titled "نقوم بتحديد العملية ثم نقوم بتعديلها أو حذفها" (We are determining the operation then we edit or delete it). The modal contains a table with columns: Paid date, Money, User name, Edit date, and Color code. The table has two rows: 16/02/2017, 70, admin, Thursday, 16-Feb-17 10:53 AM, and 16/02/2017, 50, admin, Thursday, 16-Feb-17 10:53 AM. Below the table, there are buttons for "رجوع" (Return), "تغيير الحساب" (Change account), "حذف" (Delete), "تعديل" (Edit), and "المبلغ المدفوع" (Paid amount). A red circle highlights the text: "* لإضافة مبلغ اضافي على حساب المريض يتم وضع علامة جمع (+) قبل المبلغ في خانة المدفوع" (To add an additional amount to the patient's account, you must place a plus sign (+) before the amount in the paid field).

Paid date	Money	User name	Edit date	Color code
16/02/2017	70	admin	Thursday, 16-Feb-17 10:53 AM	
16/02/2017	50	admin	Thursday, 16-Feb-17 10:53 AM	

نقوم بتحديد العملية ثم نقوم بتعديلها أو حذفها

المبلغ المدفوع

رجوع تغيير الحساب حذف تعديل

3-1 تسليم نتائج المرضى وتصفية حساب المريض :-

فى حالة سداد المريض جزء من الحساب ووجود باقى حساب للمعمل يمكن الإطلاع عليه عند تسليم نتائج التحاليل عن طريق الضغط على أيقونة **patient**

نقوم بالضغط على (تسليم نتائج المرضى) والإطلاع على المرضى ونتائجهم المنتهية والغير منتهية وحسابهم (المدفوع والباقى لهم أو الباقى للمعمل) عن طريق الضغط على زر (حساب المريض)

ويتم عرض المرضى على حسب الفترة الزمنية التى يتم تحديدها فى البرنامج

The screenshot displays a medical laboratory software interface. At the top, there's a patient information section with fields for name (احمد جمال عبد المنعم), gender (Male), age (22), and lab ID (1016070910018). Below this is a table of test results with columns for Test Name, Result, Status, Finish, Verify, Print, Export, and Price. Tests listed include Urine, Stool, CBC, R.B.I.G., SGPT (ALT), SGOT (AST), Bilirubin Total, Uric Acid, PT, CEA, Hct, Plt, and TSH. A modal window is open in the center, showing a payment summary for patient 199. The modal includes fields for 'الباقى للمعمل' (199), 'الباقى للمريض' (0.0), 'المدفوع' (1), and 'اجمالى التحاليل' (199). It also shows 'الخصم' (0), 'قيمة الخصم' (0), 'التكلفة بعد الخصم' (199), and 'المدفوع سابقا' (0). The bottom of the interface features a date filter (Sunday, 10 Jul 2016) and buttons for 'Refresh', 'Individual', 'LabToLab', 'Contracts', 'VIP', 'Free', 'All', and 'من' (09-Jul-2016) to 'الى' (09-Jul-2016). A red circle highlights the 'حساب المريض' button at the bottom center.

4-1 التعديل فى بيانات مريض أو تحاليه :-

الطريقة الأولى :-

للتعديل فى بيانات مريض تم ادخاله سابقا أو عند الرغبة فى اضافة أو حذف تحليل نقوم بالضغط على

أيقونة **Patient** ثم (إضافة وتعديل بيانات المرضى) تظهر لنا النافذة الموضحة .

نقوم بالضغط على زر (قائمة المرضى) ثم نقوم باختيار اليوم المسجل به المريض

نقوم باختيار المريض ثم نضغط (تعديل) ، ثم نقوم بتعديل البيانات أو اضافة تحليل أو حذف تحليل

وبعد الإنتهاء نضغط (حفظ)



Exit

About Us

Send Result

Setting

System

Users

Statistics

Accounts

Tools

Work sheet

Laboratory

Patients

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

إضافة مريض جديد وطباعة الباركود والايصال الخاص به وإدخال النتائج وطباعتها.

البحث عن مريض محدد او عرض مرضي فترة معينة ومعرفة النتائج الغير منتهية وكذلك الغير محققة والغير مطبوعة.

تسليم نتائج المرضى وتصفية الحسابات الخاصة بهم وحصر النتائج الغير مسلمة.

إدخال نتائج التحاليل

إضافة وتعديل بيانات المرضى

بحث عن مريض

تسليم نتائج المرضى

SQL SERVER

User Name

admin

Last Login

Tuesday, 17 Jan 2017 06:57 PM

SQL DATABASE

Today

Wednesday, 18-Jan-2017 09:24 AM

start

TM

TG

CG

complete test menu

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

R.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Alk. Ph.

Albumin

Bilirubin Total

Bilirubin Direct

Creatinine (Serum)

Uric Acid

Cholesterol

Triglyceride

HDL

Hgb

ESR

PT

ABO

Patient's tests

0

Add select test

Delete

All

Taken outside lab

Urine

Stool

Blood

Semen

CSF

09:00 PM

18-Jan-2017

تاريخ الاستلام

09:26 AM

18-Jan-2017

تاريخ الدخول

Lab. ID

VIP

كود المريض

Male

Female

اسم المريض

تسليم المريض

موسم / تطبيق

Individual

نوع الحساب

رقم البطاقة

عنوان المريض

معلومات إضافية

الطبيب المعالج

معلومات إضافية

جهة الإحالة

ماتم

عدد ساعات الصيام

هل يؤخذ علاج للسكتر

هل يؤخذ علاج للغدد

هل يؤخذ علاج للفيروسات

هل يؤخذ علاج للكبد

هل تم عمل اشعاع بالمهقة او بالموجات الصوتية خلال يومين

ملاحظات

NATIGH.COM

Print Result Password

Send SMS

Send E-mail

By Fax

حذف

حفظ

تعديل

إضافة

الكارتونة

ورقة العمل

الباركود

الإيصال

القائمة الرئيسية

نتائج التحاليل

قائمة المرضى

0.0

الباقي للمعمل

0.0

إجمالي التحاليل

0.0

الباقي للمريض

0.0

الباقي للمريض

0.0

المدفوع

0.0

المدفوع

0.0

المدفوع

0.0

المدفوع

for lab service

الطريقة الثانية :-

عن طريق البحث عن مريض ثم الدخول في بيانات المريض كما هو موضح ، وسيتم عرض كيفية البحث عن مريض بالتفصيل لاحقا .

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

- اضافة مريض جديد وطباعة الباركود والايصال الخاص به وادخال النتائج وطباعتها.
- البحث عن مريض محدد او عرض مرضي فترة معينة ومعرفة النتائج الغير منتهية وكذلك الغير محققة والغير مطبوعة.
- تسليم نتائج المرضى وتصفية الحسابات الخاصة بهم وحصر النتائج الغير مسلمة.

ادخال نتائج التحاليل

اضافة وتعديل بيانات المرضى

بحث عن مريض

تسليم نتائج المرضى

User Name admin Last Login Tuesday, 17 Jan 2017 06:57 PM SQL DATABASE Today Wednesday, 18-Jan-2017 09:24 AM

SQL SERVER

مريض 14 عدد مريضى عملية البحث 0 تحاليل المريض

Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
Herself	Years	23	Female	Jan-2017-15	أسماء محمد السيد احمد		1017011510021
Herself	Years	23	Female	Jan-2017-15	أية محمد أحمد أحمد		1017011510038
Herself	Years	77	Female	Jan-2017-15	شيماء محمد على باشا		1017011510045
Herself	Years	52	Female	Jan-2017-18	مريم محمد محمد محمد		1017011810022
Herself	Years	22	Female	Jan-2017-18	منار احمد محمد على		1017011810046
احمد	Years	12	Male	Jan-2017-07	احمد جمال		1017010710019
Himself	Years	12	Male	Jan-2017-18	اسلام جمال محمد على		1017011810015
Himself	Years	88	Male	Jan-2017-17	البحار محمد		1017011710018
Himself	Years	22	Male	Jan-2017-15	على محمد السيد		1017011510014
Himself	Years	23	Male	Jan-2017-18	مها محمد السعيد عبد الله محمد		1017011810084
Himself	Years	23	Male	Jan-2017-18	د عبد الله السيد ابراهيم		1017011810053
Himself	Years	23	Male	Jan-2017-18	عمود احمد عبد المنعم		1017011810077
Himself	Years	23	Male	Jan-2017-18	محمود عبد الهادي على		1017011810060
Himself	Years	24	Male	Jan-2017-18	مسعد على السيد احمد		1017011810039

نقوم بالبحث عن المريض بأى طريقة مناسبة

Branch No. All

برقم البطاقة بالهاتفونى بحث باسم المريض بحث بجنس المريض بحث باسم المريض (مطلق) <<Enter ID>> New search Database Backup

بالتحليل فى الفترة المحددة بالتحليل فى الفترة المحددة 18-Jan-2017 الى 18-Jan-2017

الرئيسية نتائج مجمعة اضافة VIP حساب مفتوح نتائج لم تسلم نتائج لم تطبخ نتائج لم تراجح نتائج لم تدخل حذف المريض نتائج التحاليل بيانات المريض

ويمكن كذلك من خلال نافذة إدخال نتائج التحاليل بعد تحديد المريض نقوم بالضغط على زر
(بيانات المريض)

1-5 إدخال نتائج التقارير

لإدخال نتيجة التحاليل الخاصة بالمريض نقوم بالضغط على أيقونة Patient

نضغط على زر (إدخال نتائج التحاليل)



تظهر قائمة المرضى على يمين النافذة وبها عدد المرضى المسجلين اليوم في البرنامج
نختار المريض المراد إدخال نتائج التحاليل له عن طريق الضغط على اسم المريض مرة واحدة
فتظهر تحاليل المريض
نقوم بالضغط على التحليل مرتين للدخول في التقرير ونقوم بإدخال البيانات ثم نضغط (حفظ) .
لمعاينة التقرير قبل طباعته نقوم بالضغط على زر (معاينة الطباعة) فيظهر التقرير كما هو الحال بعد
طباعته
لطباعة التقرير نضغط على زر (طباعة) .

Male

النوع

أحمد محمد السيد

الاسم

1016072110010

الكود

Years 22

العمر

1

الجهة

Lab ID

عدد المرضى اليوم

3

All

أحمد محمد السيد

أسماء محمد محمد

أحمد جمال أحمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Test Abbreviation	P	T	Result	Status	Finish	Verify	Print	Export
Stool			See Report		☐	☐	☐	☐
Urine			See Report		☐	☐	☐	☐
CBC			See Report		☐	☐	☐	☐
SGPT (ALT)					☐	☐	☐	☐
SGOT (AST)					☐	☐	☐	☐
ESR			See Report		☐	☐	☐	☐
PT					☐	☐	☐	☐
Widal Test			See Report		☐	☐	☐	☐

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرضي

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

Male

النوع

أحمد محمد السيد

الاسم

1016072110010

الكود

Years 22

العمر

1

جهة الإحالة

كود المعمل

عدد المرضى اليوم

3

All

أحمد محمد السيد

أسماء محمد محمد

أحمد جمال أحمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Coagulation Profile

القائمة الرئيسية

رجوع

Patient History

معاينة الطباعة

طباعة

حفظ

Coagulation Profile Analysis Report
Zoom 100%

1016072110010
الكود
1
كود المعمل

Normal Ranges
Verified
Print

sec
ISI
1.5

Male 11 - 13 sec
Male 70 - 100 %
Male 1.0 - 1.3

sec

CONSTANTS

طباعة
حفظ

لمعاينة التقرير قبل طباعته نضغط على زر (معاينة الطباعة)

Patient ID.
1016072110010
Patient Name
أحمد محمد السيد
Age / Sex
22 Years / Male
Request Date
21-Jul-2016 11:47 AM
Referred By
Printed In
21-Jul-2016 12:45 PM

HEMATOLOGY REPORT

Coagulation Profile:
Reference Range :

PT (Prothrombin Time)

Patient's time : 12 sec
Control's time : 12 sec
Concentration : 100 %
I.N.R. : 1
Ratio : 1

Male 11 - 13 sec
Male 70 - 100 %
Male 1.0 - 1.3

Doctor's signature:

6-1 عمل تقرير مجمع

لعمل تقرير مجمع يحتوى على مجموعة من نتائج التحاليل
نقوم بالضغط على زر (إدخال نتائج التحاليل) تظهر لنا النافذة الموضحة

The screenshot displays a laboratory information system (LIS) interface. At the top, there is a patient information form with fields for Name (أحمد محمد السيد), Gender (Male), Age (22), and Lab ID (1016072110010). Below this is a table of test results. The table has columns for Test Abbreviation, P, T, Result, Status, Finish, Verify, Print, and Export. The tests listed are Stool, Urine, CBC, SGPT (ALT), SGOT (AST), ESR, PT, Widal Test, and Blood Culture. The results for SGPT (ALT) and SGOT (AST) are 30 and 35 respectively. The results for PT, Widal Test, and Blood Culture are 12, See Report, and See Report. The interface also includes a sidebar on the right with a search bar and a list of patient names. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for various functions, including 'تقرير مجمع' (Aggregate Report), which is highlighted with a red circle.

Test Abbreviation	P	T	Result	Status	Finish	Verify	Print	Export
Stool			See Report		☐	☐	☐	☐
Urine			See Report		☐	☐	☐	☐
CBC			See Report		☐	☐	☐	☐
SGPT (ALT)			30		☒	☒	☐	☐
SGOT (AST)			35		☒	☒	☐	☐
ESR			See Report		☒	☒	☐	☐
PT			12		☒	☒	☐	☐
Widal Test			See Report		☐	☐	☐	☐
Blood Culture			See Report		☐	☐	☐	☐

نقوم بالضغط على زر (تقرير مجمع) فتظهر النافذة الموضحة وبها تحاليل المريض جهة اليسار
تحت عنوان Patient tests in our lab

نقوم بالضغط مرتين على التحليل المراد اضافته فى التقرير المجمع ، أو يتم تحديده والضغط على
أيقونة السهم الأخضر

تظهر التحاليل المضافة فى التقرير المجمع على يمين النافذة تحت عنوان
Available tests in report

لترتيب ظهور التحاليل فى التقرير المجمع نقوم بتحديد التحليل وتحريكه لأعلى أو لأسفل بواسطه

الأسهم كما هو موضح .

1

عدد المرضى اليوم

All

أحمد محمد السيد

Male

النوع

أحمد محمد السيد

الاسم

1016072110010

الكود

Years 22

العمر

/د.أ

1

Lab ID

Test Abbreviation	P	T	Result	Status	Finish	Verify	Print	Export
Stool			See Report		☐	☐	☐	☐
Urine			See Report		☐	☐	☐	☐
CBC			See Report		☐	☐	☐	☐
SGPT (ALT)			30		☒	☒	☐	☐
SGOT (AST)			35		☒	☒	☐	☐
ESR			See Report		☒	☒	☐	☐
PT			12		☒	☒	☐	☐
Widal Test			See Report		☐	☐	☐	☐
Blood Culture			See Report		☐	☐	☐	☐

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرضى

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المرضى

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Male	النوع	أحمد محمد السيد	الاسم	1016072110010	الكود	
Years 22	العمر		جهة الإحالة	1	كود المعمل	

REPORT

8 Patient tests in our lab.

- Stool
- Urine
- CBC
- SGPT (ALT)
- SGOT (AST)
- ESR
- PT
- Widal Test

12 Available tests in report

☒ Print sub title (group name) in report

☒ Print printed test again without msg.

Comment

القائمة الرئيسية

رجوع

Patient History

معاينة الطباعة

طباعة

Male	النوع	أحمد محمد السيد	الاسم	1016072110010	الكود	
Years 22	العمر		جهة الإحالة	1	كود المعمل	

REPORT

8 Patient tests in our lab.

- Stool
- Urine
- CBC
- Widal Test

8 Available tests in report

- SGPT (ALT)
- SGOT (AST)
- ESR
- PT

☒ Print sub title (group name) in report

☒ Print printed test again without msg.

Comment

القائمة الرئيسية

رجوع

Patient History

معاينة الطباعة

طباعة

Clinical Report
Zoom 100%

1016072110010
الكود
1
كود المعمل

1016072110010
أحمد محمد السيد
21-Jul-2016 11:47 AM
21-Jul-2016 02:07 PM

Age / Sex
22 Years / Male
Request Date
21-Jul-2016 11:47 AM
Printed In
21-Jul-2016 02:07 PM

Referred By

REPORT

LIVER FUNCTIONS
Reference Range :

▲ SGPT (Alanine Aminotransferase) : 30 U/L
Male Up To 45 U/L

▲ SGOT (Aspartate Aminotransferase) : 35 U/L
Male Up To 40 U/L

▲ AST/ALT Ratio : 1.17
Male 1 - 2

Erythrocyte Sedimentation Rate

▲ First Hour : Over 100 mms
High
Normal: Up to 7 mms

Coagulation Profile

▲ Control time : 12 sec

▲ PT (Prothrombin Time) : 12 sec
Male 11 - 13 sec

▲ Concentration : 100 %
Male 70 - 100 %

▲ INR : 1
Male 1.0 - 1.3

Doctor's signature:

Print sub title (group name) in report
Print printed test again without msg.

معاينة الطباعة
طباعة

7-1 عمل تقرير فارغ

لعمل تقرير فارغ يحتوى على بيانات المريض فقط ، نقوم بالضغط على أيقونة **Patient**
ثم نقوم بالضغط على زر (إدخال نتائج التحاليل)

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- إضافة مريض جديد وطباعة الباركود والايصال الخاص به وإدخال النتائج وطباعتها
- البحث عن مريض محدد أو عرض مرضي فترة معينة ومعرفة النتائج الغير منتهية
- وكذلك الغير محققة والغير مطبوعة
- تسليم نتائج المرضى وتصفية الحسابات الخاصة بهم وحصر النتائج الغير مسلمة

ادخال نتائج التحاليل

اضافة وتعديل بيانات المرضى

بحث عن مريض

تسليم نتائج المرضى

SQL SERVER

User Name admin Last Login Wednesday, 20 Jul 2016 05:35 PM SQL DATABASE Today Thursday, 21-Jul-2016 12:41 PM

نحدد المريض المراد عمل تقرير فارغ له من قائمة المرضى على يمين النافذة كما هو موضح ثم نقوم بالضغط على زر (تقرير فارغ)

يقوم البرنامج بفتح نافذه لتقرير فارغ يمكن ادخال بيانات وطباعته او طباعة ورقة تحتوى فقط على بيانات المريض

Male

التوع

على السيد محمد

الاسم

1016080910015

الكود

Years

22

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

P

T

Test Abbreviation

Result

Status

Finish

Verify

Print

Export

CBC	See Report		☒	☒	☐	☐
F.B.I.G.	80		☒	☒	☐	☐
PP.B.I.G.	77		☒	☒	☐	☐
R.B.I.G.	120		☒	☒	☐	☐
SGOT (AST)	38		☒	☒	☐	☐
SGPT (ALT)	40		☒	☒	☐	☐
Bilirubin Total			☐	☐	☐	☐
Bilirubin Direct			☐	☐	☐	☐
Creatinine (Serum)			☐	☐	☐	☐
Bilirubin Indirect			☐	☐	☐	☐

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

4

عدد المرضى اليوم

All

على السيد محمد

مضى محمد عبد الله

احمد على محمد

أسماء محمد محمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرضي

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

تقرير بندي

Zoom

100%

Patient ID.

1016080910015



Age / Sex

22 Years / Male

Referred By

Himself

Patient Name

علي السيد محمد

Request Date

09-Aug-2016 09:34 AM

Printed In

09-Aug-2016 10:06 AM

8-1 إدخال التقارير في حالة المزارع

نقوم بالضغط على زر **Culture**
ثم نقوم بإدخال بيانات المزرعة

(Sample - Organism A - Organism B - Organism C - Culture
Condition - Colony Count)

Male	النوع	على السيد محمد	الاسم	1016080910015	الكود	
Years	22	العمر	Himself	جهة الإحالة	1	كود المعمل

Blood Culture

Culture

Sensitivity

Culture:

☒ Sample
 Blood sample

☒ Organism A
 Gram Negative bacilli

☒ Organism B

☒ Organism C

☒ Culture Condition
 On nutrient agar for 48 hours aerobically

☒ Colony Count
 More than 10,000 Bacterial/mL

Microscopic

☒ Reaction

☒ Pus Cells

☒ R.B.Cs

☒ Epithelial Cells
 Absent

☒ Crystal
 Absent

☒ Fungi
 Absent

☐ Bacteria
 Absent

☐ Others
 Absent

☒ Others

☒ Others

☒ Others

☒ Direct1

☒ Direct2

☒ Complete
 ☒ Verified
 ☒ Print

Comment :



القائمة الرئيسية

رجوع

تقرير صور

معاينة الطباعة

طباعة

حفظ

38

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر **Sensitivity**
لإدخال المضادات الحيوية

نقوم بإختيار **Sensitivity**

ثم نقوم بإدخال المضادات الحيوية فى التصنيف
(**Highly For - Moderate For - Low For - Resistant For**)

عن طريق الضغط على المضاد الحيوى مرتين من يمين النافذة
أو نحدد المضاد الحيوى ونضغط على زر **Add**

يمكن التحكم فى إظهار

(**Sensitivity – Reference – Commercial Name**)

فى الريبورت عن طريق تحديد العنصر المراد إظهاره كما هو موضح .
بعد الانتهاء نضغط (**حفظ**) .

Male النوع
Years 22 العمر
الاسم على السيد محمد
Himself جهة الاحالة
1016080910015 الكود
1 كود المعمل

Blood Culture Culutre

Sensitivity: Organism A

Highly For Moderate For Low For Resistant For remove

No.	Abbr.	Scientific Name	Sensit.	Sensitivity
1	AK	Amikcin		> 17 mm
2	AMC	Amoxicillin and Clavulanic		> 18 mm
3	AMX	Amoxicillin		> 18 mm
4	ATM	Aztreonam		> 21 mm

Antibiotic By Abbr. add

Abbr.	Scientific Name	Sensitivity
	Sulbactam	> 18 mm
	Clavulanic	> 18 mm
	Trimethoprim	> 18 mm
	Sulfamethoxazole	> 18 mm
	Spiramycin	> 18 mm
	Clarithromycin	> 18 mm
	Cephadrine	> 58 mm
	Lomefloxacin	> 18 mm
AM	Ampicillin	> 29 mm
AZM	Azithromycin	> 18 mm
CAZ	Ceftazidime	> 18 mm
CEC	Cefaclor	> 18 mm
CFP	Cefoprazone	> 18 mm
CFR	Cephadroxil	> 18 mm
CIP	Ciproflexacin	> 17 mm
CM	Clidamycin	> 18 mm
CN	Cephalexin	> 18 mm

Show Sensitivity in report reference Show Commercial name in report

القائمة الرئيسية رجوع تقرير صور معاينة الطباعة طباعة حفظ

1016080910015

الكود

1

كود المعمل





☒ Complete
 ☒ Verified
 ☒ Print

By Abbr.

add

Scientific Name	Sensitivity
Sulbactam	> 18 mm
Clavulanic	> 18 mm
Trimethoprim	> 18 mm
Sulfamethoxazole	> 18 mm
Spiramycin	> 18 mm
Clarithromycin	> 18 mm
Cephadrine	> 58 mm
Lomefloxacin	> 18 mm
Ampicillin	> 29 mm
Azithromycin	> 18 mm
Cefoprazone	> 18 mm
Cephadroxil	> 18 mm
Ciproflexacin	> 17 mm
Cephalexin	> 18 mm
Erythromycin	> 18 mm
Nitrofurantoin	> 18 mm
Gentamycin	> 15 mm

طباعة

حفظ

9-1 البحث عن مريض :-

للبحث عن مريض معين وعرض تحاليله نقوم بالضغط على أيقونة Patient



ثم نقوم بالضغط على (بحث عن مريض) تظهر لنا النافذة الخاصة بالبحث



ويمكن البحث عن طريق (اسم المريض مطابق أو عشوائي - بحث عن مريض بإسم الطبيب المعالج - بحث بحسب جنس المريض - بحث بسن المريض - بحث برقم التليفون أو رقم البطاقة - بحث بالتحليل - بحث عن مريض في فترة زمنية محددة - أو بحث عن مريض في فرع معين في حالة نظام الفروع

للمعامل عن طريق اختيار رقم الفرع من خانة (Branch No)

كما يمكن البحث عن النتائج التي لم يتم تسجيلها عن طرق الضغط على (نتائج لم تدخل)

ويمكن أيضا البحث عن النتائج التي لم تراجع او لم تطبع أو لم تسلم .



بعض الصور التوضيحية لعمليات البحث المختلفة

مريض

أكثر من 100

عدد مرضى عملية البحث

0

تحليل المريض

Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
Himself	Years	67	Male	Apr-2014-12	أبو الفتوح العدوي		1714041210258
Himself	Years	67	Male	Apr-2014-07	أبو الفتوح العدوي		1214040710099
Himself	Years	67	Male	Apr-2014-05	أبو الفتوح العدوي		1714040510236
بيشوي عاطف يانوب	Years	63	Male	Jan-2014-26	أحمد أحمد مادي		1114012610238
جمال حماد	Years	75	Male	Dec-2013-24	أحمد أحمد مصلح		1313122410121
مصطفى نبيه	Days	7	Male	Apr-2014-06	أحمد إبراهيم الطويل		1114040610224
خالد طبل	.Mons	1	Male	Feb-2014-16	أحمد إبراهيم القصبي		1114021610113
خالد طبل	Days	12	Male	Jan-2014-28	أحمد إبراهيم ميري		1314012810151
خالد طبل	Days	9	Male	Jan-2014-25	أحمد إبراهيم ميري		1714012510257
Himself	Years	20	Male	Feb-2014-17	أحمد اشرف عبد الجليل		1214021710230
محمد السعيد	Years	12	Male	Mar-2014-22	أحمد اكرامي سعد		1714032210144
شريف الشربيني	Years	22	Male	Mar-2014-26	أحمد السيد حسنين		1414032610165
Himself	Years	38	Male	Dec-2013-04	أحمد السيد علي		1413120410090
Himself	Years	32	Male	Mar-2014-24	أحمد السيد فهمي		1214032410198
هاني جمال أبو زيد	Years	55	Male	Feb-2014-13	أحمد الشربيني		1514021310158
صلاح منصور	Years	61	Male	Mar-2014-22	أحمد القصبي		1714032210151
Himself	Years	40	Male	Apr-2014-03	أحمد المتولي أحمد		1514040310030
Himself	Years	40	Male	Jan-2014-08	أحمد المتولي أحمد		1414010810051
Himself	Years	22	Male	Jan-2014-28	أحمد المهدي		1314012810212
هاني جمال أبو زيد	Years	75	Male	Feb-2014-09	أحمد بدر الخطوط		1114020910160
محمد عمر شهاب	Years	23	Male	Jan-2014-09	أحمد بكر عبد السلام		1514010910062
Himself	Years	65	Male	Nov-2013-27	أحمد جاد الطنطاوي		1413112710078

Branch No. All

بحث باسم المريض (مطابق)

Male

بحث باسم المريض (عشوائي)

بحث باسم الطبيب المختص

<<Enter ID>>

New search

Database Backup

الفاصلة الرئيسية

إضافة نتائج مجمعة

VIP

حساب مفتوح

نتائج لم تسلم

نتائج لم تطبع

نتائج لم تراجع

نتائج لم تدخل

حذف المريض

نتائج التحاليل

بيانات المريض

مريض
أكثر من 100
عدد مريضى عملية البحث

تحليل المريض
0

Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
خالد طيل	Years	30	Female	Dec-2013-04	محمد محمد توفيق		1413120410144
Himself	Years	60	Male	Dec-2013-15	محمد أبو المعاطي		1113121510200
صلاح منصور	Years	23	Male	Feb-2014-11	محمد أبو المعاطي كمال		1314021110020
خالد طيل	Days	3	Male	Feb-2014-05	محمد أحمد		1414020510125
Himself	Years	60	Male	Mar-2014-05	محمد أحمد الزهيري		1414030510016
بيشوي عاطف يانوب	Years	21	Male	Feb-2014-18	محمد أحمد الشهاب		1314021810234
نادر الشحات	Years	36	Male	Jan-2014-21	محمد أحمد حسين		1314012110091
خالد طيل	Days	7	Male	Feb-2014-23	محمد أحمد محمد		1114022310289
خالد طيل	Days	9	Male	Apr-2014-09	محمد أحمد محمد		1414040910257
خالد طيل	Days	9	Male	Feb-2014-25	محمد أحمد محمد		1314022510256
عزمي عبد الحميد	Years	13	Male	Feb-2014-04	محمد أحمد محمود		1314020410176
محمد عبدالوهاب يوسف	Years	10	Male	Apr-2014-12	محمد أيمن فكري		1714041210302
محمد عبد الوهاب	Years	26	Male	Feb-2014-01	محمد إبراهيم		1714020110296
Himself	Years	2	Male	Feb-2014-15	محمد إبراهيم		1714021510071
Himself	Years	50	Male	Jan-2014-08	محمد إبراهيم الدسوقي		1414010810082
خالد طيل	Days	4	Male	Feb-2014-04	محمد إبراهيم رزق		1314020410169
Himself	Years	12	Male	Dec-2013-02	محمد إبراهيم عبد السلام		1213120210023
طلعت رمضان	Years	23	Male	Nov-2013-18	محمد ابو العزائم		1213111810065
احمد العربي	Years	42	Male	Dec-2013-03	محمد ابو الفتوح مطاوع		1313120310096
صلاح منصور	Years	50	Male	Jan-2014-01	محمد ابو عوفى		1414010110014
احمد العربي	Years	55	Male	Feb-2014-08	محمد احمد غازى		1714020810189
Himself	Years	40	Male	Mar-2014-11	محمد احمد مصطفى		1314031110027

Branch No. All
بحث باسم المريض (مطابق)

بفتح يسين المريض
بفتح يسين المريض

بفتح يسين المريض
بفتح يسين المريض

بفتح يسين المريض
بفتح يسين المريض

<<Enter ID>>
New search

Database
Backup

القائمة الرئيسية
إضافة نتائج مجمعة
VIP
حساب مفتوح
نتائج لم تسلم
نتائج لم تطبع
نتائج لم تراجع
نتائج لم تدخل
حذف المريض
نتائج التحليل
بيانات المريض

مريض
8
عدد مريضى عملية البحث

تحليل المريض
0

Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
اسلام رزق	Years	22	Female	Nov-2013-21	خاتن محمد علي		1513112110103
اسلام رزق	Years	60	Female	Jan-2014-09	سوسن محمد عبد الخالق		1514010910086
اسلام رزق	Years	15	Female	Feb-2014-26	شروق محمود علي		1414022610144
اسلام رزق	Years	26	Female	Mar-2014-16	شيماء السيد		1114031610257
اسلام رزق	Years	57	Female	Apr-2014-05	فاطمة جمعة ابراهيم		1714040510229
اسلام رزق	Years	60	Female	Feb-2014-15	ميرفت عبد الفتحي الديب		1714021510156
اسلام رزق	Years	15	Female	Jan-2014-16	نورهان ميري عبد الحليم		1514011610022
اسلام رزق	Years	16	Male	Feb-2014-26	علي محمود علي		1414022610151

Branch No. All
بحث باسم المريض (مطابق)

بفتح يسين المريض
بفتح يسين المريض

بفتح يسين المريض
بفتح يسين المريض

بفتح يسين المريض
بفتح يسين المريض

<<Enter ID>>
New search

Database
Backup

القائمة الرئيسية
إضافة نتائج مجمعة
VIP
حساب مفتوح
نتائج لم تسلم
نتائج لم تطبع
نتائج لم تراجع
نتائج لم تدخل
حذف المريض
نتائج التحليل
بيانات المريض

مرضى
3
عدد مرضى عملية البحث

0
تحاليل المريض

Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
محمود عوض	Years	57	Female	Sep-2015-27	سهير ابراهيم		1115092710290
Himself	Years	53	Male	Sep-2015-27	على عطيه		1115092710139
محمود عوض	Years	52	Male	Sep-2015-27	على منصور عثمان		1115092710115

Branch No.
All

برقم البطاقة

بالتلفون

بحر ☒ مقيّد ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

بالتحليل في الفترة المحددة

بحر ☒ مفتوح ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

بحر ☒ مفتوح ☐

Cholesterol

18-Jan-2017

الى

18-Jan-2015

من

من

<<Enter ID>>

New search

☒ Database
☐ Backup

الرئيسية
إضافة نتائج مجمعة
VIP
حساب مفتوح
نتائج لم تسلم
نتائج لم تطبع
نتائج لم تراجع
نتائج لم تدخل
حذف المريض
نتائج التحاليل
بيانات المريض

10-1 البحث عن مريض معين وإظهار جميع زياراته في المعمل بتواريخها وتحاليله:-

لتمكين امكانية البحث عن مريض معين واظهار زياراته وتحاليله يجب عمل لاب أى دى Lab ID للمريض .

يتم عمل (Lab Id) للمريض بعد تسجيل بياناته و إدخال تحاليله والضغط على زر (حفظ)

نقوم بالضغط على (Lab Id) كما هو موضح فيظهر لاب أى دى للمريض ثم نضغط (حفظ) .

The screenshot displays the NATIGH.COM laboratory management system. The top navigation bar includes the company name and a 'complete test menu' button. The left sidebar lists various laboratory tests under categories like Urine, Stool, CBC, and others. The central panel is a form for entering patient data, including name, gender, age, and contact information. Below the form, there are checkboxes for medical history and symptoms. The bottom section contains buttons for adding tests, deleting, and printing results. The right side of the interface shows a list of patient visits with columns for date, time, and status.

any ☐ TM ☐ TG ☐ CG **complete test menu**

Urine Stool CBC F.B.I.G. PP.B.I.G. R.B.I.G. SGPT (ALT) SGOT (AST) Alk. Ph. Albumin Bilirubin Total Bilirubin Direct Creatinine (Serum) Uric Acid Cholesterol Triglyceride HDL Hgb ESR PT ABO

Patient's tests 12 F.B.I.G. PP.B.I.G. R.B.I.G. SGPT (ALT) SGOT (AST) CBC Stool Urine Uric Acid Cholesterol Triglyceride VLDL

Add select test Delete All

Taken outside lab ☐ Urine ☐ Stool ☐ Blood ☐ Semen ☐ CSF

09:00 PM 06-Dec-2016 تاريخ الاستلام 10:02 AM 05-Dec-2016 تاريخ الدخول

5016120510010 Lab. ID VIP 1016120510014 كود المريض

☒ Male ☐ Female السيد / محمد احمد على اسم المريض

Years 22 سن المريض

Individual نوع الحساب رقم البطاقة

عنوان المريض

معلومات اضافية Himself الطبيب المعالج

معلومات اضافية جهة الإحالة

ماتم عدد ساعات الصيام 0 هل يؤخذ علاج للسكر هل يؤخذ علاج للعدوى هل يؤخذ علاج لسبولة الدم هل يؤخذ علاج للفيروسات هل يؤخذ علاج للكبد هل تم عمل اشعة بالمصفاة او بالموجات الصوتية خلال يومين

ملاحظات

NATIGH.COM Print Result Password Send SMS Send E-mail By Fax

تراجع حفظ تعديل إضافة


الكارتونة ورقة العمل الباركود الإيصال

الثاقبة الرفيعة نتائج التحاليل ثاقبة البرقود

يقوم البرنامج بحفظ اللاب أى دى للمريض كعنصر من البيانات المميزة للمريض و يظهر فى بيانات

المريض تلقائيا عند تسجيل المريض مرة أخرى .

يتم البحث بـ (Lab Id) فتظهر جميع زيارات المريض داخل المعمل بتواريخها كما هو موضح .

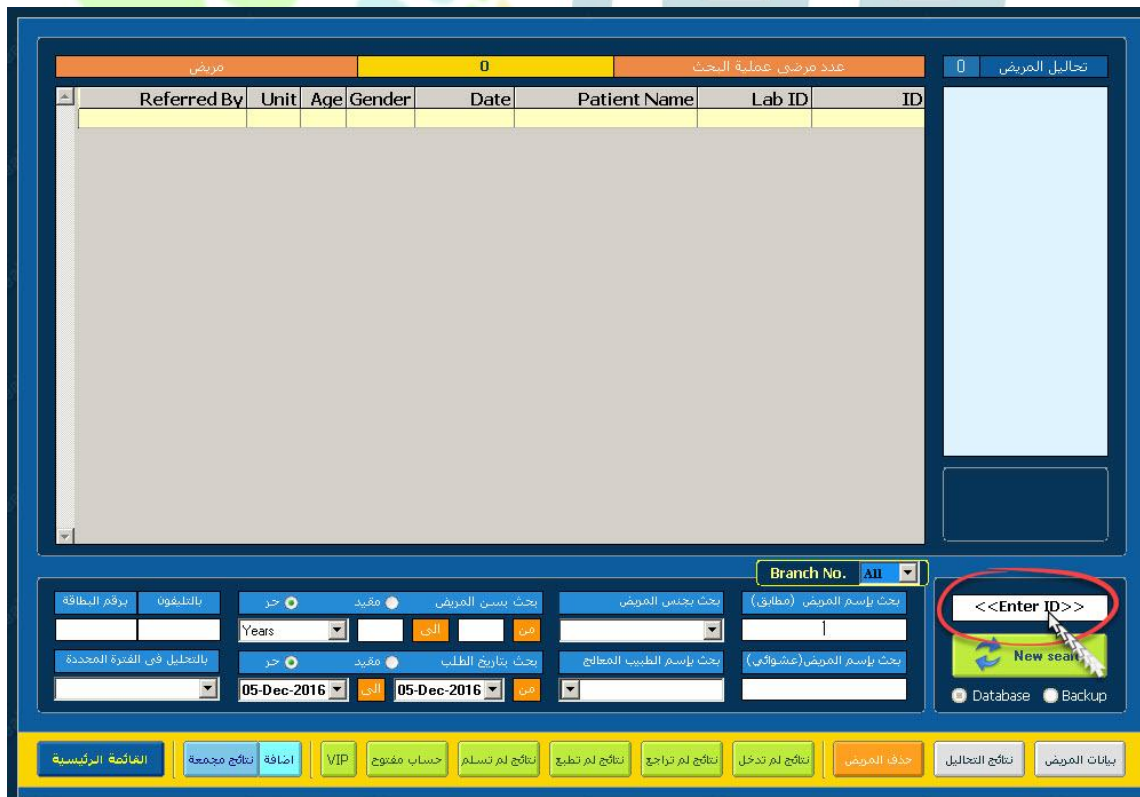

مريض		4		عدد مرضى عملية البحث		0		تخاليل المريض	
Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID		
Himself	Years	22	Male	Aug-2016-15	محمد احمد على	5016120510010	1016081510016		
Himself	Years	22	Male	Oct-2016-30	محمد احمد على	5016120510010	1016103010012		
Himself	Years	22	Male	Dec-2016-05	محمد احمد على	5016120510010	1016120510014		
Himself	Years	22	Male	Dec-2016-05	محمد احمد على	5016120510010	1016120510021		

Branch No. All

برقم البطاقة

بالتليفون

بحر

مفيد

بحر بسن المريض

بحر بحسن المريض

بحر باسم المريض (مطابق)

Years

الى

من

بحر

مفيد

بحر بتاريخ الطلب

بحر باسم الطبيب المعالج

بحر باسم المريض (عشوائي)

بالتحليل في الفترة المحددة

05-Dec-2016

الى

05-Dec-2016

من

بحر باسم المريض (عشوائي)

5016120510010

New search

Database Backup

القائمة الرئيسية

تأثير مجموعة

اضافة

VIP

حساب مفتوح

نتائج لم تسلم

نتائج لم تطبع

نتائج لم تراجع

نتائج لم تدخل

حذف المريض

نتائج التحاليل

بيانات المريض

for lab service

مريض		4		عدد مرضى عملية البحث		12 تحليل المريض	
Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
Himself	Years	22	Male	Aug-2016-15	محمد احمد على	5016120510010	1016081510016
Himself	Years	22	Male	Oct-2016-30	محمد احمد على	5016120510010	1016103010012
Himself	Years	22	Male	Dec-2016-05	محمد احمد على	5016120510010	1016120510014
Himself	Years	22	Male	Dec-2016-05	محمد احمد على	5016120510010	1016120510021

زيارات المريض في المعمل والتحليل المطلوبة في كل زيارة

F.B.I.G.
PP.B.I.G.
R.B.I.G.
CBC
Urine
Cholesterol
VLDL
SGPT (ALT)
SGOT (AST)
Stool
Uric Acid
Triglyceride

Branch No. All

برقم البطاقة 	بالتليفون 	بحث باسم المريض من الى	بحث باسم المريض من الى	بحث باسم المريض (مطابق)
بالتحليل في الفترة المحددة 	من الى	بحث بتاريخ الطلب من الى	بحث باسم الطبيب المعالج 	بحث باسم المريض (عشوائي)

5016120510010

New search

☐ Database ☐ Backup

القائمة الرئيسية
إضافة نتائج مجمعة
VIP
حساب مفتوح
نتائج لم تسلم
نتائج لم تطبع
نتائج لم تراجع
نتائج لم تدخل
حذف المريض
نتائج التحليل
بيانات المريض

for lab service

11-1 متابعة تسجيل الحالات والتعديل عليها وإدخال النتائج وطباعة التقارير

يقوم المستخدم/ المستخدممين بتسجيل الدخول وتسجيل حالات المرضى ونتائجهم وطباعتها كما تم عرضها سابقا

يمكن لمدير النظام معرفة المستخدم الذى قام بتسجيل الحالة وعدد مرات التعديل عليها بالوقت والتاريخ ومعرفة المستخدم الذى قام بتسجيل نتائج التحاليل وعدد مرات طباعة التقرير الخاص بالنتيجة وآخر مستخدم قام بالطباعة بالوقت والتاريخ كما هو موضح .



The image shows the RealLab system login interface. It features a green header with the text "RealLab system login". Below this, there are two input fields: "User Name" and "Password". The "User Name" field is currently set to "admin", and a dropdown menu is open showing a list of users: "admin", "Ahmed", "Ali", and "Mohammed". Below the input fields, there are two checkboxes: "Show password characters" and "Remember Login". At the bottom of the interface, there is a yellow section containing the "real lab" logo, a "Sign in" button, and an "Exit" button. The text "SQL Server Database" is visible at the bottom right of the yellow section.



Male	النوع	احمد محمد علي	الاسم / السيد	1017010510015	الكويد	
Years	العمر	23	Himself	الجهة	1	Lab ID

Test Abbreviation	P	T	Result	Status	Finish	Verify	Print	Export
Urine			See Report		☒	☒	☒	☐
Stool			See Report		☒	☒	☒	☐
CBC			See Report		☐	☐	☒	☐
F.B.I.G.			22	Low	☒	☒	☒	☐
PP.B.I.G.			22		☒	☒	☒	☐
R.B.I.G.			22		☒	☒	☒	☐
SGPT (ALT)			33		☒	☒	☒	☐
SGOT (AST)			23		☒	☒	☒	☐
Albumin			76	High	☒	☒	☒	☐

Male

النوع

احمد محمد على

الاسم / السيد

1017010510015

الكود

Years 23

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

P

T

Test Abbreviation

Result

Status

Finish

Verify

Print

Export

Urine	See Report		☒	☒	☒	☐
Stool	See Report		☒	☒	☒	☐
CBC	See Report		☐	☐	☒	☐
F.B.I.G.	22	Low	☒	☒	☒	☐
PP.B.I.G.	22		☒	☒	☒	☐
R.B.I.G.	22		☒	☒	☒	☐
SGPT (ALT)	33		☒	☒	☒	☐
SGOT (AST)	23		☒	☒	☒	☐
Albumin	76	High	☒	☒	☒	☐

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

النافذة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرفق

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

2

عدد المرضى اليوم

All

احمد محمد على

المسيد محمد احمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Male

النوع

احمد محمد على

الاسم / السيد

1017010510015

الكود

Years 23

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

P

T

Test Abbreviation

Result

Status

Finish

Verify

Print

Export

Urine	See Report		☒	☒	☒	☐
Stool	See Report		☒	☒	☒	☐
CBC	See Report		☐	☐	☒	☐
F.B.I.G.	22	Low	☒	☒	☒	☐
PP.B.I.G.	22		☒	☒	☒	☐
R.B.I.G.	22		☒	☒	☒	☐
SGPT (ALT)	33		☒	☒	☒	☐
SGOT (AST)	23		☒	☒	☒	☐
Albumin	76	High	☒	☒	☒	☐

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

النافذة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرفق

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

2

عدد المرضى اليوم

All

احمد محمد على

المسيد محمد احمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Male

النوع

احمد محمد علي

الاسم / السيد

1017010510015

الكود

Years 23

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

Test Abbreviation

P

T

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

R.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Albumin

Ahmed

تم تسجيل المريض بواسطة

Thursday, 05-Jan-17 05:43 PM

في تاريخ

0

عدد مرات التعديل

اخر تعديل تم بواسطة

في تاريخ

حساب المريض

Date

Thursday, 05-Jan-17 05:45 PM

User Name

Ahmed

Money

76

عينات المريض

Tube Name	Tests	Take

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرضي

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

عدد المرضى اليوم

2

All

احمد محمد علي

السيد محمد احمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Male

النوع

احمد محمد علي

الاسم / السيد

1017010510015

الكود

Years 23

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

Test Abbreviation

P

T

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

R.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Albumin

Test Abbreviation	Result	Status	Finish	Verify	Print	Export
Urine	See Report		☒	☒	☒	☐
Stool	See Report		☒	☒	☒	☐
CBC	See Report		☐	☐	☒	☐
F.B.I.G.	22	Low	☒	☒	☒	☐
PP.B.I.G.	22		☒	☒	☒	☐
R.B.I.G.	22		☒	☒	☒	☐
SGPT (ALT)	33		☒	☒	☒	☐
SGOT (AST)	23		☒	☒	☒	☐
Albumin	76	High	☒	☒	☒	☐

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرف

تقرير فارغ

التاريخ المرضي

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

عدد المرضى اليوم

2

All

احمد محمد علي

السيد محمد احمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All



Male

النوع

السيد محمد احمد

الاسم

1017010510022

الكود

Years 23

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

Test Abbreviation

P

T

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

ESR

Ali

تم تسجيل المريض بواسطة

Thursday, 05-Jan-17 05:47 PM

في تاريخ

0

عدد مرات التعديل

اخر تعديل تم بواسطة

في تاريخ

حساب المريض

Date

Thursday, 05-Jan-17 05:47 PM

User Name

Ali

Money

66

عينات المريض

Tube Name	Tests	Take

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرفي

تقرير فارغ

التاريخ المرضي

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

عدد المرضى اليوم

2

Ali

احمد محمد علي

السيد محمد احمد

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

Male

النوع

السيد محمد احمد

الاسم

1017010510022

الكود

Years 23

العمر

Himself

الجهة

1

Lab ID

Test Abbreviation

P

T

Urine

Stool

CBC

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

ESR

Test Abbreviation	P	T	Result	Status	Finish	Verify	Print	Export
Urine			See Report		☒	☒	☒	☐
Stool			See Report		☒	☒	☐	☐
CBC			See Report		☐	☐	☐	☐
F.B.I.G.			21	Low	☒	☒	☐	☐
PP.B.I.G.			32		☒	☒	☐	☐
SGPT (ALT)			34		☒	☒	☐	☐
SGOT (AST)					☐	☐	☐	☐
ESR					☐	☐	☐	☐

Ali

سجل نتيجة التحليل

Thursday, 05 Jan 2017 05:49 PM

في تاريخ

Ali

تمت المراجعة بواسطة

Thursday, 05 Jan 2017 05:49 PM

في تاريخ

3

عدد مرات الطباعة

Mohammed

اخر طباعة تمت بواسطة

Thursday, 05 Jan 2017 05:56 PM

في تاريخ

تم تسليم النتيجة بواسطة

في تاريخ

طبعت

مراجعة

تمت

ملاحظات

القائمة الرئيسية

SMS

طباعة طرفي

تقرير فارغ

التاريخ المرضي

طباعة

معاينة

تقرير مجمع

بيانات المريض

عدد المرضى اليوم

3

Ali

احمد محمد علي

السيد محمد احمد

علي محمد احمد عبد الخالق

Refresh

Individual

LabToLab

Contracts

VIP

Free

All

12-1 تسليم نتائج المريض عن طريق موقع نتيجة (NATIGH.COM)

يمكن تسليم نتائج المرضى ونتائج المعامل ونتائج الأطباء من خلال موقع نتيجة مباشرة وسيتم عرض كيفية رفع نتيجة المريض على الموقع وكيفية انشاء حساب للمعمل أو للطبيب المعالج للإطلاع على الحالات الخاصة بهم .

أولا :- كيفية رفع نتيجة مريض على موقع نتيجة

نقوم بتسجيل المريض فى برنامج المعمل وادخال رقم التليفون الخاص بالمريض فى الخانة المخصصة لذلك كما هو موضح **أو** نقوم بالضغط على أيقونة **NATIGH.COM**

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- إضافة مريض جديد وطباعة الباركود والأيصال الخاص به وإدخال النتائج وطباعتها.
- البحث عن مريض محدد أو عرض مرضي فترة معينة ومعرفة النتائج الغير منتهية وكذلك الغير محققة والغير مطبوعة.
- تسليم نتائج المرضى وتصفية الحسابات الخاصة بهم وحصر النتائج الغير مسلمة.

ادخال نتائج التحاليل

إضافة وتعديل بيانات المرضى

بحث عن مريض

تسليم نتائج المرضى

SQL SERVER

User Name admin Last Login Tuesday, 30 Aug 2016 06:22 PM SQL DATABASE Today Wednesday, 31-Aug-2016 12:17 PM

any ☒ TM ☐ TG ☐ CG **complete test menu**

Albumin Patient's tests **13**

Bilirubin Total CBC

Bilirubin Direct R.B.I.G.

Creatinine (Serum) SGPT (ALT)

Uric Acid SGOT (AST)

Cholesterol PT

Triglyceride Alk. Ph.

HDL Albumin

Hgb Bilirubin Total

ABO Bilirubin Direct

ESR Bilirubin Indirect

CRP Triglyceride

ASOT VLDL

Bleeding Time HCV antibodies

Clotting Time

HCV antibodies

RF (Rheumatoid Factor)

HBsAg

Widal Test

Brucella Test

Bilharzias Antibodies (serum)

Add select test Delete All

Taken outside lab ☐ Urine ☐ Stool ☐ Blood ☐ Semen ☐ CSF

09:00 PM 31-Aug-2016 تاريخ الاستلام 12:18 PM 31-Aug-2016 تاريخ الدخول

Lab. ID VIP كود المريض

Male Female محمد على عبد الله اسم المريض

Years 22 سن المريض 01234567890 موبيل/تليفون

Individual نوع الحساب رقم البطاقة

عنوان المريض

معلومات اضافية محمد رامى /د.أ. الطبيب المعالج

معلومات اضافية جهة الاحالة

صائم ☒ عدد ساعات الصيام

مريض بفقر الدم ☒ هل يؤخذ علاج للسكر

مريض بالتهاب المفاصل ☐ هل يؤخذ علاج للعد

مريض بالضغط الدم ☐ هل يؤخذ مضاد حيوي

مريض بالفشل كلوي ☐ هل يؤخذ علاج للكبد

مريض بالذئبة الحمراء ☐ هل تم عمل اشعاع بالصيغة او بالموجات الصوتية خلال يومين

ملاحظات

NATIGH.COM 1R7C 2J1R 5D3U ☒ Send SMS

Send E-mail By Fax

181 الباقي للمعمل 181 اجمالي التحاليل

0.0 الباقي للمريض % 0 الخصم 0 الخصم

المدفوع 0 قيمة الخصم

المدفوع 181 التكلفة بعد الخصم

المدفوع 0.0 المدفوع سابقا

حفظ

تراجع

تسجيل

إضافة

الكارنيه

ورقة العمل

الباركود

الإيصال

التكلفة الرقمية

نتائج التحاليل

شاشة المريض

نقوم بتسجيل التحاليل للمريض وادخال النتائج كما تم توضيحها سابقا .

نقوم بفتح الأداة الخاصة برفع النتائج كما هو موضح ونقوم بإختيار المريض المراد رفع نتيجته



admin

☒ Remember me

NATIGH.COM UPLOADER

RealLab Company

نقوم باختيار المريض المراد رفع النتيجة الخاصة به للموقع ثم نقوم بالضغط على زر **Upload**

محمد على عبد الله	الاسم	1016083110016	الكود	
محمد رامى	الطبيب	Male	22 Years	
	الجهة	181	181	

Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓
R.B.I.G.	55		✓
SGOT (AST)	43	High	✓
SGPT (ALT)	43		✓
PT	14	High	✓
Albumin	45	High	✓
Alk. Ph.	5		✓
Bilirubin Total	.5		✓
Bilirubin Direct	.2		✓
Triglyceride	130		✓
HCV antibodies	Negative		✓
Bilirubin Indirect	0.3		✓
VLDL	26		✓

1	عدد المرضى اليوم
1016083110016	محمد على عبد الله

Select All Unselect All

Upload All Selected Patient

Refresh

August 2016

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Today: 31/08/2016

Patient Phone: 01234567890 Patient Password: 1R7C 2J1R 5D3U Lab ID: Doctor ID:

Exit Admin Block Upload Preview

محمد علي عبد الله	الاسم	1016083110016	الكود
محمد رامي	أ.د./الطبيب	Male	22 Years
	الجهة	181	181

Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓
R.B.I.G.	55		✓
SGOT (AST)	43	High	✓
SGPT (ALT)	43		✓
PT	14	High	✓
Albumin		igh	✓
Alk. Ph.			✓
Bilirubin Total			✓
Bilirubin Direct			✓
Triglyceride			✓
HCV antibodies	Negative		✓
Bilirubin Indirect	0.3		✓
VLDL	26		✓



Please wait . . .
In Progress 1 From 1

Patient Phone: 01234567890

Patient Password: 1R7C 2J1R 5D3U

Lab ID:

Doctor ID:

Exit

Admin

Block

Upload

Preview

1 عدد المرضى اليوم

1016083110016 محمد علي عبد الله

Select All Unselect All

Upload All Selected Patient

Refresh

August 2016

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Today: 31/08/2016

محمد علي عبد الله	الاسم	1016083110016	الكود
محمد رامي	أ.د./الطبيب	Male	22 Years
	الجهة	181	181

Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓
R.B.I.G.	55		✓
SGOT (AST)	43	High	✓
SGPT (ALT)	43		✓
PT	14	High	✓
Albumin	45	High	✓
Alk. Ph.	5		✓
Bilirubin Total	.5		✓
Bilirubin Direct			✓
Triglyceride			✓
HCV antibodies			✓
Bilirubin Indirect			✓
VLDL			✓



تم رفع نتائج المريض للموقع بنجاح

OK

Patient Phone: 01234567890

Patient Password: 1R7C 2J1R 5D3U

Lab ID:

Doctor ID:

Exit

Admin

Block

Upload

Preview

1 عدد المرضى اليوم

1016083110016 محمد علي عبد الله

Select All Unselect All

Upload All Selected Patient

Refresh

August 2016

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Today: 31/08/2016

بعد ذلك يمكن للمريض ان يقوم بالإطلاع على نتيجته من الموقع كما يمكن أيضا ان يقوم بطباعة النتيجة او تصديرها كملف **Word - PDF**

يقوم المريض أو الطبيب المعالج أو المعمل بالدخول على صفحة WWW.NATIGH.COM الخاصة بعرض النتائج

، أو بالدخول عن طريق موبايل أبليكيشن يمكن تحميله من **GOOGLE PLAY** أو من الرابط الأتى مباشرة

[http://play.google.com/store/apps/details?id=com.natighweb.a
pp](http://play.google.com/store/apps/details?id=com.natighweb.app)

يقوم المستخدم باختيار نوع حسابه (**Patient – Doctor – Laboratory**)
فى حالة المريض يقوم باختيار **Patient** ثم يقوم بكتابه كود المعمل ورقم التليفون الخاص به
أو كتابه الباسورد الخاصة به مباشرة بدون كتابة كود المعمل او رقم تليفون .
فى حالة طبيب معالج أو معمل يقوم بإدخال كود المعمل والأى دى والباسورد الخاصة به
بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على **Sign In** للدخول إلى صفحة الاستقبال الخاصة بالمعمل
الذى تم منه رفع النتائج .
يقوم المريض بالضغط على أيقونة **Result** لعرض النتيجة الخاصة به كما هو موضح .

NATIGH

NATIGH

Log in here

☒ Patient
 ☐ Laboratory
 ☐ Doctor

☒ 125
 ☒ 01234567890

☐ Password

SIGN IN

NATIGH

WELCOME, محمد علي عبد الله

RESULTS **LOGOUT**

Patient Name : محمد علي عبد الله Patient info : Male - 22 Years

Request date	Group Name	Test Name	Result
2016-08-31	LIVER FUNCTIONS	Total Bilirubin	.5
		Direct Bilirubin	.2
		Indirect Bilirubin	0.3
		SGOT (Aspartate Aminotransferase)	43
		SGPT (Alanine Aminotransferase)	43
		(AST/ALT) Ratio	1
		ALP (Alkaline Phosphates)	5
BLOOD PICTURE	Complete Blood Picture	Serum Albumin	45
			SEE REPORT

لمعرفة عدد المرضى المرفوع نتائجهم خلال فترة زمنية معينة أو لمعرفة عدد المرضى الكلى

نقوم بالضغط على أيقونة Admin

الاسم

محمد على عبد الله

الطبيب

أ.د. / محمد رامى

الجهة

الكود

1016083110016

السن/النوع

Male 22 Years

الحساب

181 181



Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓
R.BI.G.	55		✓
SGOT (AST)	43	High	✓
SGPT (ALT)	43		✓
PT	14	High	✓
Albumin	45	High	✓
Alk. Ph.	5		✓
Bilirubin Total	.5		✓
Bilirubin Direct	.2		✓
Triglyceride	130		✓
HCV antibodies	Negative		✓
Bilirubin Indirect	0.3		✓
VLDL	26		✓

عدد المرضى

1

1016083110016 محمد على عبد الله

☐

Select All

Unselect All

Upload All Selected Patient

Refresh

August 2016

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	
3	4	5	6	7	8	9

Today: 21/09/2016

Patient Phone

01234567890

Patient Password

1R7C 2J1R 5D3U

Lab ID

Doctor ID

Exit

Admin

Block

Upload

Preview

نحدد الفترة الزمنية المراد عرض عدد المرضى خلالها ثم نقوم بالضغط على زر (عدد المرضى)

الاسم	1016083110016	الكود	
الطبيب	Male	22 Years	
الجنس	181	181	
الجهة			

Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓
R.BI.G.			
SGOT (A			
SGPT (A			
PT			
Albumin			
Alk. Ph.			
Bilirubin			
Bilirubin			
Triglyce			
HCV ant			
Bilirubin			
VLDL			



عدد المرضى التاليين على الموقع

1000 / 7

2016-08-31

تاريخ انتهاء الاشتراك:

عدد واجضاء المرضى:

من 31-Aug-2016

الى 31-Aug-2016

عدد المرضى

1

حذف اقدم 100 مرضي

حذف اقدم 50 مرضي

حذف اقدم 10 مرضي



RealLab NATIGH.com v 1.595

RealLab Company شركة ريال لاب

نصميم:

<https://www.facebook.com/RealLab.Systems>

Sales : (+2) 011 4484 8686 / 011 5200 6062

Support: (+2) 01111131541 / 01111131561 / 01111131571

محمد علي عبد الله	الاسم
محمد رامي	الطبيب
	الجهة

1016083110016			الكود
Male	22	Years	السن/النوع
181	181		الخصاب



1	عدد المرضى اليوم
1016083110016	محمد علي عبد الله

Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓

R.B.I.G.
SGOT (A
SGPT (A
PT
Albumin
Alk. Ph.
Bilirubin
Bilirubin
Triglyce
HCV ant
Bilirubin
VLDL



1000 / 7

عدد المرضى الحاليين على الموقع

2016-08-31

تاريخ انتهاء الاشتراك:

عدد واجضاء المرضى:

7

عدد المرضى

31- Jul -2016

من

31-Aug-2016

الي

حذف اقدم 100 مرضي

حذف اقدم 50 مرضي

حذف اقدم 10 مرضي

Patient Phone

0



RealLab NATIGH.com

V 1. 595

RealLab Company

شركة ريال لاب

تصميم:

<https://www.facebook.com/RealLab.Systems>

Sales : (+2) 011 4484 8686 / 011 5200 6062

Support: (+2) 01111131541 / 01111131561 / 01111131571

Select All

ed Patient

16

Wed Thu Fri

3 4 5

10 11 12

17 18 19

24 25 26

1 2 3

7 8 9

/2016

لحذف نتيجة مريض من على موقع نتيجة نقوم **بتحديد المريض** ثم نقوم بالضغط على زر **Block**

The screenshot displays the RealLab NATIGH.com web application interface. At the top, there is a patient information section with fields for Name (محمد علي عبد الله), ID (1016083110016), Gender (Male), Age (22 Years), and Height (181). Below this is a table of test results with columns for Test abbreviation, Result, Status, and Finish. The tests listed include CBC, R.B.I.G., SGOT (AST), SGPT (ALT), PT, Albumin, Alk. Ph., Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Triglyceride, HCV antibodies, Bilirubin Indirect, and VLDL. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking for confirmation to delete the patient's results. The dialog has an 'OK' button circled in red. On the right side, there is a sidebar with a list of patients, a 'Select All' button, an 'Upload All Selected Patient' button, a 'Refresh' button, and a calendar for August 2016. At the bottom, there are buttons for 'Exit', 'Admin', 'Block' (circled in red), 'Upload', and 'Preview'.

Test abbreviation	Result	Status	Finish
CBC	See Report		✓
R.B.I.G.	55		✓
SGOT (AST)	43	High	✓
SGPT (ALT)	43		✓
PT	14	High	✓
Albumin	45	High	✓
Alk. Ph.	5		✓
Bilirubin Total	.5		✓
Bilirubin Direct			✓
Triglyceride			✓
HCV antibodies			✓
Bilirubin Indirect			✓
VLDL			✓

RealLab NATIGH.com

هل انت موافق على حذف نتائج هذا المريض من على الموقع

OK Cancel

Exit Admin **Block** Upload Preview

August 2016

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Today: 31/08/2016

بيانات موقع نتيجة الخاصة بالمريض :-

يمكن تسليم المريض بيانات موقع نتيجة للإطلاع على نتيجته عن طريق طباعة البيانات على الإيصال

كما هو موضح .

Printed In Wednesday, 31 Aug 2016 2:09

برجاء الاحتفاظ بالإيصال لعين استلام النتيجة

معامل ريال لاب سيستم للتحاليل الطبية

استلمنا من	محمد علي عبد الله	22 سنة	نفقة وقطرها	0	جنيهاً لا غير
قيمة تحاليل إجماليها	181	جنيهاً لا غير	الباقى للمعمل	181	جنيهاً لا غير
تاريخ استلام النتيجة	Thursday, 01 Sep 2016 09:00 PM		الطبيب المعالج	أ.د. محمد رامي	
كود المريض	1 016083 110016		نوع التعامل	Individual	

Test Group	No. Of test	Price
LIPIDS PROFILE >> VLDL, TriG	2	20
LIVER FUNCTIONS >> Bili In., Bili D., Bili T., ALP, ALB, SGPT, SGOT	7	65
Hepatitis Markers >> HCV Ab	1	50
Coagulation Profile >> PT	1	20
Blood Glucose >> R.BI.G.	1	6
COMPLETE BLOOD COUNT	1	20
		Total 181 L.E.

E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 0144848686 - 0108408154

الدقهلية : المنصورة

WWW.NATIGH.COM

By phone: 125-01234567890

By password: 1R7C2J1R5D3U

1-13 التاريخ المرضى للمريض / عمل تقرير بالتاريخ المرضى :-

فى حالة زيارة المريض للمعمل أكثر من مرة يمكن عمل تاريخ مرضى للمريض بنتائج تحاليله السابقة ، ويقوم البرنامج بإدراجها تلقائيا فى تقرير النتيجة إذا كان المريض قد أجرى نفس التحليل فى مرة سابقة
ويمكن ادراج التاريخ المرضى لعدة تحاليل فى تقرير النتيجة مع مجموعة تحاليل من مجموعة أخرى او فى تقرير مجمع كما سيتم عرضه بالتفصيل .

يقوم البرنامج بالتعرف على المريض لعمل التاريخ المرضى عن طريق الاسم أو عن طريق كود المعمل

ويتم ضبط اعدادات طريقة فرز وتجميع التاريخ المرضى من نافذة (إعدادات التقرير)

The screenshot shows the 'Report top Space' window in the 'real lab system' software. The window is divided into several sections:

- Doctor's signature:** Fields for 'Doctor's signature:', 'Font', and 'Thanks'.
- Page margin:** Fields for 'Left' (1) and 'Bottom' (0).
- Page size:** A dropdown menu set to 'A4 (Large)'.
- Report top Space:** A field set to '3.5 cm'.
- Print options:** Radio buttons for 'Print top Space' (selected) and 'Print bottom Space'.
- Font settings:** A table with columns for 'Font' and 'real lab system'.
- real lab system logo:** A green leaf logo with the text 'realLab'.
- Report content:** A table with columns for 'Font' and 'real lab system'.
- Footer:** A section containing the 'real lab system' logo, contact information (E-mail: sis_soft_group@yahoo.com, Tel: 01144848686), and a 'Save' button highlighted with a red circle.

فى حالة تحليل معين تم إجراؤه أكثر من مرة يقوم البرنامج بعرضه تلقائياً فى تقرير النتيجة كما هو موضح

any

TM

TG

CG

complete test menu

Urine

Stool

CBC

F.BLG.

PP.BLG.

R.BLG.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Alk. Ph.

Albumin

Bilirubin Total

Bilirubin Direct

Creatinine (Serum)

Uric Acid

Cholesterol

Triglyceride

HDL

Hgb

ESR

PT

ABO

Patient's tests

0

Add select test

Delete

All

Taken outside lab

Urine

Stool

Blood

Semen

CSF

14-Mar-2017

تاريخ الاستلام

12:49 PM

14-Mar-2017

تاريخ الدخول

Lab. ID

VIP

كود المريض

Male

Female

محمد على

اسم المريض

Years

محمد على محمد على

موبايل/تليفون

Individual

رقم بطاقة/ الملف

عنوان المريض

معلومات اضافية

أ.د.

الطبيب المعالج

معلومات اضافية

جهة الإحالة

صائم

عدد ساعات الصيام

هل يؤخذ علاج للسكر

هل يؤخذ علاج لسيولة الدم

هل يؤخذ علاج للفيروسات

للسيدات هل يوجد حمل

هل تم عمل اشعاع بالصعقة او بالموجات الصوتية خلال يومين

مرضى بفقر الدم

هل يؤخذ علاج للغدد

هل يؤخذ مضاد حيوى

هل يؤخذ علاج للكبد

مرضى بالتهاب المفاصل

مرضى بالضغط الدم

مرضى بالفشل كلوي

مرضى بالذئبة الحمراء

ملاحظات

NATIGH.COM

Print Result Password

Send SMS

Send E-mail

By Fax

0.0

الباقى للمعمل

0.0

الباقى للمريض

المدفوع

احتمالى التحاليل

الخصم

قيمة الخصم

التكلفة بعد الخصم

المدفوع سابقا

تراجع

حفظ

تعديل

إضافة

الكارتونية

ورقة العمل

الباركود

الإيصال

التأثير الرقائدية

نتائج التحاليل

تأثير المرضى

Patient Name	السيد/ محمد علي محمد علي	Patient ID.	1 017031 410059
Age / Sex	23 Years / Male	Request Date	14-Mar-2017 12:42 PM
Referred By		Lab ID	810170314081

BIOCHEMISTRY REPORT

Blood Glucose :

Reference Range :

▲ F.BI.G. (Fasting Blood Glucose)	:	95	mg/dL	Normal: 70 - 110 mg/dL
▲ PP.BI.G. (Postprandial Blood Glucose)	:	112	mg/dL	Normal: Up To 150 mg/dL
▲ R.BI.G. (Random Blood Glucose)	:	115	mg/dL	N: Up To 160 mg/dL

يظهر التاريخ المرضى للمريض اسفل التقرير بتاريخ زيارته ونتائجها

Patient History In Our Lab.

	FBG	PPBG	RBG
05-Mar-2017	90	110	120
07-Feb-2017	99	128	150

لتعطيل خاصية إظهار التاريخ المرضى بشكل تلقائي في التقرير:-

Male النوع السيد محمد على محمد على 1017031410059 الكود
Years 23 العمر جهة الإحالة 3 5017031410055 كود المعمل

Blood Glucose

Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges	Verified	Print
F.BLG.	95	mg/dL		Normal: 70 - 110 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
PP.BLG.	112	mg/dL		Normal: Up To 150 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
R.BLG.	115	mg/dL		N: Up To 160 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
☐ عرض عينة البول في التقرير المجموع						
Comment						☒
☒						

الرئيسية رجوع 2 Patient History معاينة الطباعة طباعة حفظ

Result screen title: Blood Glucose Normal Range: Reference Range :
Report Main Title: BIOCHEMISTRY REPORT Comment:
Report Sub Title: Blood Glucose :
Urine Sample

☒ Show abnormal result background color
☒ Print Status Flag (Low, High, Critical)
☒ Print Patient History Automatically

Main Symbol: Sub Symbol: Sub-title Symbol:

BIOCHEMISTRY REPORT

BLOOD GLUCOSE :

0.2 0.9 6.8 7.3 9.1 10.5 12.5
● FBG (Fasting Blood Glucose) : 185 mg/dL High
1.6

1 ● Urine sample
2 ● Glucose : ++
مقدار الإحالة 2.2

Reference Range :
محاذاة النص من اليسار
Normal: 70 - 110 mg/dL
عرض الخانة لتسج المحتوى 5.5

Absent

Comment: No comment
Sample taken outside lab.
تعديل لون وخط أي عنصر قم بالنقر عليه مرة واحدة

Vertical Space After Sub Title: 1 Additional V. Space To Ref. Range: 0
Vertical Space Between Tests: 0.8

Printing printer
Foxit Reader PDF Printer

جميع المسافات بالسنتيمتر

عودة تعديل ألوان رأس وذييل التقرير حفظ الإعدادات

فى حالة تحليل الرغبة فى اظهار تاريخ مرضى لمجموعة تحاليل مع تحاليل مجموعة أخرى

نقوم بالضغط على زر **Patient History** فتظهر تحاليل المريض التى أجراها فى زيارته السابقة للمعمل

نقوم باختيار التحاليل المراد ادراج نتائجها السابقة فى تقرير النتيجة عن طريق الضغط مرتين على التحليل .

Maleالنوع

Years23العمر

1017031410059الكود

35017031410055كود المعمل

الاسم السيد / محمد على محمد على

جهة الإحالة



Blood Glucose

Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges	Verified	Print
F.B.G.	95	mg/dL		Normal: 70 - 110 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
PP.B.G.	112	mg/dL		Normal: Up To 150 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
R.B.G.	115	mg/dL		N: Up To 160 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		

☐ عرض عينة البول فى التقرير المجموع

Comment

القائمة الرئيسية

رجوع

2 Patient History

معاينة الطباعة

طباعة

حفظ

عمل تاريخ مرضى للمريض فى تقرير منفصل

نقوم بالضغط على زر **Patient History** فتظهر تحاليل المريض التى أجراها فى

زياراته السابقة للمعمل

نقوم باختيار التحاليل المراد ادراج نتائجها السابقة فى تقرير منفصل عن طريق الضغط مرتين على التحليل .

Male	النوع	محمد على محمد على	السيد /	الاسم	1017031410059	الكود	
Years	23	العمر		جهة الإحالة	3	5017031410055	

Blood Glucose						
Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges	Verified	Print
F.B.I.G.	95	mg/dL		Normal: 70 - 110 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
PP.B.I.G.	112	mg/dL		Normal: Up To 150 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
R.B.I.G.	115	mg/dL		N: Up To 160 mg/dL	☒	☒
☐ Urine Sample	Glucose	No Sample	Acetone	No Sample		
					☐ عرض عينة البول فى التقرير المجموع	
Comment						☒
						☒

القائمة الرئيسية	رجوع	2 Patient History	معاينة الطباعة	طباعة	حفظ
------------------	------	-------------------	----------------	-------	-----

Print history in separate report **نقوم باختيار**

Male	النوع	محمد علي محمد علي	السيد /	الاسم	1017031410059	الكود
Years	23			جهة الإحالة	5017031410055	كود المعمل

1 Patient tests in our lab.

CBC

➡
➡

15 Available tests in report

FBG
 PPBG
 RBG
 SGPT
 SGOT

⬆
⬆

Patient make SGOT (AST) test 2 times

Result status	Test result	Analysis date
	35	05/03/2017
	36	07/02/2017

CBC

Semen

أعمل تقرير تاريخ مرضي منفصل

عودة

الغاء الحالي

موافق

طباعة

معاينة طباعة

☐ Attach history in result report

☒ Print history in separate report

فيظهر التاريخ المرضي في تقرير منفصل كما هو موضح .

Patient History						History from 07-Feb-2017 to 14-Mar-2017		السيد / محمد علي محمد علي	
Analysis Date	FBG	PPBG	RBG	SGPT	SGOT				
14-Mar-2017	95	112	115	34	39				
05-Mar-2017	90	110	120	30	35				
07-Feb-2017	99	128	150	30	36				

لعمل تاريخ مرضى لتحليل صورة الدم

Male

النوع

1017031410059

الكود

Years 23

العمر

محمد علي محمد علي

الاسم

السيد /

الاسم

5017031410055

كود المعمل

جهة الإحالة

6

Patient tests in our lab.

F.B.I.G.

PP.B.I.G.

R.B.I.G.

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

CBC

10

Available tests in report

Patient make CBC test 2 times

Result status	Test result	Analysis date
See Report	See Report	05/03/2017
See Report	See Report	07/02/2017

CBC

Semen

عودة

الغاء الحالي

موافق

طباعة

معاينة طباعة

Attach history in result report

Print history in separate report

لعمل تقرير تاريخ مرضى منفصل لتحليل صورة الدم

Patient History

Patient History: Blood Picture Results

السيد / محمد علي محمد علي

Analysis Date	Hgb	RBCs	HCT	MCV	MCH	MCHC	WBCs	Lin	Mon	Neu	Eos	Bas	Other	Plt	PCT	MPV
14-Mar-2017	16.5	4	54.45	136.12	41.25	30.3	9	10	10	70	10	0		400		
05-Mar-2017	15	5	49.5	99	30	30.3	7	25	10	60	5	0		350		
07-Feb-2017	13	4	42.9	107.25	32.5	30.3	9	15	10	73	2	0		400		

لعمل تاريخ مرضى لأكثر من مريض فى نفس التقرير

نقوم بالضغط على أيقونة (Patients) ثم نقوم بالضغط على زر
(بحث عن مريض) ، ونقوم بالبحث عن المرضى المراد عمل تاريخ مرضى لهم فى
نفس التقرير

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

- إضافة مريض جديد وطباعة الباركود والايصال الخاص به وإدخال النتائج وطباعتها.
- البحث عن مريض محدد او عرض مرضي فترة معينة ومعرفة النتائج الغير منتهية وكذلك الغير محققة والغير مطبوعة.
- تسليم نتائج المرضى وتصفية الحسابات الخاصة بهم وحصر النتائج الغير مسلمة.

ادخال نتائج التحاليل

اضافة وتعديل بيانات المرضى

بحث عن مريض

تسليم نتائج المرضى

SQL SERVER

User Name | admin | Last Login | Monday, 25 Jul 2016 04:02 PM | SQL DATABASE | Today | Monday, 25-Jul-2016 | 07:06 PM

نقوم باختيار المريض والضغط على زر (إضافة) ثم اختيار مريض آخر ونضغط (إضافة) وهكذا يتم اضافة المرضى معا

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر (نتائج مجمعة) لإختيار التحاليل التي سيتم عمل تاريخ مرضى لها كما هو موضح .

Referred By	Unit	Age	Gender	Date	Patient Name	Lab ID	ID
محمود هاشم	Years	49	Male	Apr-2017-08	محسن عبيد بولس		1017040810109
Himself	Years	37	Male	Apr-2017-03	محمد إبراهيم محمد		1017040310050
انور سلامه	Years	16	Male	Mar-2017-13	محمد اسماعيل السعدي		1017031310052
السيد حجازي	.Mons	5	Male	Apr-2017-12	محمد بهاء عماد		1017041210144
احمد جمال الفقي	Years	32	Male	Apr-2017-15	محمد جمال الدين		1017041510114
احمد جمال الفقي	Years	8	Male	Mar-2017-19	محمد جمال جلو		1017031910078
احمد جمال الفقي	Years	8	Male	Mar-2017-29	محمد جمال جلو		1017032910022
Himself	Years	30	Male	Mar-2017-30	محمد جمال عبدالسلام		1017033010165
هبة يوسف محمد	Years	30	Male	Apr-2017-08	محمد جمال عبدالسلام		1017040810154
حسام نجم	Years	6	Male	Apr-2017-18	محمد جمعة محمد عبد الحميد		1017041810047
احمد جمال الفقي	Years	62	Male	Apr-2017-19	محمد ذكي جمعه		1017041910037
عبدالله باز	Years	30	Male	Mar-2017-26	محمد رزق محمد مرعي		1017032610052
Himself	Years	4	Male	Apr-2017-12	محمد سعيد شريف		1017041210045
عبدالله باز	Years	45	Male	Mar-2017-14	محمد طه ابوالعنين		1017031410059
حسام نجم	Years	1.5	Male	Mar-2017-25	محمد عابد الشربيني		1017032510031
صلاح الطباخ	Years	40	Male	Apr-2017-02	محمد عاطف سليمان		1017040210091
احمد جمال الفقي	Years	40	Male	Apr-2017-04	محمد عامر ابراهيم		1017040410026
عبدالله باز	Years	30	Male	Mar-2017-16	محمد عبده الشريف		1017031610022
Himself	Years	22	Male	Mar-2015-10	محمد علي		1015031010019
وسيم هيكل	Years	62	Male	Apr-2017-08	محمد علي عبدالعاطي		1017040810086
وسيم هيكل	Years	39	Male	Mar-2017-30	محمد فاروق ابوشعشع		1017033010110
العناية المركزة	Years	55	Male	Mar-2017-18	محمد محمد فرغلي		1017031810040

Branch No. All

بحث باسم المريض (مطابق)

بحث باسم المريض (عشوائي)

بحث بتاريخ الطلب

بحث باسم الطبيب المعالج

بالنظير

بالنظير

26-Apr-2017 26-Apr-2017

Database Backup

إضافة نتائج مجمعة

VIP

حساب مفتوح

نتائج لم تسلم

نتائج لم تطبع

نتائج لم تراجع

نتائج لم تدخل

حذف المريض

نتائج التحاليل

بيانات المريض

27 Patient tests in our lab.

- F.B.I.G.
- PP.B.I.G.
- Urine
- Stool
- SGPT (ALT)
- SGOT (AST)
- Uric Acid
- Creatinine (Serum)
- Urea
- Bilirubin Total
- Cholesterol
- Triglyceride
- HDL
- LDL
- VLDL
- ESR
- CBC
- CRP
- Bilharzias Antibodies (serum)
- H pylori Ag (Stool)
- HBsAg
- HCV antibodies
- Free T3
- Free T4
- TSH
- HbA1C
- calprotectin

12 Available tests in report

نقوم باختيار
التحاليل المراد عمل
تاريخ مرضي لها
عن طريق الضغط
عليه ضغطتين
بالمؤوس

No Of Patients 2 Patient

Patient Name	Patient ID	Analysis Date
مختبر عبيد بولس	1017040810109	4/8/2017
محمد جمال الدين	1017041510114	4/15/2017

القائمة الرئيسية
عودة
حذف الكل
طباعة
معاينة طباعة

21 Patient tests in our lab.

- Urine
- Stool
- Urea
- Bilirubin Total
- Cholesterol
- Triglyceride
- HDL
- LDL
- VLDL
- ESR
- CBC
- CRP
- Bilharzias Antibodies (serum)
- H pylori Ag (Stool)
- HBsAg
- HCV antibodies
- Free T3
- Free T4
- TSH
- HbA1C
- calprotectin

6 Available tests in report

- FBG
- PPBG
- SGPT
- SGOT
- Uric
- Creat

No Of Patients 2 Patient

Patient Name	Patient ID	Analysis Date
مختبر عبيد بولس	1017040810109	4/8/2017
محمد جمال الدين	1017041510114	4/15/2017

القائمة الرئيسية
عودة
حذف الكل
طباعة
معاينة طباعة

Patient History

History from 08-Apr-2017 to 15-Apr-2017

Printed by: admin
Printed In: 26-Apr-2017

Analysis Date	Patient ID	Patient Name	FBG	PPBG	SGPT	SGOT	Uric	Creat
08-Apr-2017	1017040810109	محسن عبده بولس	204	287			4.2	0.95
15-Apr-2017	1017041510114	محمد جمال الدين	99		23	16	6.8	1.15



2 – ورقة العمل Work Sheet للمرضي أو للتحاليل

Real Lab System

المعروض في هذا الجزء :-

داخل هذا الجزء :-

- 1 – ورقة عمل لمجموعة من المرضى خلال فترة زمنية معينة .
 - 2 – ورقة عمل لمجموعة من التحاليل خلال فترة زمنية معينة – أو لتحليل معين .
 - 3 – تصنيف تحاليل الفترة المحددة .
 - 4 – ورقة عمل باسم مجموعة (LOG)
- طباعة ورقة عمل لمجموعة من المرضى في فترة زمنية محددة وذلك بأسمائهم أو أكوادهم .
- طباعة ورقة عمل لتحليل معين في فترة زمنية محددة أو مجموعة من التحاليل التي يتم تحديدها .
- عمل تصنيف لتحاليل فترة محددة لمعرفة عدد مرات اجراء كل تحليل في هذه الفترة

ورقة العمل Work Sheet للمرضى أو للتحاليل :-

يمكن طباعة ورقة عمل لمجموعة من المرضى فى فترة زمنية محددة وذلك بأسمائهم أو أكوادهم
كما يمكن طباعة ورقة عمل لتحليل معين فى فترة زمنية محددة أو مجموعة من التحاليل التى يتم
تحديدتها ، كما يمكن طباعة ورقة عمل لمجموعة عمل (Log) فى الفترة المحددة .
كما يمكن عمل تصنيف لتحاليل فترة محددة لمعرفة عدد مرات اجراء كل تحليل فى هذه الفترة

نقوم بالضغط على أيقونة **Work Sheet** ثم نقوم باختيار (ورقة عمل بأسماء المرضى)
أو (ورقة عمل بأسماء التحاليل) على حسب نوع ورقة العمل المطلوبة .

The screenshot displays the 'real lab' software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Exit, About Us, Send Result, Setting, System, Users, Statistics, Accounts, Tools, Work sheet, Laboratory, and Patients. The 'Work sheet' option is highlighted. Below the navigation bar, a central panel contains an illustration of a hammer and a blueprints, along with text in Arabic explaining the functionality of the 'Work sheet' feature. At the bottom, there are two buttons: 'ورقة عمل بأسماء التحاليل (Log)' and 'ورقة عمل بأسماء المرضى'. The bottom status bar shows the user name 'admin', last login date 'Saturday, 09 Jul 2016 09:31 AM', SQL DATABASE, and the current date and time 'Saturday, 09-Jul-2016 12:38 PM'.

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- طباعة ورقة عمل لمجموعة من المرضى فى فترة محددة وذلك بأسمائهم أو أكوادهم
- طباعة ورقة عمل لتحليل معين فى فترة زمنية محددة أو مجموعة من التحاليل التى تم تحديدها فى الفترة المحددة (Log) وكذلك طباعة ورقة عمل لمجموعة عمل
- يمكنك اختيار طباعة التحاليل الغير منتهية فقط أو طباعة الكل

User Name: admin | Last Login: Saturday, 09 Jul 2016 09:31 AM | SQL DATABASE | Today: Saturday, 09-Jul-2016 12:38 PM

1-2 أولا :- ورقة عمل بأسماء المرضى :-

مثال على كيفية انشاء ورقة عمل لمجموعة من المرضى فى فترة زمنية محددة وذلك بأسمائهم أو أكوادهم

The screenshot displays the 'real lab' software interface. At the top, a menu bar includes options: Exit, About Us, Send Result, Setting, System, Users, Statistics, Accounts, Tools, Work sheet (highlighted with a red circle), Laboratory, and Patients. Below the menu, a central instruction window contains an image of a hammer and a blueprint, along with the following text in Arabic:

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

- طباعة ورقة عمل لمجموعة من المرضى فى فترة محددة وذلك بأسمائهم أو أكوادهم
- طباعة ورقة عمل لتحليل معين فى فترة زمنية محددة أو مجموعة من التحاليل التى تم تحديدها
- وكذلك طباعة ورقة عمل لمجموعة عمل (Log) فى الفترة المحددة
- يمكنك اختيار طباعة التحاليل الغير منتهية فقط أو طباعة الكل

At the bottom of the interface, there are two buttons: 'ورقة عمل بأسماء التحاليل (Log)' and 'ورقة عمل بأسماء المرضى' (highlighted with a red circle). The bottom status bar shows: User Name: admin, Last Login: Wednesday, 15 Feb 2017 09:54 AM, SQL DATABASE, Today: Sunday, 19-Feb-2017 09:49 AM, and a vertical 'SQL SERVER' label on the right.

نافذة ورق العمل حسب اسماء المرضى:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لليوم التالي أو لفترة زمنية محددة أو لمجموعة محددة من المرضى بواسطة الاسم أو الكود

All	Patient ID	Patient Name	435
1414041610019		ألاء رضا	
1614041610013		محمد السيد أحمد	
1414041610026		إم عمرو بدر	
1414041610033		أحمد محمد عبد الخالق	
1614041610037		محمد السيد أحمد	
1414041610040		مني حامد العراقي	
1414041610057		شمس احمد على	
1614041610051		نجاة أحمد	
1414041610064		عبدالله عبد الرحمن هجرس	
1514041710013		عليه راضي الدسوقي	
1514041710020		فاطمة محمد الزغبى	
1514041710037		سمير السيد شحتو	
1514041710044		مسعد عبد الحليم	
1514041710051		محمود محمد المعيدى	
1514041710068		ساميه رضا زكريا	
1514041710075		ام كريم يوسف وطفه	
1514041710082		كريمة محمد حسن	
1514041710099		رحاب طاهر فوزى	
1514041710112		احمد محمد القبطانى	
1514041710129		مياده ممدوح المنسى	
1514041710136		زوقت على البيلى	
1514041710143		امنه المهدي	
1514041710150		منى عبد الرحيم	
1514041710167		جومانه ياسر	
1514041710174		فاطمة محمد	
1514041710181		دنيا ربيع الرفاعى	
1514041710198		نهله جمال حسون	
1614041810017		قاسم	

Refresh 19-Feb-2014 من تاريخ 19-Feb-2015 الى

طباعة ورقة العمل الخاصة بالمريض المحدد فقط

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند اختيار مجموعة مرضى)

طباعة ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (كاملة) -

طباعة ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (مختصرة) -

جهة الإحالة

من كود رقم

الى كود رقم

Print

معانة ورقة العمل قبل الطباعة

القائمة الرئيسية

نافذة ورق العمل حسب اسماء المرضى:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لليوم التالي أو لفترة زمنية محددة أو لمجموعة محددة من المرضى بواسطة الاسم أو الكود

All	Patient ID	Patient Name	11
1017021910019		الاء رياض الشافعى	
1017021910026		مازن أحمد معوش	
1017021910033		تحيه عبد الرضاى	
1017021910040		لوجينا عماد السعيد	
1017021910057		ايه رياض الشافعى	
1017021910064		منى ابراهيم	
1017021910071		مامون محمد داود	
1017021910088		ماجده وهبي	
1017022010015		اسلام محمد سليمان	
1017022010022		الاء رياض محمد احمد	
1017022010039		سماء محمد السيد عطيه	

Refresh 17-Feb-2017 من تاريخ 20-Feb-2017 الى

طباعة ورقة العمل الخاصة بالمريض المحدد فقط

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند اختيار مجموعة مرضى)

طباعة ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (كاملة) -

طباعة ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (مختصرة) -

جهة الإحالة

من كود رقم

الى كود رقم

Print

معانة ورقة العمل قبل الطباعة

القائمة الرئيسية

نافذة ورق العمل حسب اسماء المرضى:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لليوم الحالي او لفترة زمنية محددة أو لمجموعة محددة من المرضى بواسطة الاسم أو الكود

All Patient ID Patient Name 11

1017021910019 الاء رياض الشافعي
1017021910026 مازن أحمد معوض
1017021910033 نجيبة عبد الراضي
1017021910040 لوجينا عماد السعيد
1017021910057 ايه رياض الشافعي
1017021910064 ميني ابراهيم
1017021910071 مأمون محمد داود
1017021910088 ماجدة وهبي
1017022010015 اسلام محمد سليمان
1017022010022 الاء رياض محمد احمد
1017022010039 سماء محمد السيد عطيه

ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (كاملة) -

ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (مختصرة) -

جهة الإحالة

من كود رقم 1017021910019

الى كود رقم 1017021910088

Print

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند اختيار مجموعة مرضى)

طباعة ورقة العمل الخاصة بالمرضى المحدد فقط

Refresh 17-Feb-2017 من تاريخ 20-Feb-2017 الى

الفاصلة الرئيسية

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة ☒

<< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء المرضى في فترة محددة يمكنك حذف بعض المرضى وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمائهم في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالكود لا ينظر لهذه الأسماء

Work Paper

No. of Patients 5 Patient
Printed By admin

معامل ريال لاب سيستم للتحاليل الطبية

Work paper by Patient ID Monday, 20-Feb-2017 10:15 AM

Patient ID	Patient Name	Gender	Age	Date	Referred by	OK
1017021910019	الاء رياض الشافعي	Female	18 Years	19/02/2017	Herself	☐
1017021910026	مازن أحمد معوض	Male	3 Years	19/02/2017	Himself	☐
1017021910033	نجيبة عبد الراضي	Female	60 Years	19/02/2017	Herself	☐
1017021910040	لوجينا عماد السعيد	Female	3 Years	19/02/2017	Herself	☐
1017021910057	ايه رياض الشافعي	Female	11 Years	19/02/2017	Herself	☐

SGPT (ALT)
F.B.I.G.
R.B.I.G.
PP.B.I.G.
Creatinine (Serum)
SGOT (AST)
Alk. Ph.
CBC
PP.B.I.G.
R.B.I.G.
SGOT (AST)
CBC
SGOT (AST)

موظف الاستقبال مسئول العينات

نافذة ورق العمل حسب اسماء المرضى:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لليوم الحالي او لفترة زمنية محددة أو لمجموعة محددة من المرضى بواسطة الاسم أو الكود

ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (كاملة) -

ورقة عمل حسب أسماء مرضى الفترة المحددة (مختصرة) -

جهة الإحالة

من كود رقم 1017021910019

الى كود رقم 1017021910057

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند اختيار)

طباعة ورقة العمل الخاصة بالمرضى المحدد فقط

<< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء المرضى في فترة د المرضى وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمائهم في العمل بالكود لا ينظر لهذه الأسماء

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة ☒

2-2 ثانيا :- ورقة عمل بأسماء التحاليل :-

مثال على كيفية انشاء ورقة عمل لتحليل معين فى فترة زمنية محددة أو مجموعة من التحاليل التى يتم تحديدها وكيفية عمل تصنيف لتحاليل فترة محددة لمعرفة عدد مرات اجراء كل تحليل فى هذه الفترة

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- طباعة ورقة عمل لمجموعة من المرضى فى فترة محددة وذلك بأسمائهم أو أكوادهم
- طباعة ورقة عمل لتحليل معين فى فترة زمنية محددة أو مجموعة من التحاليل التى تم تحديدها
- وكذلك طباعة ورقة عمل لمجموعة عمل (Log) فى الفترة المحددة
- يمكنك اختيار طباعة التحاليل الغير منتهية فقط أو طباعة الكل

ورقة عمل بأسماء التحاليل (Log)

ورقة عمل بأسماء المرضى

SQL SERVER

User Name admin Last Login Wednesday, 15 Feb 2017 09:54 AM SQL DATABASE Today Sunday, 19-Feb-2017 09:49 AM

نافذة ورق العمل حسب اسماء التحاليل:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لتحليل محدد أو مجموعة من التحاليل في فترة زمنية محددة أو مجموعة تحاليل لعدد معين من المرضى

ورقة عمل بأسماء التحاليل

ورقة عمل حسب أسماء تحاليل الفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل حسب التحليل المحدد في الفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل براسم مجموعة (Log)

المجموعة

جهة الإحالة

من كود رقم

إلى كود رقم

Print

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند عمل لوح أو لوحة فقط)

Refresh

من تاريخ

إلى

19-Feb-2017

20-Feb-2017

النائمة الرئيسية

تصنيف تحاليل الفترة المحددة

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة

<< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء التحاليل في فترة محددة يمكنك حذف بعض التحاليل وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمها في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالمجموعة لا ينظر لهذه التحاليل

Work paper by test name

Zoom 100%

No. of type of tests 13 Test

Printed By admin

معامل ريال لاب سيستم للتحاليل الطبية

WORKPAPER BY TEST NAME Monday, 20-Feb-2017 10:19 AM

1 Test Code 1 Test Name F.BLG.

Patient Name Result ID

مارن أحمد مهوف

اسلام محمد سليمان

ماجدة وهبي

No. of Patient for this test 3

2 Test Code 2 Test Name PP.BLG.

Patient Name Result ID

الاء رياض الشافعي

مارن أحمد مهوف

لوجينا عماد السعيد

الاء رياض محمد احمد

ماجدة وهبي

اسلام محمد سليمان

No. of Patient for this test 6

3 Test Code 3 Test Name R.BLG.

Patient Name Result ID

مارن أحمد مهوف

لوجينا عماد السعيد

ماجدة وهبي

اسلام محمد سليمان

الاء رياض محمد احمد

سماء محمد السيد عطيه

No. of Patient for this test 6

Pages: 1

نافذة ورق العمل حسب اسماء التحاليل:

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لتحليل محدد أو مجموعة من التحاليل في فترة زمنية محددة أو مجموعة تحاليل لعدد معين من المرضى

ورقة عمل بأسماء التحاليل

ورقة عمل حسب أسماء تحاليل الفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل حسب التحليل المحدد في الفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل براسم مجموعة (Log)

المجموعة

جهة الإحالة

من كود رقم

إلى كود رقم

Print

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند عمل لوح أو لوحة فقط)

تصنيف

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة

<< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء التحاليل في فترة محددة يمكنك حذف بعض التحاليل وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمها في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالمجموعة لا ينظر لهذه التحاليل

نافذة ورق العمل حسب اسماء التحاليل:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لتحليل محدد أو مجموعة من التحاليل في فترة زمنية محددة أو مجموعة تحاليل لعدد معين من المرضى

All	Test ID	Test Name	13
1		F.Bi.G.	
2		PP.Bi.G.	
3		R.Bi.G.	
5		Stool	
6		Alk. Ph.	
7		Albumin	
8		SGPT (ALT)	
9		SGOT (AST)	
11		Creatinine (Serum)	
30		Cholesterol	
32		HDL	
43		PT	
56		CBC	

ورقة عمل بأسماء التحاليل

ورقة عمل حسب أسماء التحاليل للفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل حسب التحليل المحدد في الفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل براسم مجموعة (Log)

CHEMISTRY المجموعه

جهة الإحالة

Print 1017021910019 من كود رقم

1017021910026 الى كود رقم

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند عمل لوح او لجهة فقط)

Refresh 19-Feb-2017 من تاريخ

20-Feb-2017 الى

الفاتحة الرئيسية

تصنيف تحاليل الفترة المحددة

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة

< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء التحاليل في فترة محددة يمكنك حذف بعض التحاليل وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمها في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالمجموعة لا ينظر لهذه التحاليل

Work paper for selected test

Monday, 20 Feb 2017 10:21 AM

Printed By admin

معامل ريال لاب سيستم للتحاليل الطبية

Test Code 56 Test Name CBC

ID	Patient Name	Patient Result	Sig.
1017021910001	ايه رياض الشافعي		
1017021910002	لوجينا عماد السعيد		
1017021910003	ماجدة وهبي		
1017021910004	اسلام محمد سليمان		

No. of patient for this test 4

موظف الاستقبال

مستوى العيادات

نافذة ورق العمل حسب اسماء التحاليل:

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لتحليل محدد أو مجموعة من المرضى في فترة زمنية محددة أو مجموعة تحاليل لعدد معين من المرضى

ورقة عمل بأسماء التحاليل

ورقة عمل حسب أسماء التحاليل للفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل حسب التحليل المحدد في الفترة الزمنية المحددة

ورقة عمل براسم مجموعة (Log)

المجموعه

جهة الإحالة

17021910019 من كود رقم

17021910026 الى كود رقم

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند عمل لوح او لجهة فقط)

< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء التحاليل في فترة محددة يمكنك حذف بعض التحاليل وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمها في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالمجموعة لا ينظر لهذه التحاليل

تصنيف

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة

نافذة ورق العمل حسب اسماء التحاليل:
من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لتحليل محدد أو مجموعة من التحاليل في فترة زمنية محددة أو مجموعة تحاليل لعدد معين من المرضى

All	Test ID	Test Name	13
1		F.B.I.G.	
2		PP.B.I.G.	
3		R.B.I.G.	
4		Stool	
5		Alk. Ph.	
6		Albumin	
7		SGPT (ALT)	
8		SGOT (AST)	
9		Creatinine (Serum)	
10		Cholesterol	
11		HDL	
12		PT	
13		CBC	

ورقة عمل باسم مجموعة (Log)

CHEMISTRY

المجموعة

جهة الإحالة

Print

1017021910019

من كود رقم

1017021910026

إلى كود رقم

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند عمل لوج او لجهة فقط)

Refresh

19-Feb-2017

من تاريخ

20-Feb-2017

إلى

البانصة الرئيسية

تصنيف التحاليل الفترة المحددة

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة

<< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء التحاليل في فترة محددة يمكنك حذف بعض التحاليل وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمها في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالمجموعة لا ينظر لهذه التحاليل

statistics

Monday, 20-Feb-2017 10:22 AM

Printed By admin

معامل ريال لاب سيستم للتحاليل الطبية

Test Name	No. of Tests
Stool	1
CBC	4
F.B.I.G.	3
PP.B.I.G.	6
R.B.I.G.	6
SGPT (ALT)	3
SGOT (AST)	4
Albumin	1
Alk. Ph.	2
Creatinine (Serum)	2
Cholesterol	1
HDL	1
PT	1
	35

نافذة ورق العمل حسب اسماء التحاليل:

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل ورقة عمل لتحليل محدد أو مجموعة من التحاليل في فترة زمنية محددة أو مجموعة تحاليل لعدد معين من المرضى

ورقة عمل باسم مجموعة (Log)

المجموعة

جهة الإحالة

17021910019

من كود رقم

17021910026

إلى كود رقم

طباعة التحاليل الغير منتهية فقط (عند عمل لوج او لجهة فقط)

<< عند عمل ورقة عمل حسب اسماء التحاليل في فترة محددة يمكنك حذف بعض التحاليل وذلك عن طريق الضغط المزدوج على اسمها في القائمة أما في حالة ورقة العمل بالمجموعة لا ينظر لهذه التحاليل

تصنيف التحاليل الفترة المحددة

معاينة ورقة العمل قبل الطباعة

3 – بيانات التحاليل والتعاملات الخارجية

Real Lab System

المعروض فى هذا الجزء :-

- فى هذا الجزء سنقوم بعرض كيفية إدخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية وإختيار الوحدات والمجموعات والباركود الخاص بهم .
- إدخال التعليقات على نتائج التحاليل وإضافة المضادات الحيوية للمزارع .
- كيفية إنشاء مجموعة تحاليل خاصة بالمعمل وأسعارها .
- كيفية إدخال الجهات المتعامل معها (إحالة – مستقبل – تعاقدات) وتحديد الأسعار الخاصة بهم .
- إدخال بيانات أجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة .

داخل هذا الجزء :-

- 1 – تعديل بيانات وأسعار التحاليل
- 2 – تعديل القيم المرجعية للتحاليل
- 3 – إضافة تحليل جديد
- 4 – إضافة مزرعة جديدة
- 5 – إضافة مضاد حيوى للمزرعة
- 6 – إضافة طبيب معالج – جهة تعاقد
- 7 – إضافة كومننت ثابت لتحليل معين
- 8 – العينات المرسلة للخارج

1-3 تعديل بيانات او سعر تحليل:-

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم نقوم بالضغط على (بيانات التحاليل)
فيقوم البرنامج بعرض كافة التحاليل المسجلة في قاعدة بيانات البرنامج

نختار التحليل المراد تعديله او نقوم بالبحث عنه من خلال المكان المخصص للبحث والموجود أعلى التحاليل

يتم البحث بإسم التحليل او بالمجموعة التي تحتوى التحليل أو برقم التحليل كما هو موضح بالصورة فى الأعلى

بعد الضغط على التحليل المراد تعديله نضغط على زر (تعديل) الموجود أسفل نافذة التحاليل

بعد الضغط على زر (تعديل) نلاحظ امكانية التعديل فى بيانات التحليل

(إسم التحليل واسم التقرير الخاص بالتحليل - إسم الإيصال - المجموعة التي ينتمى لها التحليل - الباركود الخاص بالتحليل - الفترة اللازمة لإنهاء التحليل وبناءاً عليها يقوم البرنامج بحساب زمن الإستلام للمريض - هل التحليل من العينات المرسلة لمعمل آخر أم لا مع تحديد سعره - **سعر التحليل للمريض - سعر التحليل Lab to lab**)

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 489 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode	Routine
1	5	Blood Glucose	F.Bi.G.	6	3.5		0	Serum Fasting	True
2	5	Blood Glucose	PP.Bi.G.	6	3.5		0	Serum Postprandial	True
3	5	Blood Glucose	R.Bi.G.	6	3.5		0	Serum	True
8	6	LIVER FUNCTIONS	SGPT (ALT)	10	5.5		5	Serum Fasting	True
9	7	LIVER FUNCTIONS	SGOT (AST)	10	5.5		5	Serum Fasting	True
6	8	LIVER FUNCTIONS	Alk. Ph.	15	7	أوتولاب	10	Serum Fasting	True
7	8	LIVER FUNCTIONS	Albumin	10	5.5		0	Serum Fasting	True
15	9	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Total	10	7		6	Serum	True
16	10	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Direct	10	7		6	Serum	True
11	12	KIDNEY FUNCTIONS	Creatinine (Serum)	10	5.5		0	Serum Fasting	True
10	13	KIDNEY FUNCTIONS	Uric Acid	10	5.5		0	Serum Fasting	True
30	15	LIPIDS PROFILE	Cholesterol	15	6		0	Serum Fasting	True
31	15	LIPIDS PROFILE	Triglyceride	20	6		0	Serum Fasting	True
32	16	LIPIDS PROFILE	HDL	15	6		0	Serum Fasting	True
50	16	BLOOD PICTURE	Hgb	8	6		0	EDTA Blood	True
42	17	Erythrocyte Sedimentation Rate	ESR	6	0		0	Citrated Blood 0.4	True

Test Information

Test Name: PP.Bi.G. Test Code:

Report Name: PP.Bi.G. (Postprandial Blood Glucose)

Bill Name: Blood Glucose PP.Bi.G.

History Name: PPBG

Arabic Name: سكر قنطرة

Group Name: Blood Glucose

Branch: CHEMISTRY

Log Group: CHEMISTRY

Collection: 1.0 ml. Serum

☒ Routine test ☐ See Report ☒ Print with other ☒ Add with group ☒ Main test

Barcode: Name: PPBG Tube 2: Tube 1: Serum Postprandial Tube 3:

☐ Sent outside Lab. Lab. Name: Cost price: 0

☐ Patient Question:

Test time (Day): 1 Arrange No.: 5 Reference type: For all Patient price: 6 Lab to lab price: 3.5

القائمة الرئيسية القيم المرجعية حذف تراجع حفظ تعديل إضافة تحليل

بعد التعديل والإنتهاء نقوم بالضغط على (حفظ)

فى حالة عدم الرغبة فى التعديل نضغط على (تراجع) .

2-3 إضافة تحليل جديد :-

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم نقوم بالضغط على (بيانات التحاليل)
فيقوم البرنامج بعرض كافة التحاليل المسجلة في قاعدة بيانات البرنامج

لإضافة تحليل جديد نقوم بالضغط على زر (إضافة تحليل) ثم نقوم بكتابة إسم التحليل وبقيته بياناته
ثم نضغط (حفظ) .



The screenshot displays the Real Lab software interface. At the top, there is a menu bar with icons for Exit, About Us, Send Result, Setting, System (highlighted with a red circle), Users, Statistics, Accounts, Tools, Work sheet, Laboratory, and Patients. Below the menu bar, there is a central panel with a wooden cabinet icon and Arabic text explaining the system's capabilities: "من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:" followed by a list of functions including adding, editing, and deleting analyses, and managing test results. Below this panel, there is a grid of buttons for various system functions. The button "بيانات التحاليل" (Analysis Data) is highlighted with a red circle. The bottom status bar shows the user name "admin", the last login date "Wednesday, 03 Dec 2014 09:28 PM", the database name "SQL DATABASE", and the current date and time "Today Tuesday, 07-Mar-2017 09:31 AM".

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- ادخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
- ادخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل واسعارها
- ادخال الجهات المتعامل معها (احالة - مستقبل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم
- ادخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

Buttons in the interface include:

- الجهات الخارجية والمعامل
- Culture Antibiotics
- Barcode Types
- بيانات التحاليل
- قوائم أسعار التعاقدات
- Test Comments
- Test Units
- مجموعات التحاليل
- Result screen account
- Custom Groups
- القباب وتعريفات المرضى
- Lab. branches
- اسماء وتليفونات المرضى
- أجهزة ومعدات المختبر
- طباعة قائمة اسعار التحاليل
- مجموعات العمل (Log)

SQL SERVER

User Name admin Last Login Wednesday, 03 Dec 2014 09:28 PM SQL DATABASE Today Tuesday, 07-Mar-2017 09:31 AM

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 488 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
4	1	URINE EXAMINATION	Urine	4	2		0	Urine
5	2	STOOL EXAMINATION	Stool	4	2		0	Stool
56	3	BLOOD PICTURE	CBC	20	12.5		0	EDTA Blood
1	5	Blood Glucose	F.Bl.G.	6	3.5		0	Serum Fasting
2	5	Blood Glucose	PP.Bl.G.	6	3.5		0	Serum Postprandial
3	5	Blood Glucose	R.Bl.G.	6	3.5		0	Serum
8	6	LIVER FUNCTIONS	SGPT (ALT)	10	5.5		5	Serum Fasting
9	7	LIVER FUNCTIONS	SGOT (AST)	10	5.5		5	Serum Fasting
6	8	LIVER FUNCTIONS	Alk. Ph.	15	7		10	Serum Fasting
7	8	LIVER FUNCTIONS	Albumin	10	5.5		0	Serum Fasting
15	9	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Total	10	7		6	Serum
16	10	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Direct	10	7		6	Serum
11	12	KIDNEY FUNCTIONS	Creatinine (Serum)	10	5.5		0	Serum Fasting
10	13	KIDNEY FUNCTIONS	Uric Acid	10	5.5		0	Serum Fasting
30	15	LIPIDS PROFILE	Cholesterol	15	6		0	Serum Fasting
31	15	LIPIDS PROFILE	Triglyceride	20	6		0	Serum Fasting

Test Information

Test Name Test Code

Report Name

Bill Name

History Name

Arabic Name

Group Name

Branch

Log Group

Collection

☐ See Report

☐ Print with other

☐ Add with group

☐ Main test

Barcode

Name Tube 2

Tube 1 Tube 3

☐ Sent outside Lab.

Lab. Name Cost price

☐ Patient Question

Test time (Day) Arrange No. Reference type

Patient price Lab to lab price

القائمة الرئيسية القيم المرجعية حذف تراجعي حفظ إضافة تحليل تعديل

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 488 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
4	1	URINE EXAMINATION	Urine	4	2		0	Urine
5	2	STOOL EXAMINATION	Stool	4	2		0	Stool
56	3	BLOOD PICTURE	CBC	20	12.5		0	EDTA Blood
1	5	Blood Glucose	F.Bl.G.	6	3.5		0	Serum Fasting
2	5	Blood Glucose	PP.Bl.G.	6	3.5		0	Serum Postprandial
3	5	Blood Glucose	R.Bl.G.	6	3.5		0	Serum
8	6	LIVER FUNCTIONS	SGPT (ALT)	10	5.5		5	Serum Fasting
9	7	LIVER FUNCTIONS	SGOT (AST)	10	5.5		5	Serum Fasting
6	8	LIVER FUNCTIONS	Alk. Ph.	15	7		10	Serum Fasting
7	8	LIVER FUNCTIONS	Albumin	10	5.5		0	Serum Fasting
15	9	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Total	10	7		6	Serum
16	10	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Direct	10	7		6	Serum
11	12	KIDNEY FUNCTIONS	Creatinine (Serum)	10	5.5		0	Serum Fasting
10	13	KIDNEY FUNCTIONS	Uric Acid	10	5.5		0	Serum Fasting
30	15	LIPIDS PROFILE	Cholesterol	15	6		0	Serum Fasting
31	15	LIPIDS PROFILE	Triglyceride	20	6		0	Serum Fasting

Test Information

Test Name Test Code

Report Name

Bill Name

History Name

Arabic Name

Group Name

Branch

Log Group

Collection

☐ See Report

☐ Print with other

☒ Add with group

☒ Main test

Barcode

Name Tube 2

Tube 1 Tube 3

☐ Sent outside Lab.

Lab. Name Cost price

☐ Patient Question

Test time (Day) Arrange No. Reference type

Patient price Lab to lab price

القائمة الرئيسية القيم المرجعية حذف تراجعي حفظ إضافة تحليل تعديل

لإضافة القيم المرجعية للتحليل نقوم بالبحث عن التحليل ثم نقوم بالضغط على زر (القيم المرجعية)

ثم نقوم بإضافة القيم المرجعية الخاصة بالتحليل وسيتم عرض كيفية اضافتها فيما يلي .

Search by test name

By group name

By test ID

Number Of Tests = 1 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
609	9999	KIDNEY FUNCTIONS	New	20	10		0	Serum

Test Information

Test Name

New

Test Code

Report Name

New

Bill Name

New

History Name

Arabic Name

Group Name

KIDNEY FUNCTIONS

Branch

Clinical Chemistry

Log Group

Manual Chemistry

Collection

☐ See Report

☐ Print with other

☒ Add with group

☒ Main test

Barcode

Name

NEW

Tube 2

Tube 1

Serum

Tube 3

☐ Sent outside Lab.

Lab. Name

Cost price

0

☐ Patient Question

Test time (Day)

0

Arrange No.

9999

Reference type

By sex and age

Patient price

20

Lab to lab price

10

القائمة الرئيسية

القيم المرجعية

حذف

تراجع

إضافة

تعديل

إضافة تحليل

3-3 إضافة / تعديل القيم المرجعية الخاصة بالتحاليل (النورمالات) :-

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم نقوم بالضغط على زر (بيانات التحاليل)
فيقوم البرنامج بعرض كافة التحاليل المسجلة في قاعدة بيانات البرنامج

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 34 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
56	3	BLOOD PICTURE	CBC	20	12.5		0	EDTA Blood
50	16	BLOOD PICTURE	Hgb	8	6		0	EDTA Blood
51	9999	BLOOD PICTURE	RBC	5	0		0	EDTA Blood
52	9999	BLOOD PICTURE	Hct	10	0		0	EDTA Blood
53	9999	BLOOD PICTURE	WBC	8	0		0	EDTA Blood
54	9999	BLOOD PICTURE	WBCs And Diff.	15	0		0	EDTA Blood
55	9999	BLOOD PICTURE	Plt	10	0		0	EDTA Blood
49	9999	BLOOD PICTURE	Hgb And Indices	15	0		0	EDTA Blood
418	9999	BLOOD PICTURE	RETICS (Reticulocyte Count)	15	9	أوتولاب	8	EDTA Blood
482	9999	BLOOD PICTURE	CBC Neutrophil#	0	0		0	
483	9999	BLOOD PICTURE	CBC Lymphocytes#	0	0		0	
484	9999	BLOOD PICTURE	CBC Monocytes#	0	0		0	
485	9999	BLOOD PICTURE	CBC Eosinophils#	0	0		0	
486	9999	BLOOD PICTURE	CBC Basophils#	0	0		0	
487	9999	BLOOD PICTURE	CBC othercells#	0	0		0	
550	9999	BLOOD PICTURE	CBC Hgb%	0	0		0	

Test Information

Test Name: Test Code:

Report Name: (Hemoglobin)

Bill Name: Hgb

History Name:

Arabic Name:

Group Name:

Branch:

Log Group:

Collection:

☐ See Report

☒ Print with other

☐ Add with group

☒ Main test

Barcode: Name: Hgb

Tube 1: EDTA Blood

Tube 2:

Tube 3:

☐ Sent outside Lab.

Lab. Name: Cost price:

Patient Question

Test time (Day): Arrange No.: Reference type: By sex and age:

Patient price: Lab to lab price:

إضافة تحليل تعديل حذف أرشفة القائمة الرئيسية القيم المرجعية

Exit About Us Send Result Setting **System** Users Statistics Accounts Tools Work sheet Laboratory Patients

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

- إدخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
- إدخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل وأسعارها
- إدخال الجهات المتعامل معها (إحالة - مستقبل - نقابات) وتحديد الأسعار الخاصة بهم
- إدخال بيانات أجهزة ومعدات المعمل وصيانة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ الصيانة

الجهات الخارجية والمعدات Culture Antibiotics Barcode Types **بيانات التحاليل** مجموعات التحاليل

قوائم أسعار النقابات Test Comments Test Units

Lab. accounts Custom Groups لقاب وتفرغات المرضى Lab. branches

اسماء وتيلفونات المرضى أجهزة ومعدات المختبر طباعة قائمة أسعار التحاليل مجموعات العمل (Log)

User Name: admin Last Login: Saturday, 09 Jul 2016 09:31 AM SQL DATABASE Today Saturday, 09-Jul-2016 01:06 PM

نختار التحليل المراد تعديل القيم المرجعية له/ أو المراد إضافة قيم مرجعية جديدة له أو نقوم بالبحث عنه من خلال المكان المخصص للبحث والموجود أعلى قائمة التحاليل
يتم البحث بإسم التحليل أو بالمجموعة التي تحتوى التحليل أو برقم التحليل
بعد الضغط على التحليل المراد تعديله نضغط على زر (القيم المرجعية) الموجود أسفل نافذة التحاليل

Search by test name
By group name blood picture
By test ID
Number Of Tests = 34 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
56	3	BLOOD PICTURE	CBC	20	12.5		0	EDTA Blood
50	16	BLOOD PICTURE	Hgb	8	6		0	EDTA Blood
51	9999	BLOOD PICTURE	RBC	5	0		0	EDTA Blood
52	9999	BLOOD PICTURE	Hct	10	0		0	EDTA Blood
53	9999	BLOOD PICTURE	WBC	8	0		0	EDTA Blood
54	9999	BLOOD PICTURE	WBCs And Diff.	15	0		0	EDTA Blood
55	9999	BLOOD PICTURE	Plt	10	0		0	EDTA Blood
49	9999	BLOOD PICTURE	Hgb And Indices	15	0		0	EDTA Blood
418	9999	BLOOD PICTURE	RETICS (Reticulocyte Count)	15	9	أوتولاب	8	EDTA Blood
482	9999	BLOOD PICTURE	CBC Neutrophil#	0	0		0	
483	9999	BLOOD PICTURE	CBC Lymphocytes#	0	0		0	
484	9999	BLOOD PICTURE	CBC Monocytes#	0	0		0	
485	9999	BLOOD PICTURE	CBC Eosinophils#	0	0		0	
486	9999	BLOOD PICTURE	CBC Basophils#	0	0		0	
487	9999	BLOOD PICTURE	CBC othercells#	0	0		0	
550	9999	BLOOD PICTURE	CBC Hgb%	0	0		0	

Test Information

Test Name Hgb Test Code
Report Name Hgb (Hemoglobin)
Bill Name BLOOD PICTURE Hgb
History Name Hgb
Arabic Name
Group Name BLOOD PICTURE
Branch Hgb
Log Group
Collection

☐ See Report
☒ Print with other
☐ Add with group
☒ Main test

Barcode
Name Hgb Tube 2
Tube 1 EDTA Blood Tube 3

☐ Sent outside Lab.
Lab. Name Cost price 0

☐ Patient Question

Test time (Day) 1 Arrange No. 16 Reference type By sex and age Patient price 8 Lab to lab price 6

القائمة الرئيسية القيم المرجعية حذف تراجعي جاري تعديل إضافة تحليل

- لإضافة مدى أو نورمال جديد نضغط على (إضافة مدى)

نحدد جنس المريض ومدى السن
نقوم بإدخال القيمة الصغرى والقيمة العظمى فى الأماكن المخصصة لذلك

فى حالة الرغبة فى ظهور كومت عندما تكون نتيجة التحليل أقل من القيمة الصغرى يتم كتابته فى

خانة **low comment**

ليظهر تلقائيا فى التقرير الخاص بالمريض **عند الضغط فى خانة الكومت مرتين بالماوس**

فى حالة الرغبة فى ظهور كومت عندما تكون نتيجة التحليل أكبر من القيمة العظمى يتم كتابته فى

خانة **High comment**

ليظهر تلقائيا فى التقرير الخاص بالمريض **عند الضغط فى خانة الكومت مرتين بالماوس**

نقوم بالضغط على زر (**حفظ**)

- **لتعديل مدى أو نورمال** نقوم باختياره عن طريق الضغط عليه ثم نقوم بالضغط على زر

(**تعديل**) ويتم تعديل القيم ثم نضغط (**حفظ**) .

- **لحذف مدى أو نورمال** نقوم باختياره عن طريق الضغط عليه ثم نقوم بالضغط على زر

(**حذف**) .

Test Name **Hgb** Number Of References = 24 Reference

Gender	From	To	Age unit	Reference range	low limit	high limit	Test unit	Low flag	High flag
Female	1	14	Days	13.5 - 20.5 g/dL	13.5	20.5		L	H
Male	1	14	Days	13.5 - 20.5 g/dL	13.5	20.5		L	H
Female	14	30	Days	13.4 - 19.8 g/dL	13.4	19.8		L	H
Male	14	30	Days	13.4 - 19.8 g/dL	13.4	19.8		L	H
Female	0	2	Mons.	10.7 - 17.1 g/dL	10.7	17.1		L	H
Male	0	2	Mons.	10.7 - 17.1 g/dL	10.7	17.1		L	H
Female	2	4	Mons.	9.4 - 13.0 g/dL	9.4	13		L	H
Male	2	4	Mons.	9.4 - 13.0 g/dL	9.4	13		L	H
Male	4	6	Mons.	10.3 - 14.1 g/dL	10.3	14.1		L	H
Male	4	6	Mons.	10.3 - 14.1 g/dL	10.3	14.1		L	H
Female	6	12	Mons.	11.2 - 14.1 g/dL	11.2	14.1		L	H
Male	6	12	Mons.	11.2 - 14.1 g/dL	11.2	14.1		L	H
Female	0	9	Years	11.2 - 14.1 g/dL	11.2	14.1		L	H

Reference Setting

Range for: ☒ For all ☐ By sex and age ☐ By sex only ☐ By age only

Reference range:

Low limit: High limit:

Low flag: High flag:

Test unit: ☐ For pregnant only

Low comment:

High comment:

قائمة التحاليل حذف تراجيع حذف تعديل إضافة مدى

- في حالة تعديل نورمال لتحليل معين ووجود مرضى تم تسجيلهم على القيم السابقة

البرنامج يتعامل معهم على اساس القيم السابقة

في حالة الرغبة في التعامل معهم على القيم المرجعية الجديدة :-

نقوم بالدخول إلى التقرير والضغط على خانة القيم المرجعية داخل التقرير تظهر لنا النافذة الموضحة
نقوم بالضغط على زر (تحديث) ثم نضغط (موافق) كما هو موضح

Male	النوع	محمد احمد على	الاسم	1016072110027	الكود	
Years 22	العمر	Himself	وجه الإحالة	1	كود المعمل	

Coagulation Profile

Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges	Verified	Print	
Bleeding		min sec			☐	☐	
clotting		min sec			☐	☐	
PT				Control's time 12 sec ISI 1.5			
Patient's time		sec		Male 11 - 13 sec	☒	☒	
Concentration		%		Male 70 - 100 %	☒	☒	
I.N.R.				Male 1.0 - 1.3	☒	☒	
Ratio					☒	☒	
APTT				Control's time 35 sec			
Patient's time					☐	☐	
Fibrinogen					☐	☐	
FDP					☐	☐	
Comment						☒	☒

CONSTANTS

الفاصلة الرئيسية رجوع Patient History معاينة الطباعة طباعة حفظ

Male	النوع	محمد احمد على	الاسم	1
Years 22	العمر	Himself	وجه الإحالة	1

Coagulation Profile

Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges
Bleeding		min sec		
clotting		min sec		
PT				Control's time 12 sec
Patient's time		sec		Male 11 - 13 sec
Concentration		%		Male 70 - 100 %
I.N.R.				Male 1.0 - 1.3
Ratio				
APTT				Control's time 35 sec
Patient's time				
Fibrinogen				
FDP				
Comment				

CONSTANTS

الفاصلة الرئيسية رجوع Patient History معاينة الطباعة طباعة حفظ

Test Name PT

Report Name PT (Prothrombin Time)

History Name PT

Normal range Male 11 - 13 sec

Test unit sec

Low limit 11 Low flag Low

High limit 13 High flag High

تراجع موافق تحديث

ملاحظة هامة في الجزء الخاص بالنورمالات :-

في حالة القيم المرجعية

(By Sex and Age – By Age Only)

يجب إدخال نورمالات كل وحدة عمر على حدة وسيتم التوضيح كالآتي :-

عند إضافة نورمال جديد لعمر من (1 – 60) **يوم** وتسجيل مريض جديد عمره 15 **يوم** أو 35 **يوم** سيقوم البرنامج بالتعرف على النورمال وظهره في التقرير

أما في حالة إضافة مريض عمره (1) **شهر** لن يتعرف البرنامج على النورمال بالرغم من أن عمر شهر هو نفسه 30 يوم ولكن يجب إضافه نورمال جديد لكل وحدة عمر جديدة (**يوم** – **شهر** – **سنة**) .

for lab service

4-3 إضافة/تسجيل قائمة أسعار جديدة فى البرنامج :-

نقوم بالضغط على أيقونة **System**

ثم نختار (قوائم أسعار التعاقدات)

لإضافة قائمة أسعار جديدة

نضغط على (إضافة) ونقوم بإدخال اسم قائمة الأسعار الجديدة فى النافذة كما بالشكل ثم نضغط (Ok)

نلاحظ ظهور قائمة الأسعار الجديدة التى قمنا بتسجيلها فى قوائم أسعار البرنامج
لإضافة تحاليل لهذه القائمة يتم إختيارها ثم الضغط على (إضافة) كما هو موضح فى الصورة
ونختار التحليل المراد إضافته لهذه القائمة وندخل سعر التحليل ثم نضغط (موافق)
نلاحظ ظهور التحليل فى قائمة الأسعار

لتعديل سعر التحليل نضغط على التحليل ثم نضغط (تعديل) ونقوم بإدخال السعر الجديد
ثم نضغط (حفظ) .
لحذف تحليل من قائمة الأسعار نضغط على التحليل ثم نضغط (حذف) .

لتعديل قائمة أسعار موجودة

نختار قائمة الأسعار المراد تعديلها
لتعديل الاسم نضغط (تعديل) أسفل قائمة الأسعار ثم نقوم بتعديل الاسم ثم
نضغط (حفظ)

لتعديل اسعار التحاليل فى القائمة نختار التحليل من يسار النافذة
ثم نضغط (تعديل) ونقوم بتغيير سعر التحليل ثم نضغط (حفظ) .
- لحذف تحليل من قائمة الأسعار نحدد التحليل ثم نضغط (حذف) .

لطباعة قائمة أسعار تحاليل

نختار قائمة الأسعار المراد طباعتها ثم نقوم بالضغط على زر (طباعة القائمة) .

لحذف قائمة أسعار تحاليل

نختار قائمة الأسعار المراد حذفها ثم نضغط (حذف) ثم (موافق) .

Exit

About Us

Send Result

Setting

System

Users

Statistics

Accounts

Tools

Work sheet

Laboratory

Patients



من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

ادخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم

ادخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل واسعارها

ادخال الجهات المتعامل معها (احالة - مستقبل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم

ادخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

الجهات الخارجية والمعامل

قوائم أسعار التعاقدات

Result screen account

اسماء وتلفونات المرضى

Culture Antibiotics

Test Comments

Custom Groups

أجهزة ومعدات المختبر

Barcode Types

Test Units

القباب وتعريفات المرضى

طباعة قائمة اسعار التحاليل

بيانات التحاليل

مجموعات التحاليل

Lab. branches

مجموعات العمل (Log)



SQL SERVER

User Name | admin

Last Login | Wednesday, 10 Aug 2016 10:25 AM

SQL DATABASE

Today | Thursday, 11-Aug-2016 09:49 AM

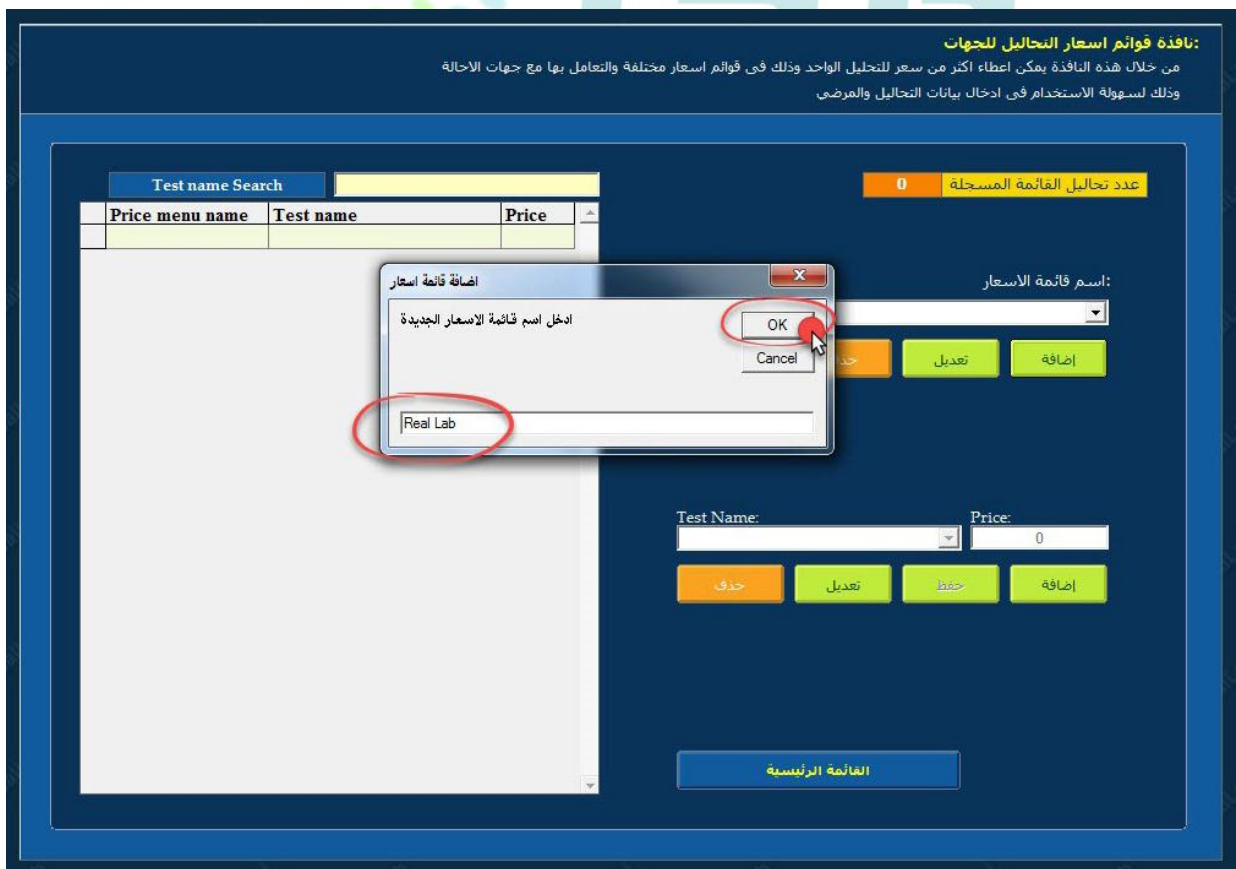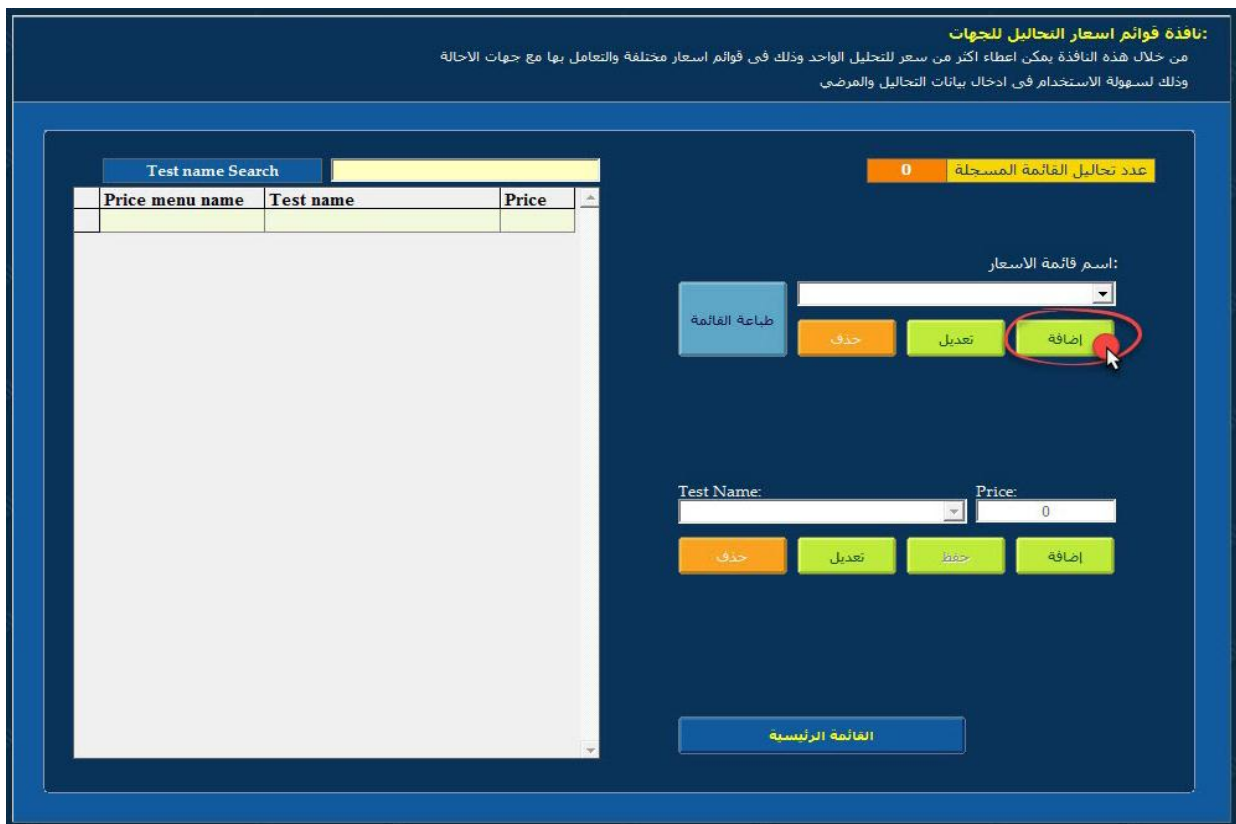

من خلال هذه النافذة يمكن اعطاء أكثر من سعر للتحليل الواحد وذلك فى قوائم اسعار مختلفة والتعامل بها مع جهات الاحالة وذلك لسهولة الاستخدام فى ادخال بيانات التحاليل والمرضى

القائمة الرئيسية

من خلال هذه النافذة يمكن اعطاء أكثر من سعر للتحليل الواحد وذلك في قوائم اسعار مختلفة والتعامل بها مع جهات الاحالة وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

القائمة الرئيسية

من خلال هذه النافذة يمكن اعطاء أكثر من سعر للتحليل الواحد وذلك في قوائم اسعار مختلفة والتعامل بها مع جهات الاحالة وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

[illegible]

نافذة قوائم أسعار التحاليل للجهات:

من خلال هذه النافذة يمكن إعطاء أكثر من سعر للتحليل الواحد وذلك في قوائم أسعار مختلفة والتعامل بها مع جهات الاحالة وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

Test name Search

عدد تحاليل القائمة المسجلة 1

Price menu name	Test name	Price
Real Lab	CBC	50

اسم قائمة الاسعار:
Real Lab

طباعة القائمة

حذف

تعديل

إضافة

Test Name: CBC Price: 50

حذف

تعديل

حفظ

إضافة

القائمة الرئيسية

for lab service

طباعة قائمة أسعار التحاليل

نافذة قوائم أسعار التحاليل للجهات:
من خلال هذه النافذة يمكن إعطاء أكثر من سعر للتحليل الواحد وذلك في قوائم أسعار مختلفة والتعامل بها مع جهات الاحالة وذلك لتسهيل الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

عدد تحاليل القائمة المسجلة: 3

اسم قائمة الأسعار: Real Lab

طباعة القائمة

حذف تعديل إضافة

Test Name: Price:

حذف تعديل حفظ إضافة

القائمة الرئيسية

Price menu name	Test name	Price
Real Lab	CBC	50
Real Lab	Stool	10
Real Lab	Urine	10

قائمة أسعار التحاليل

Zoom 100%

Printed In Tuesday, 15-Nov-2016
Current Page 1 from 1

أسعار التحاليل في قائمة الأسعار Real Lab

BLOOD PICTURE	Price	Result date	Collection notes
CBC	50 L.E.	1 Days	

STOOL EXAMINATION	Price	Result date	Collection notes
Stool	10 L.E.	1 Days	Stool

URINE EXAMINATION	Price	Result date	Collection notes
Urine	10 L.E.	1 Days	Urine

5-3 إضافة / تسجيل كومننت ثابت في تحليل معين :-

عند وجود كومننت مكرر في تحليل معين أو عند الرغبة في تسجيل كومننت في تحليل معين ل يتم إختياره مباشرة دون الحاجة لكتابته في كل مرة نقوم بتسجيل الكومننت كما هو موضح في الخطوات التالية .

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم نقوم بالضغط على زر **Test Comments** فتظهر النافذة الموضحة .

The screenshot displays the Real Lab software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Exit, About Us, Send Result, Setting, System (highlighted with a red circle), Users, Statistics, Accounts, Tools, Work sheet, Laboratory, and Patients. Below this, a central panel contains a folder icon and Arabic text explaining the system's functions: adding and editing test results, adding comments on test results, adding test units, and adding test results. Below this panel, there is a grid of buttons for various functions: الجهات الخارجية والمعامل (External devices and laboratories), Culture Antibiotics, Barcode Types, بيانات التحاليل (Test results data), قوائم أسعار التعاقدات (Contract pricing lists), Test Comments (highlighted with a red circle), Test Units, مجموعات التحاليل (Test result groups), Result screen account, Custom Groups, القاب وتعريفات المرضى (Patient names and definitions), Lab. branches, أسماء وتليفونات المرضى (Patient names and phone numbers), أجهزة ومعدات المختبر (Laboratory equipment), طباعة قائمة اسعار التحاليل (Print test result price list), and مجموعات العمل (Log). At the bottom, a status bar shows the user name 'admin', last login 'Tuesday, 18 Oct 2016 06:11 PM', SQL DATABASE, and the current date and time 'Wednesday, 19-Oct-2016 09:56 AM'.

نقوم بالضغط على زر (إضافة) ثم نقوم باختيار التحليل وكتابة الكومنت في الخانة المخصصة

ثم نضغط (حفظ) .

نافذة التعليقات على نتائج التحاليل:
من خلال هذه النافذة يمكن ادخال التعليقات على النتائج لكل تحليل او بروفيل وذلك لعرضها في نافذة ادخال نتيجة التحليل عند الضغط على زر comment

Search

ID	Test Name	Comment
80	Bilharzias Antibodies	640 should only be assessed together with the positive result of second diagnostic method .
453	HCV - RNA (Quantitative) by PCR	Below detection limit
43	PT	e toMechanical heart valves, the therapeutic ranges recommended by experts: INR 2.5 - 3.5
300	Semen	aterial after centrifugation of this sampleThree Successive Semen Samples Are Recommended
8	SGPT (ALT)	Followup is recommended.
170	TUBERCULIN TEST	conversion into positive reactor indicaterecent exposure and clinical follow up should be done.

Test name

Comment

القائمة الرئيسية حذف تعديل حفظ إضافة

نافذة التعليقات على نتائج التحاليل:
من خلال هذه النافذة يمكن ادخال التعليقات على النتائج لكل تحليل او بروفيل وذلك لعرضها في نافذة ادخال نتيجة التحليل عند الضغط على زر comment

Search

ID	Test Name	Comment
80	Bilharzias Antibodies	640 should only be assessed together with the positive result of second diagnostic method .
453	HCV - RNA (Quantitative) by PCR	Below detection limit
43	PT	e toMechanical heart valves, the therapeutic ranges recommended by experts: INR 2.5 - 3.5
300	Semen	aterial after centrifugation of this sampleThree Successive Semen Samples Are Recommended
8	SGPT (ALT)	Followup is recommended.
170	TUBERCULIN TEST	conversion into positive reactor indicaterecent exposure and clinical follow up should be done.

نختار التحليل المراد إضافة كومت ثابت فيه

Test name Comment

نكتب الكومت المراد تسجيله

حفظ

نافذة التعليقات على نتائج التحاليل:
من خلال هذه النافذة يمكن ادخال التعليقات على النتائج لكل تحليل او بروفيل وذلك لعرضها في نافذة ادخال نتيجة التحليل عند الضغط على زر comment

Search

ID	Test Name	Comment
80	Bilharzias Antibodies	640 should only be assessed together with the positive result of second diagnostic method .
453	HCV - RNA (Quantitative) by PCR	Below detection limit
43	PT	e toMechanical heart valves, the therapeutic ranges recommended by experts: INR 2.5 - 3.5
300	Semen	aterial after centrifugation of this sampleThree Successive Semen Samples Are Recommended
8	SGPT (ALT)	Followup is recommended.
170	TUBERCULIN TEST	conversion into positive reactor indicaterecent exposure and clinical follow up should be done.

Test name ID Comment

Real Lab System

حفظ

نلاحظ ظهور الكومنت بالأعلى بعد الحفظ ، ويمكن إضافة أكثر من كومنت لنفس التحليل .



نافذة التعليقات على نتائج التحاليل:

من خلال هذه النافذة يمكن ادخال التعليقات على النتائج لكل تحليل او بروفيل وذلك لعرضها في نافذة ادخال نتيجة التحليل عند الضغط على زر comment

ID	Test Name	Comment
80	Bilharzias Antibodies	640 should only be assessed together with the positive result of second diagnostic method .
453	HCV - RNA (Quantitative) by PCR	Below detection limit
12	PT	e toMechanical heart valves, the therapeutic ranges recommended by experts: INR 2.5 - 3.5
12	PT	Real Lab System
300	Semen	aterial after centrifugation of this sampleThree Successive Semen Samples Are recommended
8	SGPT (ALT)	Followup is recommended.
170	TUBERCULIN TEST	conversion into positive reactor indicaterecent exposure and clinical follow up should be done.

Test name

Comment

القائمة الرئيسية

حذف

تعديل

حفظ

إضافة

لإضافة الكومنت في التقرير نقوم بالضغط على أيقونة **Comment** الموجودة أسفل التقرير كما هو موضح فتظهر قائمة منسدلة بها الكومنتات المسجلة في هذا التحليل .
نضغط على الكومنت فيتم إضافته لتقرير النتيجة الخاص بالمريض .

Male

النوع

1016110710011

الكود

الاسم

السيد /

تجربة

Years

23

العمر

Himself

جهة الإحالة

1

كود المعمل

Coagulation Profile

Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges	Verified	Print
Bleeding	min	sec			☐	☐
clotting	min	sec			☐	☐
PT			☒	Control's time 11.7 sec ISI 1.5		
☒ Patient's time	13	sec		Male 11 - 13.5 sec	☒	☒
☒ Concentration	82.12	%		Male 75 - 100 %		
☒ I.N.R.	1.17			Male 1.0 - 1.2		
☒ Ratio	1.11					
APTT			☒	Control's time 33 sec		
Patient's time					☐	☐
Fibrinogen					☐	☐
FDP					☐	☐
Comment					☒	☒

القائمة الرئيسية

رجوع

Patient History

معاينة الطباعة

طباعة

حفظ

CONSTANTS

Male	الدوع	تجربة	السيد /	الاسم	1016110710011	الكود	
Years	23	العمر	Himself	جهة الإحالة	1	كود المعمل	

Coagulation Profile

Test Name	Result	Unit	L or H	Normal Ranges	Verified	Print
Bleeding	min	sec			☐	☐
clotting	min	sec			☐	☐
PT ☒ Control's time 11.7 sec ISI 1.5						
☒ Patient's time	13	sec		Male 11 - 13.5 sec	☒	☒
☒ Concentration	82.12	%		Male 75 - 100 %		
☒ I.N.R.	1.17			Male 1.0 - 1.2		
☒ Ratio	1.11					
APTT ☒ Control's time 33 sec						
☐ Patient's time					☐	☐
Fibrinogen					☐	☐
FDP					☐	☐
Comment In patient undergoing oral anticoagulant therapy (Coumarin / Warfarin / Coumadin) due to Mechanical heart valves, the there Real Lab System ☒ ☒						

القائمة الرئيسية

رجوع

Patient History

معاينة الطباعة

طباعة

حفظ

CONSTANTS

6-3 إضافة مجموعة تحاليل Custom Group تحوي عدد من التحاليل

بأسعارها يمكن اضافتها للمريض :-

لإضافة مجموعة خاصة تحتوى على عدد من التحاليل مثل مجموعة فحص او مجموعة تحاليل خاصة بجهة معينة أو بطبيب معين نقوم بإضافة المجموعة كالآتي كما هو موضح .

نضغط على أيقونة System ثم نقوم بالضغط على (Custom Groups)

The screenshot displays the Real Lab software interface. At the top, there is a navigation bar with various icons. The 'System' icon, which depicts a computer monitor and a gear, is circled in red. Below the navigation bar, the main content area features a large orange cabinet icon on the left and a text box on the right. The text box contains the following Arabic text: "من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي: ادخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم ادخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل واسعارها ادخال الجهات المتعامل معها (احالة - مستقبل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم ادخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة". Below this text box, there is a grid of buttons. The 'Custom Groups' button, which is green and has a red circle around it, is located in the second row, third column. Other buttons in the grid include 'Culture Antibiotics', 'Barcode Types', 'Test Comments', 'Test Units', 'Result screen account', 'Lab. branches', 'أجهزة ومعدات المختبر', 'طباعة قائمة اسعار التحاليل', and 'مجموعات العمل (Log)'. At the bottom of the interface, there is a status bar with fields for 'User Name' (admin), 'Last Login' (Tuesday, 21 Feb 2017 07:31 PM), 'SQL DATABASE', 'Today' (Wednesday, 22-Feb-2017 09:52 AM), and a 'SQL SERVER' label on the right side.

نقوم بالضغط على زر (إضافة مجموعة) ثم نقوم بكتابة اسم المجموعة ونضغط (حفظ)

نافذة مجموعات التحاليل الخاصة بالمعمل :
 من خلال هذه النافذة يمكن تخصيص مجموعة من التحاليل في صورة مجموعة بسعر محدد وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

Test ID	Test Name	Price

عدد المجموعات المسجلة 5

Group Name:

إضافة مجموعة
 حذف
 تعديل
 حذف مجموعة
 طباعة القائمة

CHECKUP 1
 CHECKUP 2
 CHECKUP 3
 CHECKUP 4
 CHECKUP 5

Test Name:
 Price:

حذف تحليل
 تعديل
 حذف
 إضافة تحليل

القائمة الرئيسية

No. Of tests in group 0
 Total group Price 0

نافذة مجموعات التحاليل الخاصة بالعمل:
 من خلال هذه النافذة يمكن تخصيص مجموعة من التحاليل في صورة مجموعة بسعر محدد وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

Test ID	Test Name	Price

عدد المجموعات المسجلة 5

Group Name:

CHECKUP 1
CHECKUP 2
CHECKUP 3
CHECKUP 4
CHECKUP 5

Reallab

تراجع

حفظ

تعديل

حذف مجموعة

طباعة القائمة

نقوم بكتابة اسم المجموعة

Test Name:

Price:

No. Of tests in group 0

Total group Price 0

العودة الرئيسية

لإضافة مجموعة تحاليل للمجموعة نقوم باختيار المجموعة ثم نضغط على (إضافة تحليل)
نقوم باختيار التحليل المراد اضافته ونحدد سعره ثم نضغط (حفظ) .

نافذة مجموعات التحاليل الخاصة بالمعمل:
من خلال هذه النافذة يمكن تخصيص مجموعة من التحاليل في صورة مجموعة بسعر محدد وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

Test ID	Test Name	Price

عدد المجموعات المسجلة 6

Group Name:

Reallab
CHECKUP 1
CHECKUP 2
CHECKUP 3
CHECKUP 4
CHECKUP 5
Reallab

إضافة مجموعة
حفظ
تعديل
حذف مجموعة
طباعة القائمة

Test Name: Price: 0

حذف تحليل تعديل حفظ إضافة تحليل

النافذة الرئيسية

No. Of tests in group 0 Total group Price 0

نافذة مجموعات التحاليل الخاصة بالمعمل:
من خلال هذه النافذة يمكن تخصيص مجموعة من التحاليل في صورة مجموعة بسعر محدد وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

عدد المجموعات المسجلة 6

Test ID	Test Name	Price

Group Name:

RealLab

CHECKUP 1

CHECKUP 2

CHECKUP 3

CHECKUP 4

CHECKUP 5

RealLab

إضافة مجموعة

حفظ

تعديل

حذف مجموعة

طباعة القائمة

Test Name: CBC

Price: 50

حذف تحليل

تعديل

حفظ

تراجع

القائمة الرئيسية

No. Of tests in group 0

Total group Price 0

نافذة مجموعات التحاليل الخاصة بالمعمل:
من خلال هذه النافذة يمكن تخصيص مجموعة من التحاليل في صورة مجموعة بسعر محدد وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

عدد المجموعات المسجلة 6

Test ID	Test Name	Price
56	CBC	50
1	F.B.I.G.	10
4	Urine	10

Group Name:

RealLab

CHECKUP 1

CHECKUP 2

CHECKUP 3

CHECKUP 4

CHECKUP 5

RealLab

إضافة مجموعة

حفظ

تعديل

حذف مجموعة

طباعة القائمة

Test Name:

Price: 0

حذف تحليل

تعديل

حفظ

إضافة تحليل

القائمة الرئيسية

No. Of tests in group 3

Total group Price 70

لإضافة المجموعة التي قمنا بإنشائها لمريض معين

start

☐ TM
☐ TG
☒ CG **custom group menu**

CHECKUP 1

CHECKUP 2

CHECKUP 3

CHECKUP 4

CHECKUP 5

RealLab

Patient's tests

0

Add all tests in group

Delete

All

Taken outside lab

Urine

Stool

Blood

Semen

CSF

0.0

الباقى للمعمل

0.0

الباقى للمريض

المدفوع

مراجعة

تراجع

خالف

0.0

اجمالي التحاليل

0

الخمم

0.0

قيمة الخمم

0.0

التكلفة بعد الخمم

0.0

المدفوع سابقا

09:00 PM

25-Feb-2017

تاريخ الاستلام

10:27 AM

25-Feb-2017

تاريخ الدخول

Lab. ID

VIP

كود المريض

☐ Male
☒ Female

الأستاذة /

نور يسري على احمد

اسم المريض

Years

20

سن المريض

Individual

نوع الحساب

موبايل / تليفون

رقم بطاقة / الملف

عنوان المريض

معلومات إضافية

محمد السعيد

أ.د.

الطبيب المعالج

معلومات إضافية

جهة الإحالة

مريض بفقر الدم

هل يؤخذ علاج للسكر

عدد ساعات الصيام

مريض بالتهاب المفاصل

هل يؤخذ علاج للعدوى

هل يؤخذ علاج لسبولة الدم

مريض بالضغط الدم

هل يؤخذ مضاد حيوي

هل يؤخذ علاج للفيروسات

مريض بالفشل الكلوي

هل يؤخذ علاج للكبد

للسيدات هل يوجد حمل

مريض بالذئبة الحمراء

هل تم عمل اشعة بالمسح او بالموجات الصوتية خلال يومين

ملاحظات

NATIGH.COM

Print Result Password

Send SMS

Send E-mail

By Fax

تراجع

حفظ

تعديل

إضافة

الكارتونة

ورقة العمل

الباركود

الإيصاف

الدفعة الرقمية

نتائج التحاليل

دفعة البرقود

لحذف مجموعة معينة نقوم بتحديد المجموعة ثم نضغط (حذف)

نافذة مجموعات التحاليل الخاصة بالمعمل:
من خلال هذه النافذة يمكن تخصيص مجموعة من التحاليل في صورة مجموعة بسعر محدد وذلك لسهولة الاستخدام في ادخال بيانات التحاليل والمرضى

عدد المجموعات المسجلة 6

Test ID	Test Name	Price
56	CBC	50
1	F.B.I.G.	10
4	Urine	10

Group Name:

- Reallab
- CHECKUP 1
- CHECKUP 2
- CHECKUP 3
- CHECKUP 4
- CHECKUP 5
- Reallab

إضافة مجموعة
حفظ
تعديل
حذف مجموعة
طباعة القائمة

Price:

حذف تحليل
تعديل
حفظ
إضافة تحليل

النافذة الرئيسية

هل تريد حذف هذه المجموعة

Cancel OK

No. Of tests in group 3 Total group Price 70

7-3 إضافة طبيب معالج أو جهة إحالة

نقوم بالضغط على أيقونة **system**
ثم نقوم بإختيار (الجهات الخارجية والمعامل)

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- إدخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
- إدخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل وأسعارها
- إدخال الجهات المتعامل معها (إحالة - مستقبل - تعاقدات) وتحديد الأسعار الخاصة بهم
- إدخال بيانات أجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

الجهات الخارجية والمعامل

قوائم أسعار التعاقدات

Result screen account

اسماء وتليفونات المرضى

Culture Antibiotics

Test Comments

Custom Groups

أجهزة ومعدات المختبر

Barcode Types

Test Units

القاب وتعريفات المرضى

طباعة قائمة أسعار التحاليل

بيانات التحاليل

مجموعات التحاليل

Lab. branches

مجموعات العمل (Log)

SQL SERVER

User Name: admin Last Login: Monday, 14 Nov 2016 07:13 PM SQL DATABASE Today: Tuesday, 15-Nov-2016 12:28 PM

نضغط على زر (إضافة)

نقوم باختيار نوع الجهة (طبيب معالج - عينات مرسله - جهة إحالة أو تعاقد)

في حالة الطبيب المعالج يتم ادخال اسم الطبيب وبقيّة بياناته كما هو موضح
ولا يتم تحديد قائمة أسعار ويكون حساب المريض تبعا لسعر التحليل المدخل في البرنامج
في Patient Price
في حالة وجود خصم أو عمولة يتم تحديدها كما هو موضح
ثم نضغط (حفظ) .

نافذة الجهات والهيئات :
من خلال هذه النافذة يمكن إضافة وتعديل أسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها وذلك لاستخدامها في إدخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الاحصائيات

عدد الجهات المسجلة 646

الكل بحث باسم الجهة

اسم الجهة	اسم المسئول	قائمة أسعار التعاقد
أحمد السيد		
أحمد الشاذلي		
أحمد العربي		
أحمد المنير		
أحمد الموجي		
أحمد بك		
أحمد جبريل		
أحمد جلال		
أحمد حلقه		
أحمد خالد		
أحمد خطاب		
أحمد درويش		
أحمد راجح		
أحمد رضوان		
أحمد شاكر		
أحمد صقر		
أحمد عبد الخالق		
أحمد عبد الوهاب		
أحمد عزت		
أحمد عتير		
أحمد كريم		
أحمد لمعي		
أحمد محفوظ		
أحمد محمود المنير		
أسامة طه		

الصفة: اسم الجهة أو الهيئة: أ.د./

المدينة: العنوان:

تليفون: موبيل: فاكس:

E-Mail: Web Site:

الصفة: اسم المسئول: تليفون المسئول:

قائمة أسعار التعاقد مع الجهة:

خصم وعمولات

0 % عمولة % خصم

NATIGH.COM

ID 125 PW

العائمة الرئيسية حذف تعديل حفظ تراجع

في حالة جهة الإحالة أو التعاقد يتم ادخال اسم الجهة وبقية البيانات
(المدينة - العنوان - التليفون - الفاكس - إسم المسئول - تليفون المسئول -)

يتم تحديد قائمة أسعار لهذه الجهة ويتم حساب اسعار التحاليل طبقا لهذه القائمة
ويمكن إختيار قائمة لاب تو لاب في حالة المعامل أو أى قائمة أخرى تمت إضافتها كما تم عرضها
سابقا .

بعد الإنتهاء نضغط (حفظ) ونلاحظ ظهور اسم الجهة ضمن الجهات المسجلة على
يسار النافذة كما هو موضح .

نافذة الجهات والهيئات :
من خلال هذه النافذة يمكن إضافة وتعديل اسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها
وذلك لاستخدامها في ادخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الاحصائيات

عدد الجهات المسجلة: 0

الكل

بحث باسم الجهة

اسم الجهة	اسم المسئول	قائمة اسعار التعاقد
-----------	-------------	---------------------

طبيب معالج ☐ عينات مرسلة ☐ جهة إحالة أو تعاقد ☒

المصقة: اسم الجهة أو الهيئة: شركة ريال لاب

المدينة: العنوان:

تليفون: موبيل: فاكس:

E-Mail: Web Site:

المصقة: اسم المسئول: تليفون المسئول:

أ.د.

قائمة اسعار التعاقد مع الجهة

Individual
Lab To Lab
Free
lowpricelist
price menu1
price menu2

خصم وعمولات

0 % خصم

NATIGH.COM

ID 125 PW

الرئيسية حذف تعديل **حفظ** تراجع

نافذة الجهات والهيئات :

من خلال هذه النافذة يمكن إضافة وتعديل اسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها وذلك لاستخدامها في ادخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الاحصائيات

الكل

بحث باسم الجهة

عدد الجهات المسجلة 1

اسم الجهة	اسم المسئول	قائمة اسعار التعاقد
شركة ريال لاب		Lab To Lab

☐ طبيب معالج
 ☐ عينات مرسله
 ☐ جهة إحالة أو تعاقد

الصفة:
 اسم الجهة أو الهيئة:

المدينة:
 العنوان:

هاتف:
 موبيل:
 فاكس:

E-Mail:
 Web Site:

الصفة:
 اسم المسئول:
 هاتف المسئول:

قائمة اسعار التعاقد مع الجهة:

☐ خصم وعمولات

عمولة %
 خصم %

NATIGH.COM

ID 125
 PW

القائمة الرئيسية

حذف

تعديل

حفظ

إضافة

لتعديل جهة إحالة أو تعاقد نحدد الجهة المراد تعديلها من يسار النافذة ثم نضغط (تعديل) ثم نقوم بالتعديل وبعد الإنتهاء نضغط (حفظ) .

لحذف جهة إحالة أو تعاقد نحدد الجهة المراد حذفها من يسار النافذة ثم نضغط (حذف) ثم (موافق) .

8-3 إضافة مزرعة جديدة

لإضافة مزرعة جديدة للبرنامج نقوم بالضغط على أيقونة System

ثم نقوم بالضغط على زر (بيانات التحليل) فتظهر نافذة التحاليل كما هو موضح

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 608 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
605								
606								
4	1	URINE EXAMINATION	Urine	10	5		0	Urine
118	1	Aminogram	Ahmed G Culture	100	90		0	Body Fluid
5	2	STOOL EXAMINATION	Stool	4	2		0	Stool
56	3	BLOOD PICTURE	CBC	20	12.5		0	EDTA Blood
1	5	Blood Glucose	F.B.G.	6	3.5		0	Serum Fasting
2	5	Blood Glucose	PP.B.G.	6	3.5		0	Serum Postprandial
3	5	Blood Glucose	R.B.G.	6	3.5		0	Serum
8	6	LIVER FUNCTIONS	SGPT (ALT)	10	5.5		5	Serum Fasting
9	7	LIVER FUNCTIONS	SGOT (AST)	10	5.5		5	Serum Fasting
6	8	LIVER FUNCTIONS	Alk. Ph.	15	7	أونولاب	10	Serum Fasting
7	8	LIVER FUNCTIONS	Albumin	10	5.5		0	Serum Fasting
15	9	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Total	10	7		6	Serum
16	10	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Direct	10	7		6	Serum
11	12	KIDNEY FUNCTIONS	Creatinine (Serum)	10	5.5			

Test Information

Test Name Test Code

Report Name

Bill Name

History Name

Arabic Name

Group Name

Branch

Log Group

Collection

Test time (Day) Arrange No. Reference type Patient price Lab to lab price

Barcode

Name Tube 2

Tube 1 Tube 3

Sent outside Lab.

Lab. Name Cost price

Patient Question

القائمة الرئيسية القيم المرجعية حذف ترتيب حذف تعديل إضافة تحليل

Exit About Us Send Result Setting **System** Users Statistics Accounts Tools Work sheet Laboratory Patients

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

إدخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والمأكود الخاص بهم

إدخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل وأسعارها

إدخال الجهات المتعامل معها (حالة - مستقبل - نقاذات) وتحديد الأسعار الخاصة بهم

إدخال بيانات أجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

إجهات الخارجية والمعمل Culture Antibiotics Barcode Types **بيانات التحاليل**

قوائم أسعار استشارات Test Comments Test Units مجموعت التحاليل

Result screen account Custom Groups الفاب وتعريفات المرضى Lab. branches

اسماء وتليفونات المرضى أجهزة ومعدات المختبر طباعة قائمة أسعار التحاليل مجموعت العمل (Log)

User Name: admin Last Login: Monday, 25 Jul 2016 07:05 PM SQL DATABASE Today Tuesday, 26-Jul-2016 09:29 AM

فى حالة إضافة المزارع فى البرنامج لا يتم التعامل معها كما هو الحال فى إضافة تحليل عادى ولكن يتم تسجيلها فى خانات معينة

هذه الخانات لها رقم أى دى خاص بها (ID) تبدأ من (118 وحتى 139)

نقوم بالبحث برقم الأى دى عن الخانة ونقوم بالضغط عليها ثم نضغط (تعديل)
نقوم بإدخال بيانات المزرعة ونختار من الـ Group Name

CULTURE AND SENSITIVITY

ونكمل باقى البيانات إن وجدت ثم نضغط (حفظ) .

Search by test name

By group name

By test ID 1

Number Of Tests = 111 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
109	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Sputum Culture	30	20		12	Body Fluid
110	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Prostatic Secrecion Culture	30	20		12	Body Fluid
111	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Vaginal Swab Culture	30	20		12	Body Fluid
112	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Conjuntival Swab Culture	30	20		12	Body Fluid
113	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Gum Discharge Culture	30	20		12	Body Fluid
114	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Synovial Fluid Culture	30	20		12	Body Fluid
115	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Breast Discharge Culture	30	20		12	Body Fluid
116	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Cervical Swab Culture	30	20		0	Body Fluid
117	9999	CULTURE AND SENSITIVITY	Urethral Discharge Culture	0	0		0	Swab
119	9999			0	0		0	
120	9999			0	0		0	
121	9999			0	0		0	
122	9999			0	0		0	
123	9999			0	0		0	
124	9999			0	0		0	
125	9999			0	0		0	

Test Information

Test Name

Report Name

Bill Name

History Name

Arabic Name

Group Name CULTURE AND SENSITIVITY

Branch

Log Group

Collection

Test Code

See Report

Print with other

Add with group

Main test

Barcode

Name

Tube 2

Tube 1

Tube 3

Sent outside Lab.

Lab. Name

Cost price 0

Patient Question

Test time (Day) 1

Arrange No. 9999

Reference type By sex and age

Patient price 0

Lab to lab price 0

القائمة الرئيسية

التقييم الموجبة

حذف

تراجع


حفظ



تعديل

إضافة تعديل

نقوم بالدخول في المسار الآتي **D:\real lab system\Data**

ثم نقوم بنسخ الملف رقم **100** وإعادته تسميته برقم الأي دي الخاص بالمزرعة التي قمنا بإنشائها

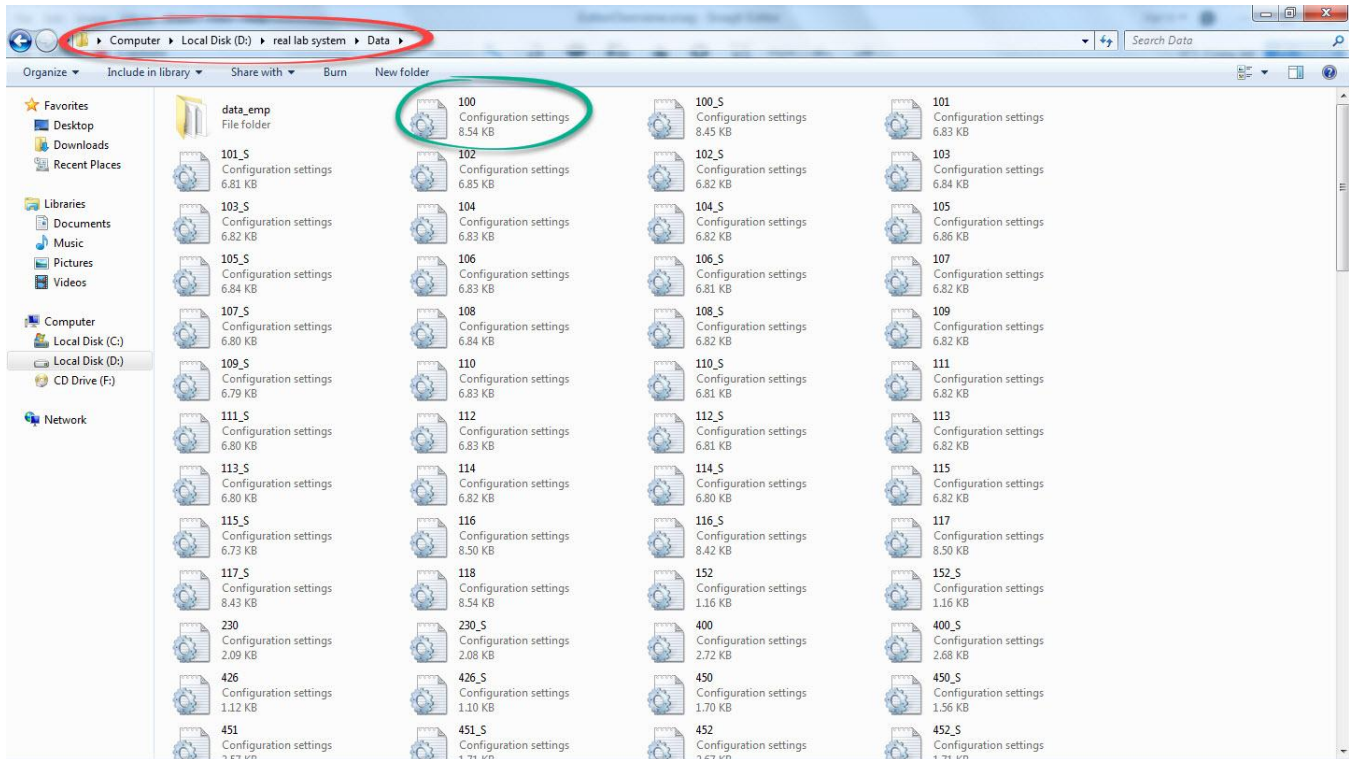

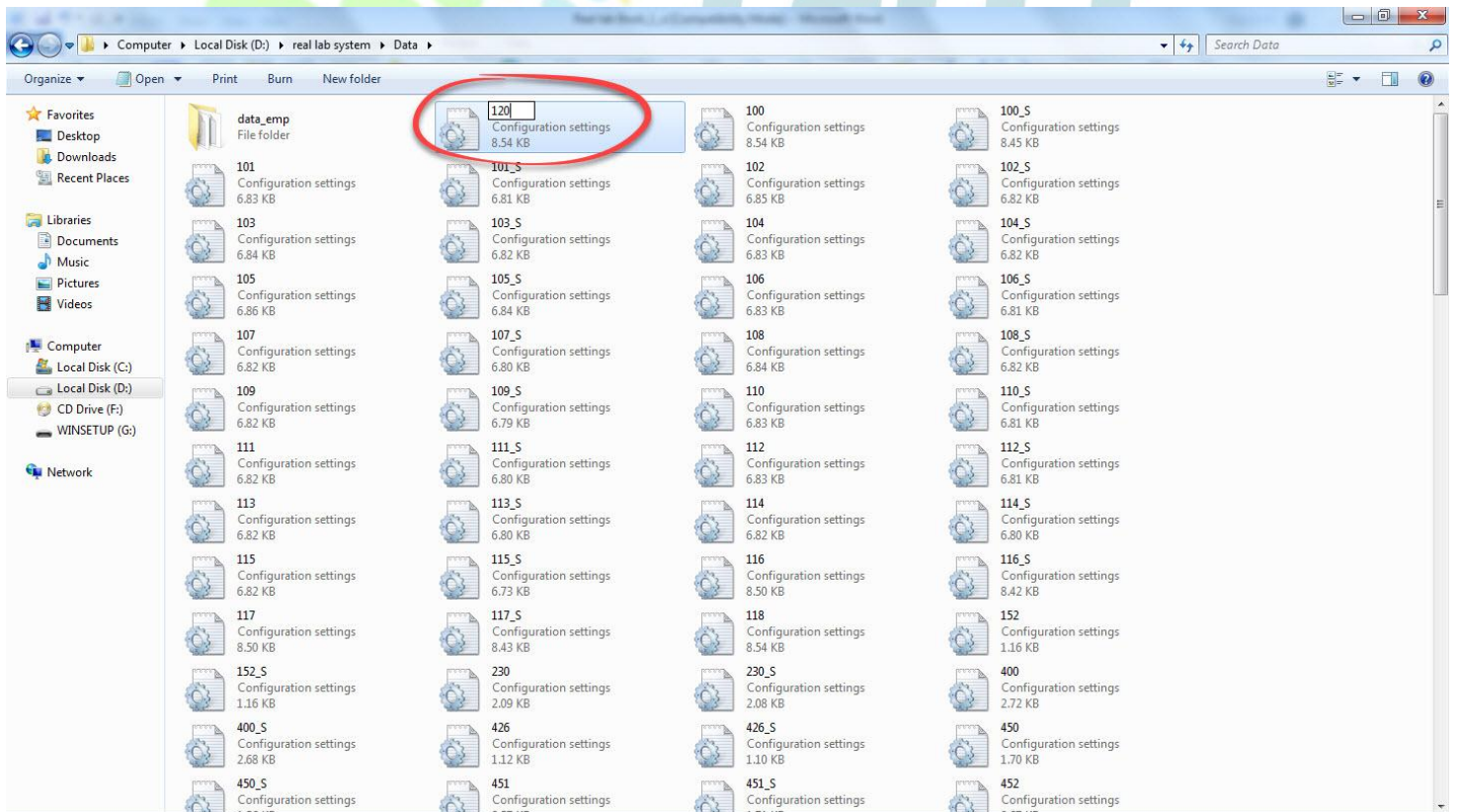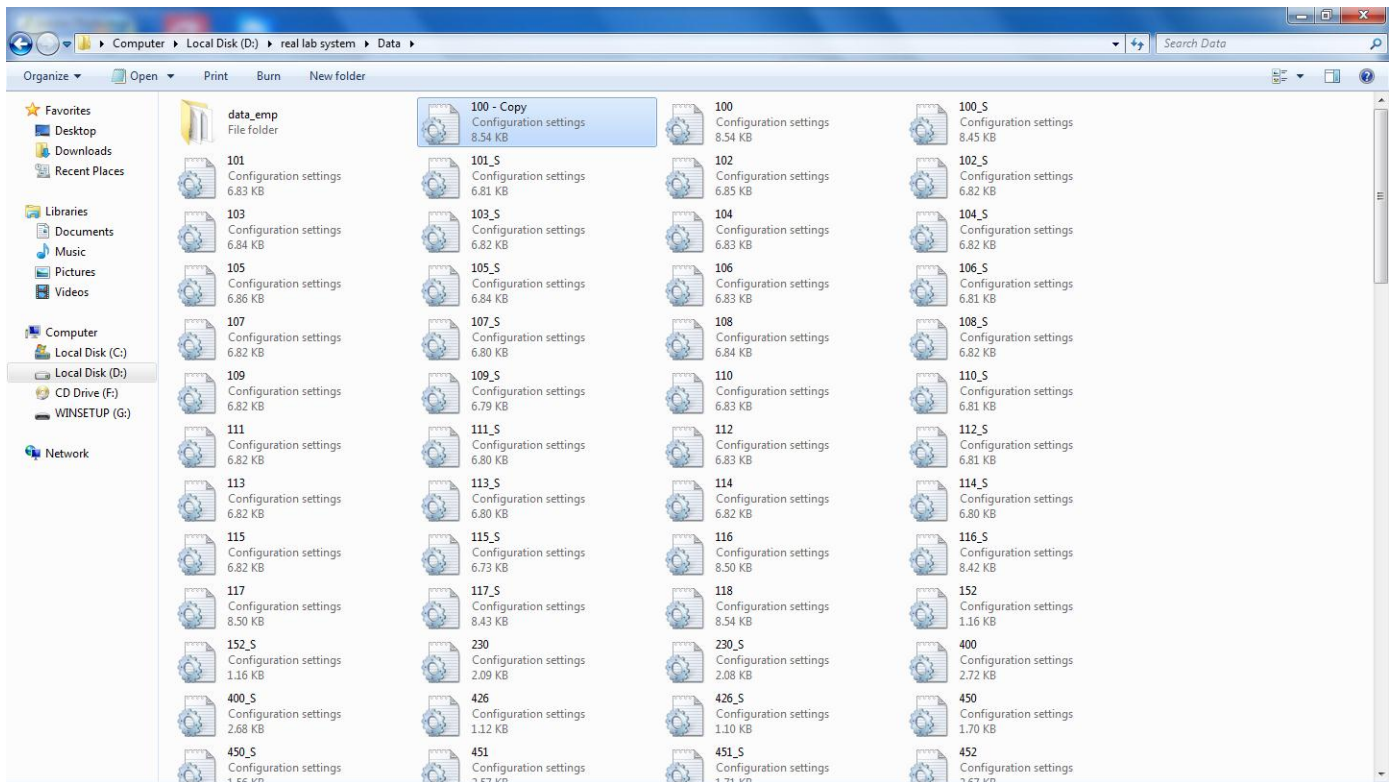

نقوم بالدخول بعد ذلك فى تقرير المزرعة وتعديل بياناتها واطافة المضادات الحيوية المطلوبة .

وسيتم توضيح إضافة المضادات الحيوية للمزارع فيما يلى .



9-3 إضافة مضاد حيوى للمزرعة

نقوم بالضغط على أيقونة **System**
ثم نقوم باختيار **Culture Antibiotics**

تظهر لنا النافذة الموضحة

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

- ادخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
- ادخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل واسعارها
- ادخال الجهات المتعامل معها (احالة - مستقبل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم
- ادخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

SQL SERVER

User Name admin Last Login Thursday, 15 Dec 2016 07:17 PM SQL DATABASE Today Saturday, 17-Dec-2016 01:26 PM

Culture

نافذة المضادات الحيوية:

من خلال هذه النافذة يمكن ادخال وتعديل المضادات الحيوية الخاصة بكل مزرعة وتحديد الاسماء التجارية المراد عرضها وتحديد هل يملح للحوامل أو الأطفال أم لا

International Antibiotic

Symb.	Scientific Name
AMX	Amoxycillin
AMC	Amoxycillin + Clavulanic Acid
AM	Ampicillin
SAM	Ampicillin + Sulbactam
AZM	Azithromycin
ATM	Aztreonam
B	Bacitracin
CB	Carbenicillin
CEC	Cefaclor
CN	Cefalexin
MA	Cefamandole
CZ	Cefazolin
FEP	Cefepime
CFEP	Cefepime + Clavulanic Acid
CFM	Cefixime
CFP	Cefoperazone
SCF	Cefoperazone + Sulbactam
CTX	Cefotaxime
CCTX	Cefotaxime + Clavulanic Acid
CTT	Cefotetan
FOX	Cefoxitin
CRO	Ceftriaxone

القائمة الرئيسية

Antibiotic By Abbr.

Antibiotics No. in culture 0

Symb.	Scientific Name	Sensitivity	Pregnant	Children

Symbol

Scientific Name

Sensitivity

☐ Pregnant
☐ Children

Commercial Names

Print

حذف
تعديل
حفظ
إضافة

Culture

نافذة المضادات الحيوية:

من خلال هذه النافذة يمكن ادخال وتعديل المضادات الحيوية الخاصة بكل مزرعة وتحديد الاسماء التجارية المراد عرضها وتحديد هل يملح للحوامل أو الأطفال أم لا

International Antibiotic

Symb.	Scientific Name
AMX	Amoxycillin
AMC	Amoxycillin + Clavulanic Acid
AM	Ampicillin
SAM	Ampicillin + Sulbactam
AZM	Azithromycin
ATM	Aztreonam
B	Bacitracin
CB	Carbenicillin
CEC	Cefaclor
CN	Cefalexin
MA	Cefamandole
CZ	Cefazolin
FEP	Cefepime
CFEP	Cefepime + Clavulanic Acid
CFM	Cefixime
CFP	Cefoperazone
SCF	Cefoperazone + Sulbactam
CTX	Cefotaxime
CCTX	Cefotaxime + Clavulanic Acid
CTT	Cefotetan
FOX	Cefoxitin
CRO	Ceftriaxone

القائمة الرئيسية

Antibiotic By Abbr.

Antibiotics No. in culture 0

100 Urine Culture

101 Stool Culture

102 Blood Culture

103 Semen Culture

104 Eye Culture

105 Ear Discharge Culture

106 Pus From Wound Culture

107 Nasal Swab Culture

Symb.	Scientific Name	Sensitivity	Pregnant	Children

Symbol

Scientific Name

Sensitivity

☐ Pregnant
☐ Children

Commercial Names

Print

حذف
تعديل
حفظ
إضافة

نختار المزرعة المراد إضافة مضاد حيوى لها

نلاحظ ظهور المضادات الحيوية المضافة للمزرعة وعددها

 Culture 100 Urine Culture

نافذة المضادات الحيوية:
من خلال هذه النافذة يمكن ادخال وتعديل المضادات الحيوية الخاصة بكل مزرعة وتحديد الاسماء التجارية المراد عرضها وتحديد هل يصلح للحوامل أو الأطفال أم لا

Antibiotics No. in culture 36

Symb.	Scientific Name	Sensitivity	Pregnant	Children
AK	Amikcin	> 17 mm	☒	☒
AMX	Amoxicillin	> 18 mm	☒	☒
AMC	Amoxicillin and Clavulanic	> 18 mm	☒	☒
AM	Ampicillin	> 29 mm	☒	☒
AZM	Azithromycin	> 18 mm	☒	☒
ATM	Aztreonam	> 21 mm	☒	☒
CEC	Cefaclor	> 18 mm	☒	☒
CRO	Ceftriaxone	> 21 mm	☒	☒
CFP	Cefoprazone	> 18 mm	☒	☒
CTX	Cefotaxime	> 23 mm	☒	☒
CAZ	Ceftazidime	> 18 mm	☒	☒

Symbol Scientific Name Sensitivity

Commercial Names Print

حذف تعديل حفظ إضافة

لإضافة مضاد حيوى جديد للمزرعة نضغط على زر (إضافة) ثم نختار المضاد الحيوى المراد إضافته ونضغط عليه مرتين من يسار النافذة ثم نضغط على زر (حفظ).

نافذة المضادات الحيوية:
من خلال هذه النافذة يمكن ادخال وتعديل المضادات الحيوية الخاصة بكل مزرعة وتحديد الاسماء التجارية المراد عرضها وتحديد هل يصلح للحوامل أو الأطفال أم لا

Culture 100 Urine Culture

Antibiotics No. in culture **36**

Symb.	Scientific Name	Sensitivity	Pregnant	Children
AK	Amikcin	> 17 mm	☒	☒
AMX	Amoxicillin	> 18 mm	☒	☒
AMC	Amoxicillin and Clavulanic	> 18 mm	☒	☒
AM	Ampicillin	> 29 mm	☒	☒
AZM	Azithromycin	> 18 mm	☒	☒
ATM	Aztreonam	> 21 mm	☒	☒
CEC	Cefaclor	> 18 mm	☒	☒
CRO	Ceftriaxone	> 21 mm	☒	☒
CFP	Cefoprazone	> 18 mm	☒	☒
CTX	Cefotaxime	> 23 mm	☒	☒
CAZ	Ceftazidime	> 18 mm	☒	☒

International Antibiotic

Antibiotic By Abbr.

Symbol Scientific Name Sensitivity ☐ Pregnant ☐ Children

Commercial Names Print

النافذة الرئيسية **حذف** **تعديل** **حفظ** **تراجع**

نافذة المضادات الحيوية:
من خلال هذه النافذة يمكن ادخال وتعديل المضادات الحيوية الخاصة بكل مزرعة وتحديد الاسماء التجارية المراد عرضها وتحديد هل يصلح للحوامل أو الأطفال أم لا

Culture 100 Urine Culture

Antibiotics No. in culture **36**

Symb.	Scientific Name	Sensitivity	Pregnant	Children
AK	Amikcin	> 17 mm	☒	☒
AMX	Amoxicillin	> 18 mm	☒	☒
AMC	Amoxicillin and Clavulanic	> 18 mm	☒	☒
AM	Ampicillin	> 29 mm	☒	☒
AZM	Azithromycin	> 18 mm	☒	☒
ATM	Aztreonam	> 21 mm	☒	☒
CEC	Cefaclor	> 18 mm	☒	☒
CRO	Ceftriaxone	> 21 mm	☒	☒
CFP	Cefoprazone	> 18 mm	☒	☒
CTX	Cefotaxime	> 23 mm	☒	☒
CAZ	Ceftazidime	> 18 mm	☒	☒

International Antibiotic

Antibiotic By Abbr.

Symbol Scientific Name Sensitivity ☐ Pregnant ☐ Children

Commercial Names Print

النافذة الرئيسية **حفظ** **تعديل** **حفظ** **تراجع**

نقوم بالضغط مرتين

International Antibiotic

Antibiotic By Abbr.

Antibiotics No. in culture 37

Symb.	Scientific Name
AMX	Amoxycillin
AMC	Amoxycillin + Clavulanic Acid
AM	Ampicillin
SAM	Ampicillin + Sulbactam
AZM	Azithromycin
ATM	Aztreonam
B	Bacitracin
CB	Carbenicillin
CEC	Cefaclor
CN	Cefalexin
MA	Cefamandole
CZ	Cefazolin
FEP	Cefepime
CFEP	Cefepime + Clavulanic Acid
CFM	Cefixime
CFP	Cefoperazone
SCF	Cefoperazone + Sulbactam
CTX	Cefotaxime
CCTX	Cefotaxime + Clavulanic Acid
CTT	Cefotetan
FOX	Cefoxitin
CFO	Cefuroxime

القائمة الرئيسية

Symb.	Scientific Name	Sensitivity	Pregnant	Children
AK	Amikcin	> 17 mm	☒	☒
AMX	Amoxicillin	> 18 mm	☒	☒
AMC	Amoxicillin and Clavulanic	> 18 mm	☒	☒
AM	Ampicillin	> 29 mm	☒	☒
AZM	Azithromycin	> 18 mm	☒	☒
ATM	Aztreonam	> 21 mm	☒	☒
CEC	Cefaclor	> 18 mm	☒	☒
CRO	Ceftriaxone	> 21 mm	☒	☒
CFP	Cefoprazone	> 18 mm	☒	☒
CTX	Cefotaxime	> 23 mm	☒	☒
FOX	Cefoxitin		☐	☐

Symbol	Scientific Name	Sensitivity	
FOX	Cefoxitin		☐ Pregnant ☐ Children

Commercial Names	Print

تعدیل

haz

إضافة

في حالة عدم وجود المضاد الحيوى المراد إضافته فى القائمة الموجودة يتم كتابه بياناته يدويا فى

الخانات الخاصة ببيانات المضاد الحيوى ثم نضغط (حفظ) .

لحذف المضاد الحيوى من المزرعة نقوم بتحديدده ثم نضغط (حذف) .

فى حالة الحمل Pregnancy

لإضافة مضاد حيوى فى حالة الحمل نقوم بتحديد خانة

Pregnant

عند إضافة المضاد الحيوى

ويظهر المضاد الحيوى فى المزرعة فقط فى حالة وجود حمل

عند تحديد وجود حمل فى بيانات المريض

فى حالة الأطفال Children

لإضافة مضاد حيوى فى حالة الأطفال نقوم بتحديد خانة

Children

عند إضافة المضاد الحيوى

البرنامج يتعرف على الأطفال إذا كان سنه أقل من 12 سنة (ذكر أو أنثى) .

ويظهر المضاد الحيوى فى المزرعة فقط فى حالة الطفل إذا تم تخصيص المضاد الحيوى

للطفل عند إضافة المضاد الحيوى للمزرعة .

for lab service

10-3 العينات المرسلة للخارج

فى حالة وجود تحاليل معينة يتم ارسالها خارج المعمل نقوم بتعديل بيانات التحليل بأنه **عينة مرسلة للخارج** ونقوم بتحديد المعمل وتسجيل السعر المدفوع له والسعر الذى سيتم التعامل به مع المريض كما هو موضح .

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم (بيانات التحاليل)

نقوم بالبحث عن التحليل المراد ارساله للخارج ونقوم بتحديد ونضغط (تعديل)

نقوم بتحديد خانة **Sent outside Lab.** ثم نقوم باختيار المعمل المرسل اليه التحليل

يتم تسجيل سعر التحليل المدفوع للمعمل الخارجى فى خانة **Cost Price** والسعر المأخوذ من

المريض فى خانة **Patient Price**

The screenshot displays the Real Lab software interface. At the top, there is a menu bar with icons for Exit, About Us, Send Result, Setting, System (highlighted with a red circle), Users, Statistics, Accounts, Tools, Work sheet, Laboratory, and Patients. Below the menu bar, there is a central panel with a yellow box containing an image of a safe and Arabic text describing the system's capabilities. Below this panel, there is a grid of buttons for various functions. The button 'بيانات التحاليل' (Test Data) is highlighted with a red circle. At the bottom, there is a status bar showing User Name, Last Login, SQL DATABASE, and Today's date and time.

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- ادخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
- ادخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل واسعارها
- ادخال الجهات المتعامل معها (احالة - مستقبل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم
- ادخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

الجهات الخارجية والمعامل

Culture Antibiotics

Barcode Types

بيانات التحاليل

قوائم أسعار التعاقدات

Test Comments

Test Units

مجموعات التحاليل

Result screen account

Custom Groups

الاقاب وتعرفيات المرضى

Lab. branches

اسماء وتليفونات المرضى

أجهزة ومعدات المختبر

طباعة قائمة اسعار التحاليل

مجموعات العمل (Log)

User Name admin Last Login Sunday, 26 Feb 2017 07:19 PM SQL DATABASE Today Tuesday, 28-Feb-2017 09:13 AM

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 7 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
18	30	LIVER FUNCTIONS	Total Protein	25	10		6	Serum Fasting
37	50	LIPIDS PROFILE	Total Lipids	60	12		10	Serum Fasting
250	9999	Thyroid Hormones	Total T3	30	15		13	Serum
251	9999	Thyroid Hormones	Total T4	30	15		13	Serum
365	9999	Iron Tests	Iron Total (Serum)	30	0		0	Serum
490	9999	Immunoglobulins	Total IgG	70	40		30	Serum
493	9999	Immunoglobulins	Total IgE	70	40		30	Serum

Test Information

Test Name: Test Code:

Report Name: (Thyroxine)

Bill Name:

History Name:

Arabic Name:

Group Name:

Branch:

Log Group:

Collection:

☐ See Report

☒ Print with other

☒ Add with group

☒ Main test

Barcode

Name: Tube 2:

Tube 1: Tube 3:

☐ Sent outside Lab.

Lab. Name: Cost price:

☐ Patient Question

Test time (Day): Arrange No.: Reference type: Patient price: Lab to lab price:

الرئيسية القائمة القيم المجمعة حذف تراجع حفظ تعديل إضافة تحليل

Search by test name By group name By test ID Number Of Tests = 14 Tests

ID	Arrang	Group Name	Test Name	Pat. P	Lab P	Out Lab Name	Out P	Barcode
15	9	LIVER FUNCTIONS	Bilirubin Total	15	7		6	Serum
91	22	Cardiac Markers	CK (Total)	50	20		18	Serum Fasting
18	30	LIVER FUNCTIONS	Total Protein	25	10		6	Serum Fasting
37	50	LIPIDS PROFILE	Total Lipids	60	12		10	Serum Fasting
175	9999	Serum Electrolytes	Calcium (Total) serum	30	9		9	Serum
210	9999	Hepatitis Markers	HDV antibody (total)	65	65		60	Serum
250	9999	Thyroid Hormones	Total T3	30	15		13	Serum
251	9999	Thyroid Hormones	Total T4	30	15		13	Serum
268	9999	Fertility Hormones	Testosterone Total	45	25		20	Serum
312	9999	Tumors Markers	PSA (Total)	70	55		45	Serum
365	9999	Iron Tests	Iron Total (Serum)	30	0		0	Serum
490	9999	Immunoglobulins	Total IgG	70	40		30	Serum
493	9999	Immunoglobulins	Total IgE	70	40		30	Serum
608	9999		total	0	0		0	

Test Information

Test Name: Test Code:

Report Name: (Thyroxine)

Bill Name:

History Name:

Arabic Name:

Group Name:

Branch:

Log Group:

Collection:

☐ See Report

☒ Print with other

☒ Add with group

☒ Main test

Barcode

Name: Tube 2:

Tube 1: Tube 3:

☒ Sent outside Lab.

Lab. Name: Cost price:

☐ Patient Question

Test time (Day): Arrange No.: Reference type: Patient price: Lab to lab price:

الرئيسية القائمة القيم المجمعة حذف تراجع حفظ تعديل إضافة تحليل

11-3 كيفية إنشاء حساب للطبيب المعالج أو لمعمل معين لإستخدام خدمة نتيجة

أولا فى حالة طبيب معالج

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم نقوم بالضغط على (الجهات الخارجية والمعامل)
نضغط على زر (إضافة) ونقوم باختيار نوع الجهة (طبيب معالج) كما هو موضح .

The screenshot displays the Real Lab software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Exit, About Us, Send Result, Setting, System (highlighted with a red circle and a mouse cursor), Users, Statistics, Accounts, Tools, Work sheet, Laboratory, and Patients. Below this, a central panel contains a list of system management options. The first option, 'الجهات الخارجية والمعامل' (External Parties and Laboratories), is highlighted with a red circle and a mouse cursor. Other options include 'قوائم أسعار التعاقدات' (Contract Price Lists), 'Result screen account', 'اسماء وتليفونات المرضى' (Patient Names and Phone Numbers), 'Culture Antibiotics', 'Test Comments', 'Custom Groups', 'أجهزة ومعدات المختبر' (Laboratory Equipment), 'Barcode Types', 'Test Units', 'القباب وتعريفات المرضى' (Patient Definitions), 'طباعة قائمة أسعار التحاليل' (Print Analysis Price List), 'بيانات التحاليل' (Analysis Data), 'مجموعات التحاليل' (Analysis Groups), 'Lab. branches', and 'مجموعات العمل (Log)' (Work Groups (Log)). The bottom status bar shows the user name 'admin', last login on Monday, 14 Nov 2016 at 07:13 PM, SQL DATABASE, and the current date and time: Tuesday, 15-Nov-2016 at 12:28 PM.

نافذة الجهات والهيئات :

من خلال هذه النافذة يمكن اضافة وتعديل اسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها وذلك لاستخدامها في ادخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الاحصائيات

الكل	↑	↓	يبحث باسم الجهة
اسم الجهة	اسم المسئول	قائمة اسعار التعاقد	▲
أحمد السيد			
أحمد الشاذلي			
أحمد العربي			
أحمد المنير			
أحمد الموجي			
أحمد بك			
أحمد جبريل			
أحمد جلال			
أحمد حلقه			
أحمد خالد			
أحمد خطاب			
أحمد درويش			
أحمد راجح			
أحمد رضوان			
أحمد شاكر			
أحمد صقر			
أحمد عبد الخالق			
أحمد عبد الوهاب			
أحمد عزت			
أحمد عنتر			
أحمد كريم			
أحمد لمعي			
أحمد محفوظ			
أحمد محمود المنير			
أحمد سامح			▼

عدد الجهات المسجلة 646

طبيب معالج ● عينات مرسله ● جهة إحالة أو تعاقد

الصفة: اسم الجهة أو الهيئة:

المدينة: العنوان:

تليفون: موبيل: فاكس:

E-Mail: Web Site:

الصفة: اسم المسئول: تليفون المسئول:

قائمة اسعار التعاقد مع الجهة:

ختم وعمولات

ختم % عمولة %

0 0

NATIGH.COM

ID 125 PW

القائمة الرئيسية

حذف

تعديل

حفظ

إضافة

نقوم بالضغط على أيقونة (ID) فيقوم البرنامج بتوليد أى دى خاص بالطبيب ثم نقوم بكتابه نفس الرقم فى خانة الباسورد ، ثم نضغط حفظ .

نافذة الجهات والهيئات :
من خلال هذه النافذة يمكن إضافة وتعديل أسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها وذلك لاستخدامها فى إدخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الاحصائيات

عدد الجهات المسجلة: 646

طبيب معالج (محدد) • عيادات مرسلية • جهة إحالة أو تعاقد

الصفة: /أ.د. اسم الجهة أو الهيئة: محمود على

المهنية: العنوان: فاكس: موبيل: تلفون:

E-Mail: Web Site:

الصفة: اسم المسئول: تلفون المسئول:

قائمة اسعار التعاقد مع الجهة: خصم وعمولات: خصم % عمولة %

NATIGH.COM ID: 125 15111 PW: 15111

القائمة الرئيسية حذف تعديل حفظ تراجع

اسم الجهة	اسم المسئول	قائمة اسعار التعاقد
أحمد السيد		
أحمد الشاذلي		
أحمد العربي		
أحمد المنير		
أحمد الموجي		
أحمد بك		
أحمد جبريل		
أحمد جلال		
أحمد حلقه		
أحمد خالد		
أحمد خطاب		
أحمد درويش		
أحمد راجح		
أحمد رضوان		
أحمد شاكر		
أحمد صقر		
أحمد عبد الخالق		
أحمد عبد الوهاب		
أحمد عزت		
أحمد عنتر		
أحمد كريم		
أحمد لمعي		
أحمد محفوظ		
أحمد محمود المنير		

عند إضافة مريض جديد وإدخال اسم الطبيب المعالج - الذى قمنا بتسجيله سابقا - فى بيانات المريض ثم رفع نتيجة المريض على موقع نتيجة فبذلك يستطيع الطبيب المعالج الإطلاع على نتيجة المريض الذى قام بإحالاته عن طريق تسجيل الدخول على موقع نتيجة بالأى دى والباسورد الذى قمنا بإنشائه

ثانياً في حالة معمل (Lab to Lab)

نقوم بالضغط على أيقونة **System** ثم نقوم بالضغط على (الجهات الخارجية والمعامل)
 نضغط على زر (إضافة) ونقوم باختيار نوع الجهة (جهة إحالة أو تعاقد) كما هو موضح
 ثم نقوم بتحديد قائمة أسعار التعامل مع الجهة (Lab to Lab) .

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الآتي:

- إدخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
- إدخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل واسعارها
- إدخال الجهات المتعامل معها (إحالة - مستقيل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم
- إدخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

SQL SERVER

User Name: admin Last Login: Monday, 14 Nov 2016 07:13 PM SQL DATABASE Today: Tuesday, 15-Nov-2016 12:28 PM

نافذة الجهات والهيئات :
من خلال هذه النافذة يمكن إضافة وتعديل أسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها وذلك لاستخدامها في إدخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الاحصائيات

عدد الجهات المسجلة 646

يبحث باسم الجهة الكل

اسم الجهة	اسم المسئول	قائمة اسعار التعاقد
أحمد السيد		
أحمد الشاذلي		
أحمد العربي		
أحمد المنير		
أحمد الموجي		
أحمد بك		
أحمد جبريل		
أحمد جلال		
أحمد حلقه		
أحمد خالد		
أحمد خطاب		
أحمد درويش		
أحمد راجح		
أحمد رضوان		
أحمد شاكر		
أحمد صقر		
أحمد عبد الخالق		
أحمد عبد الوهاب		
أحمد عزت		
أحمد عنتر		
أحمد كريم		
أحمد لمعي		
أحمد محفوظ		
أحمد محمود المنير		
أحمد		

الصفة: ☐ طبيب معالج ☐ عينات مرسلة ☐ جهة إحالة أو تعاقد

اسم الجهة أو الهيئة:

المدينة:

العنوان:

تليفون:

موبيل:

فاكس:

E-Mail:

Web Site:

الصفة:

اسم المسئول:

تليفون المسئول:

قائمة اسعار التعاقد مع الجهة:

حجم وعمولات:

عمولة %:

خمس %:

NATIGH.COM

ID: 125 PW:

إضافة حذف تعديل القائمة الرئيسية

نقوم بالضغط على أيقونة (ID) فيقوم البرنامج بتوليد أى دى خاص بالمعمل ثم نقوم بكتابه نفس الرقم فى خانة الباسورد ، ثم نضغط حفظ .

نافذة الجهات والهيئات :
من خلال هذه النافذة يمكن إضافة وتعديل أسماء الجهات والهيئات المتعامل معها أو حذفها وذلك لاستخدامها في إدخال بيانات المرضى والحسابات و عمل الإحصائيات

بحث باسم الجهة الكل

عدد الجهات المسجلة 0

طبيب معالج عينات مرسله **جهة إحالة او تعاقد**

الصفة: اسم الجهة أو الهيئة:

المدينة: العنوان:

تليفون: موبيل: فاكس:

E-Mail: Web Site:

الصفة: اسم المسئول: تليفون المسئول:

قائمة اسعار التعاقد مع الجهة:
Lab To Lab
Free
lowpricelist
price menu1
price menu2

خصم وعمولات ☐ خصم %

NATIGH.COM

ID 125 11112 PW 11112

العائمة الرئيسية حذف تعديل **حفظ** تراجع

عند إضافة مريض جديد نقوم بتسجيله كـ (Contract) ثم نقوم باختيار المعمل من جهة الإحالة
يتم بعد ذلك رفع نتيجة المريض على موقع نتيجة ويستطيع المعمل الإطلاع على نتيجة المريض الذي
قام بإرسال عيناته
عن طريق تسجيل الدخول على موقع نتيجة بالأى دى والباسورد الذى قمنا بإنشائه .



4 – ضبط ومتابعة أداء المعمل

Real Lab System

داخل هذا الجزء :-

- 1 – إعدادات التقرير
- 2 – ضبط هوامش التقرير
- 3 – حجم الورق المستخدم فى الطباعة
- 4 – طباعة رأس وذيل التقرير
- 5 – تعديل ألوان رأس وذيل التقرير
- 6 – ضبط الطابعات المخصصة للطباعة
- 7 – نوع الحساب الافتراضى للنظام

المعرض فى هذا الجزء :-

- إضافة مشرفين ومديرين للنظام
- إنشاء مستخدمين فى البرنامج وتحديد لكل مستخدم صلاحيات عمله
- تسجيل الحضور والإنصراف للمستخدمين ومن خلالها معرفة الوقت الإضافى للمستخدم والتأخير .

ضبط ومتابعة أداء المعمل

1-4 إنشاء مستخدمين وتحديد صلاحياتهم

عند وجود أكثر من موظف بالمعمل وكل شخص له دور معين ، يمكن إنشاء مستخدمين في البرنامج وتحديد لكل مستخدم صلاحيات عمله وبالتالي تزيد من ضبط العمل وكفاءته داخل المعمل

لإنشاء مستخدم جديد وتحديد صلاحياته نضغط على أيقونة **User**

ثم نقوم بالضغط على زر (إنشاء مستخدمين)

عند الضغط على زر (إنشاء مستخدمين) يطلب البرنامج كلمة مرور النوافذ الداخلية نقوم بإدخال كلمة المرور (123) أو كلمة المرور الخاصة بالمستخدم في حالة قام المستخدم بتغييرها



لإضافة مستخدم جديد نضغط على زر (إضافة) ونقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الرئيسية والفرعية الخاصة به ثم نقوم بتحديد صلاحيات المستخدم كما هو موضح



نافذة انشاء وتعديل صلاحيات المستخدمين:

من خلال هذه النافذة يمكنك انشاء مستخدمين وتحديد صلاحيات كل مستخدم وتعديل بياناتهم
وانشاء مديرون ومشرفين للنظام

اسم المستخدم

كلمة المرور

كلمة مرور النوافذ الداخلية

Users No. 2

admin
user

الصلاحيات

وقت آخر دخول

صلاحية مطلقة (للمشرفين ومديرون النظام)

صلاحية محدودة (للمستخدمين النظام)

رقم الفرع الممنوح للمستخدم التعامل معه

في حالة اختيار الكل سيتم تسجيل المرضى في الفرع الرئيسي رقم 1

تسجيل الحضور والانصراف

وقت بداية العمل للمستخدم

00:00:00 AM

وقت انتهاء العمل للمستخدم

00:00:00 PM

هل توجد فترة راحة للموظف

زمن فترة الراحة بالساعات والدقائق

00:00

إضافة وتعديل بيانات المرضى (طباعة وصل - طباعة بار كود)

إدخال وتعديل نتائج تحاليل المرضى

مراجعة وتعديل نتائج تحاليل المرضى

طباعة نتائج المرضى (عمل تاريخ مرضى وطباعة - طباعة ظرف ... الخ)

عدم طباعة نتائج المرضى في حالة وجود باقى حساب

صلاحية تسليم نتائج المرضى

حد الخصم المسموح للمستخدم اعطائه للمرضى

طباعة ورقة العمل و Log

صلاحية حذف المرضى

تعديل في بيانات النظام والاعدادات مثل (بيانات التحاليل والقيم الطبيعية - الباركود - الوحدات ... الخ)

امكانية صرف وإيداع نقدية محاسبة المرضى ومندوبين الجهات الخارجية (حسابات)

امكانية عمل التقارير الاحصائية وطباعتها (الاحصائيات)

الاطلاع على حساب الدرج والحسابات الاخرى (جرد يومي - اسبوعي - شهري - سنوي ... الخ)

القائمة الرئيسية

حذف

حفظ

تعديل

إضافة



نافذة انشاء وتعديل صلاحيات المستخدمين:

من خلال هذه النافذة يمكنك انشاء مستخدمين وتحديد صلاحيات كل مستخدم وتعديل بياناتهم
وانشاء مديرون ومشرفين للنظام

Users No.

2

admin
user

كلمة مرور التوافق الداخلية

كلمة المرور

اسم المستخدم

أحمد

الصلاحيات

وقت آخر دخول

صلاحيات مطلقة (للمشرفين ومديرون النظام)

صلاحيات محدودة (للمستخدمين النظام)

All

رقم الفرع الممنوح للمستخدم التعامل معه

في حالة اختيار الكل سيتم تسجيل المرضى في الفرع الرئيسي رقم 1

تسجيل الحضور والانصراف

وقت بداية العمل للمستخدم

09:00:00 AM

وقت انتهاء العمل للمستخدم

05:00:00 PM

هل توجد فترة راحة للموظف

زمن فترة الراحة بالساعات والدقائق

01:00

إضافة وتعديل بيانات المرضى (طباعة وصل - طباعة بار كود)

إدخال وتعديل نتائج تحاليل المرضى

مراجعة وتعديل نتائج تحاليل المرضى

طباعة نتائج المرضى (عمل تاريخ مرضى - طباعة - طباعة ظرف ... الخ)

عدم طباعة نتائج المرضى في حالة وجود باقي حساب

صلاحيات تسليم نتائج المرضى

حد الخصم المسموح للمستخدم اعطائه للمريض

% 10

طباعة ورقة العمل و Log

صلاحيات حذف المرضى

تعديل في بيانات النظام والاعدادات مثل (بيانات التحاليل والقيم الطبيعية - الباركود - الوحدات ... الخ)

امكانية صرف وايداع نقدية محاسبة المرضى ومندوبين الجهات الخارجية (حسابات)

امكانية عمل التقارير الاحصائية وطباعتها (الاحصائيات)

الاطلاع على حساب الدرج والحسابات الاخرى (جرد يومي - اسبوعي - شهري - سنوي ... الخ)

القائمة الرئيسية

تراجع

حفظ

تعديل

إضافة

بعد الإنتهاء نضغط (حفظ) ونلاحظ ظهور المستخدم في قائمة المستخدمين على يسار النافذة .



نافذة إنشاء وتعديل صلاحيات المستخدمين:
من خلال هذه النافذة يمكنك إنشاء مستخدمين وتحديد صلاحيات كل مستخدم وتعديل بياناتهم وإنشاء مديرون ومشرفين للنظام

Users No.

admin
user
أحمد

كلمة المرور

كلمة مرور النوافذ الداخلية

كلمة المرور

أحمد

الصلاحيات

وقت آخر دخول

صلاحية مطلقة (للمشرفين ومديرون النظام)

رقم الفرع الممنح للمستخدم التعامل معه

All

في حالة اختيار الكل سيتم تسجيل المرضى في الفرع الرئيسي رقم 1

تسجيل الحضور والانصراف

وقت بداية العمل للمستخدم

09:00:00 AM

وقت انتهاء العمل للمستخدم

05:00:00 PM

هل توجد فترة راحة للموظف

☒

زمن فترة الراحة بالساعات والدقائق

01:00

صلاحية محدودة (لمستخدمين النظام)

إضافة وتعديل بيانات المرضى (طباعة وصل - طباعة بار كود)

إدخال وتعديل نتائج تحاليل المرضى

مراجعة وتعديل نتائج تحاليل المرضى

طباعة نتائج المرضى (عمل تاريخ مرضى وطباعة - طباعة طرف ... الخ)

عدم طباعة نتائج المرضى في حالة وجود باقي حساب

صلاحية تسليم نتائج المرضى

حد الخصم المسموح للمستخدم اعطاء للمريض

% 10

طباعة ورقة العمل و Log

صلاحية حذف المرضى

تعديل في بيانات النظام والاعدادات مثل (بيانات التحاليل والقيم الطبيعية - الباركود - الوحدات ... الخ)

امكانية صرف وايداع نقدية محاسبية المرضى ومندوبين الجهات الخارجية (حسابات)

امكانية عمل التقارير الاحصائية وطباعتها (الاحصائيات)

الاطلاع على حساب الدرج والخصومات الاخرى (جرد يومي - اسبوعي - شهري - سنوي الخ)

القائمة الرئيسية

حذف

حفظ

تعديل

إضافة

عند تسجيل الدخول بالمستخدم الجديد تكون صلاحياته محددة كما تم إدخالها ، وعند محاولة الدخول في عنصر غير مصرح له تظهر الرسالة الآتية (أنت لا تملك الصلاحية لهذا العمل راجع مدير النظام) كما هو موضح .



من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

ادخال وتعديل التحاليل والقيم الطبيعية واختيار الوحدات والمجموعات والباكود الخاص بهم
ادخال التعليقات على نتائج التحاليل والمضادات الحيوية والمجموعات الخاصة بالمعمل وأسعارها
ادخال الجهات المتعامل معها (إحالة - مستقل - تعاقدات) وتحديد الاسعار الخاصة بهم
ادخال بيانات اجهزة ومعدات المعمل ومتابعة حالتها والصيانة الدورية وتاريخ المعايرة

SQL SERVER

User Name أحمد Last Login This first login for you SQL DATABASE Today Wednesday, 10-Aug-2016 10:23 AM

من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

تعديل اعدادات النظام الاساسية (وقت التسليم ، الطابعة المخصصة للباركود ، رقم الفرع)
تعديل بيانات السيرفر (اسم السيرفر وتسجيل الدخول واسم قاعدة البيانات)
عمل نسخة احتياطية من قاعدة بيانات النظام او استرجاع نسخة سابقة
تحديث قاعدة البيانات وملفات البرنامج للتوافق مع النسخ الحديثة من البرنامج

SQL SERVER

User Name أحمد Last Login This first login for you SQL DATABASE Today Wednesday, 10-Aug-2016 10:24 AM

2-4 تعديل بيانات وصلاحيات المستخدمين

لتعديل بيانات وصلاحيات المستخدمين نضغط على أيقونة **User**

ثم نقوم بالضغط على زر (إنشاء مستخدمين)

عند الضغط على زر (إنشاء مستخدمين) يطلب البرنامج كلمة مرور النوافذ الداخلية نقوم بإدخال كلمة المرور (123) أو كلمة المرور الخاصة بالمستخدم في حالة قام المستخدم بتغييرها



نحدد المستخدم المراد تعديل بياناته أو صلاحياته من قائمة المستخدمين على يسار النافذة ثم نقوم بالضغط على زر (تعديل) ونقوم بالتعديل المطلوب ثم نضغط (حفظ)

نافذة انشاء وتعديل صلاحيات المستخدمين:

من خلال هذه النافذة يمكنك انشاء مستخدمين وتحديد صلاحيات كل مستخدم وتعديل بياناتهم وانشاء مديرون ومشرفين للنظام

Users No. 3

- admin
- user
- أحمد

كلمة مرور النوافذ الداخلية

كلمة المرور

اسم المستخدم

أحمد

وقت آخر دخول

Wednesday, 10 Aug 2016 10:22 AM

الصلاحيات

صلاحية مطلقة (للمشرفين ومديرون النظام)

رقم الفرع المتاح للمستخدم التعامل معه **All**

في حالة اختيار الكل سيتم تسجيل المرضى في الفرع الرئيسي رقم 1

تسجيل الحضور والانصراف

وقت بداية العمل للمستخدم

09:00:00 AM

وقت انتهاء العمل للمستخدم

05:00:00 PM

هل توجد فترة راحة للموظف ☒

زمن فترة الراحة بالساعات والدقائق

01:00

صلاحية محدودة (للمستخدمين النظام)

- ☒ إضافة وتعديل بيانات المرضى (طباعة وصل - طباعة بار كود)
- ☒ ادخال وتعديل نتائج تحاليل المرضى
- ☒ مراجعة وتعديل نتائج تحاليل المرضى
- ☒ طباعة نتائج المرضى (عمل تاريخ مرضى وطباعة - طباعة ظرف ... الخ)
- ☒ عدم طباعة نتائج المرضى في حالة وجود باقى حساب
- ☒ صلاحية تسليم نتائج المرضى
- ☒ حد الخصم المسموح للمستخدم اعطائه للمرضى % 10
- ☒ طباعة ورقة العمل و Log
- ☐ صلاحية حذف المرضى
- ☐ تعديل في بيانات النظام والاعدادات مثل (بيانات التحاليل والقيم الطبيعية - الباركود - الوحدات ... الخ)
- ☐ امكانية صرف وايداع نقدية محاسبة المرضى ومندوبين الجهات الخارجية (حسابات)
- ☐ امكانية عمل التقارير الاحصائية وطباعتها (الاحصائيات)
- ☐ الاطلاع على حساب الدرج والحسابات الاخرى (جرد يومي - اسبوعى - شهري - سنوى ... الخ)

القائمة الرئيسية

حذف

حفظ

تعديل

إضافة

3-4 تسجيل الحضور والإنصراف لمعرفة حركة المستخدمين فى الدخول والخروج من النظام

لمتابعة حركة المستخدمين فى الدخول والخروج من النظام ومتابعة أوقات العمل ومعرفة الوقت الإضافى للمستخدم والتأخير ، يتم استخدام نظام الحضور والإنصراف وفترة الراحة لكل مستخدم ، حيث يقوم المستخدم بتسجيل الحضور عند بدء العمل على البرنامج وتسجيل فترة الراحة – إن وجدت – كما يقوم بتسجيل إنصراف عند انتهاء دوام العمل . كما هو موضح كالآتى :



The image shows a login window titled "RealLab system login". It features a green header bar with the title. Below the header, there are two input fields: "User Name" and "Password". The "User Name" field is currently filled with a blue bar. Below these fields, there are two checkboxes: "Show password characters" and "Remember Login". At the bottom of the window, there is a yellow section containing the "real lab" logo, which includes the text "for lab service". To the right of the logo are two buttons: "Sign in" and "Exit". At the very bottom of the yellow section, it says "SQL Server Database".

RealLab system login

User Name

Password

☐ Show password characters / ☐ Remember Login





SQL Server Database

lab
for lab service




يقوم المستخدم بعد ذلك بتسجيل حضور وبعد الانتهاء من العمل يقوم بتسجيل انصراف كما هو موضح

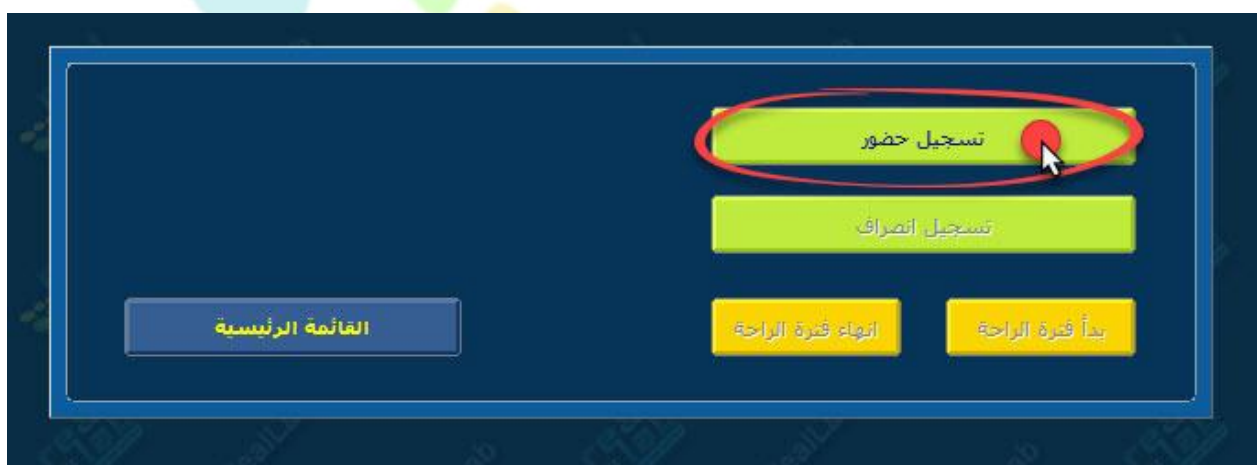

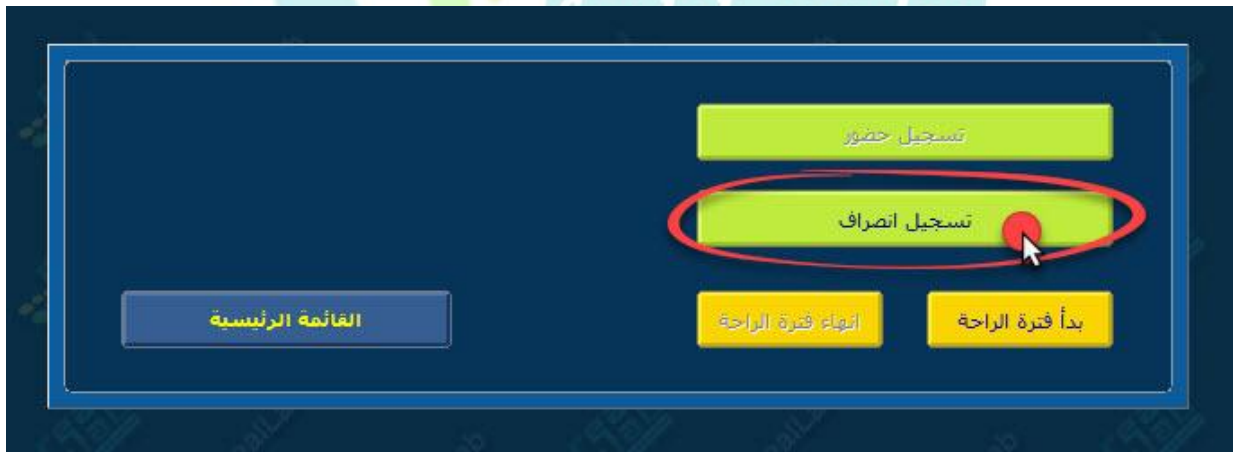

يمكن لمدير النظام فقط الإطلاع على أوقات دخول وخروج المستخدمين ومعرفة الوقت الإضافي والتأخير لكل مستخدم .

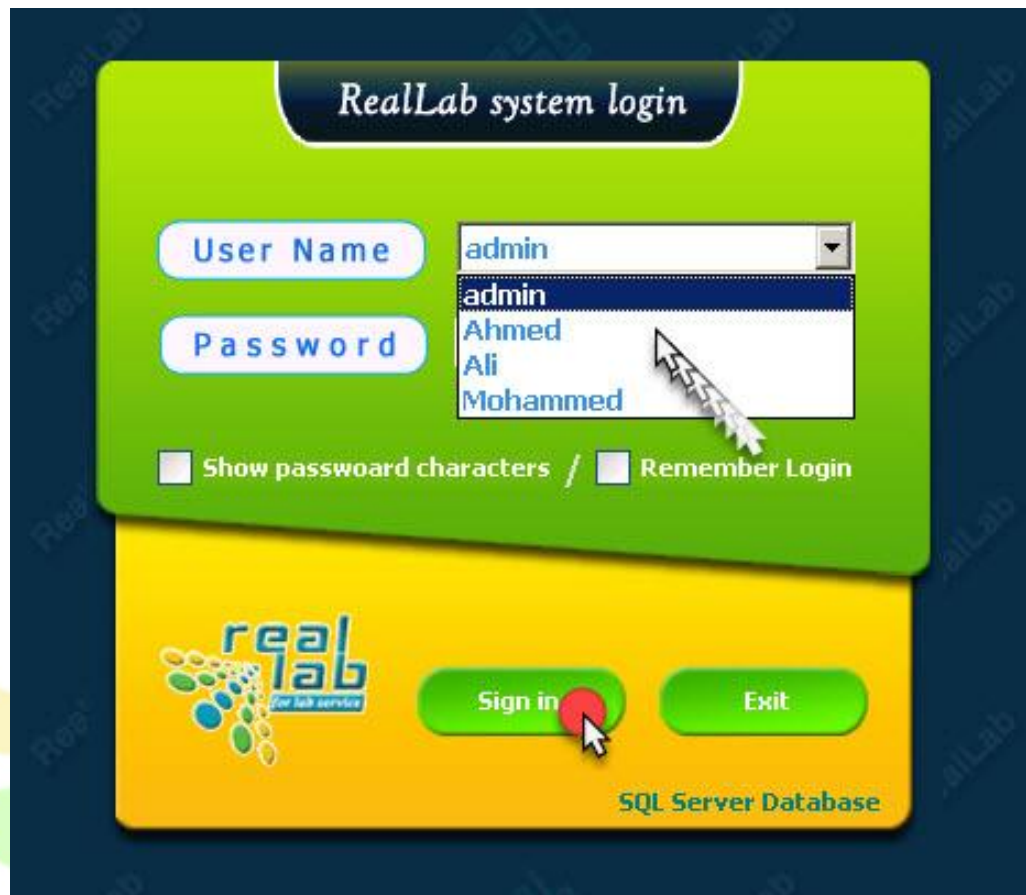

for lab service







5- الإحصائيات ومتابعة أداء المعمل Statistics

Real Lab System

1- الاحصائيات المختلفة على المرضى

2- الاحصائيات المختلفة على التحاليل

3 – أمثلة متنوعة على الإحصائيات المتاحة

عمل إحصائيات لعدد المرضى خلال فترة زمنية معينة وتصنيفهم حسب الجنس وجهة الإحالة ونوع الحساب .

عمل إحصائيات على التحاليل وعددها وتصنيفهم .

عمل إحصائيات على العينات المرسلة للخارج حسب الفترات الزمنية والمختبرات المرسل إليها .


عمل إحصائيات لمعرفة الطاقة الإنتاجية للمستخدمين حسب الأعمال الموكلة إليهم .

1-5 الإحصائيات ومتابعة أداء المعمل :-

يمكن عمل إحصائيات لعدد المرضى خلال فترة زمنية معينة وتصنيفهم حسب الجنس وجهة الإحالة ونوع الحساب كما يمكن عمل إحصائيات على التحاليل وعددها وتصنيفهم ، وعمل إحصائيات على العينات المرسله للخارج حسب الفترات الزمنية والمختبرات المرسل إليها العينات .

كما يمكن عمل إحصائيات لمعرفة الطاقة الإنتاجية للمستخدمين حسب الأعمال الموكلة إليهم .

نقوم بالضغط على أيقونة **Statistics** كما هو موضح ونقوم باختيار نوع الإحصائية المراد عملها

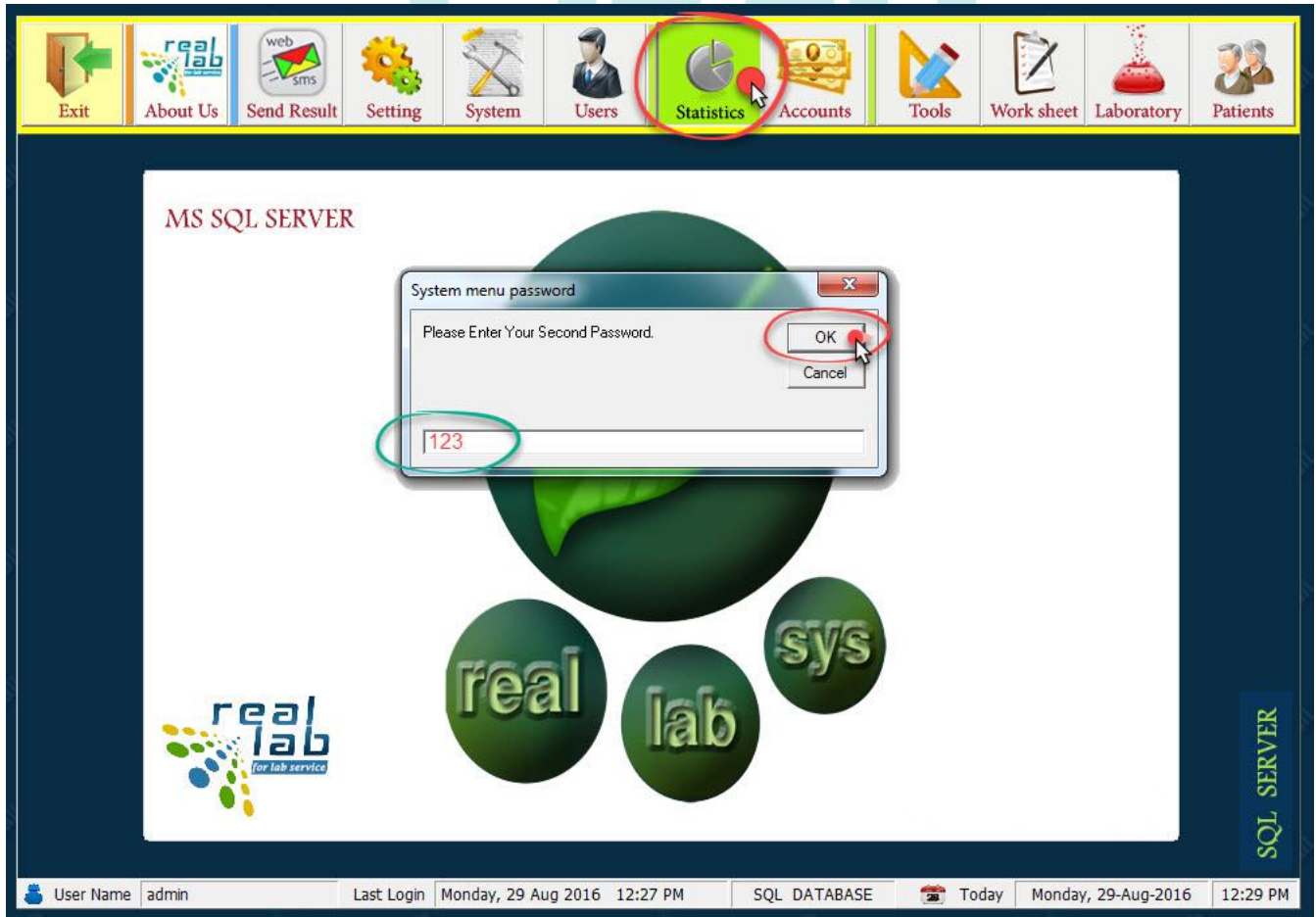

Exit

About Us

Send Result

Setting

System

Users

Statistics

Accounts

Tools

Work sheet

Laboratory

Patients



من خلال هذه النافذة يمكنك عمل الأتي:

عمل احصائيات لعدد المرضى في فترات زمنية وتصنيفهم حسب الجنس وجهة الإحالة وطريقة الحساب

عمل احصائيات لعدد عينات التحاليل وتصنيفهم حسب التحليل أو المجموعة او جهة الاحالة

عمل احصائيات للعينات المرسله للخارج حسب الفترات الزمنية والمختبرات المرسل إليها العينات

عمل احصائيات لمعرفة الطاقة الانتاجية للمستخدمين حسب الأعمال الموكلة إليهم



احصائيات خاصة بلغرض المعمل



احصائيات وفقاً لعدد التحاليل



احصائيات وفقاً لعدد المرضى



متابعة ومراقبة النتائج



احصائيات تقييم ومتابعة العمل



احصائيات العينات المرسله

SQL SERVER

User Name admin

Last Login Monday, 29 Aug 2016 12:27 PM

SQL DATABASE

Today Monday, 29-Aug-2016 12:33 PM



نافذة الإحصائيات الخاصة بالمرضى:

من خلال هذه النافذة يمكنك معرفة اجمالي عدد المرضى الذين توافدوا على المعمل وتصنيفهم في فترات زمنية مختلفة وعمل فرز وتجميع لهم بالجنس ونوع الحساب وجهة الاحالة



جهات الإحالة

08

في الشهر

2016

في سنة

31-Aug-2016

حتى

01-Aug-2016

في الفترة من

الاحصاء حسب الفترة المحددة



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بجنس المريض)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بنوع الحساب)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بجهة الإحالة)



احصاء اجمالي عدد المرضى لجهة الإحالة المحددة فقط

الاحصاء حسب الشهر المحدد



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بأيام الشهر)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بجنس المريض)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بنوع الحساب)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بجهة الإحالة)



احصاء اجمالي عدد المرضى لجهة الإحالة المحددة فقط

الاحصاء حسب السنة المحددة



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بشهور السنة)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بجنس المريض)



احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بنوع الحساب)




احصاء اجمالي عدد المرضى (فرز بجهة الإحالة)




احصاء اجمالي عدد المرضى لجهة الإحالة المحددة فقط


النافذة الرئيسية

2-5 مثال على إحصائية على عدد المرضى في سنة محددة / إحصائية حسب جنس المريض


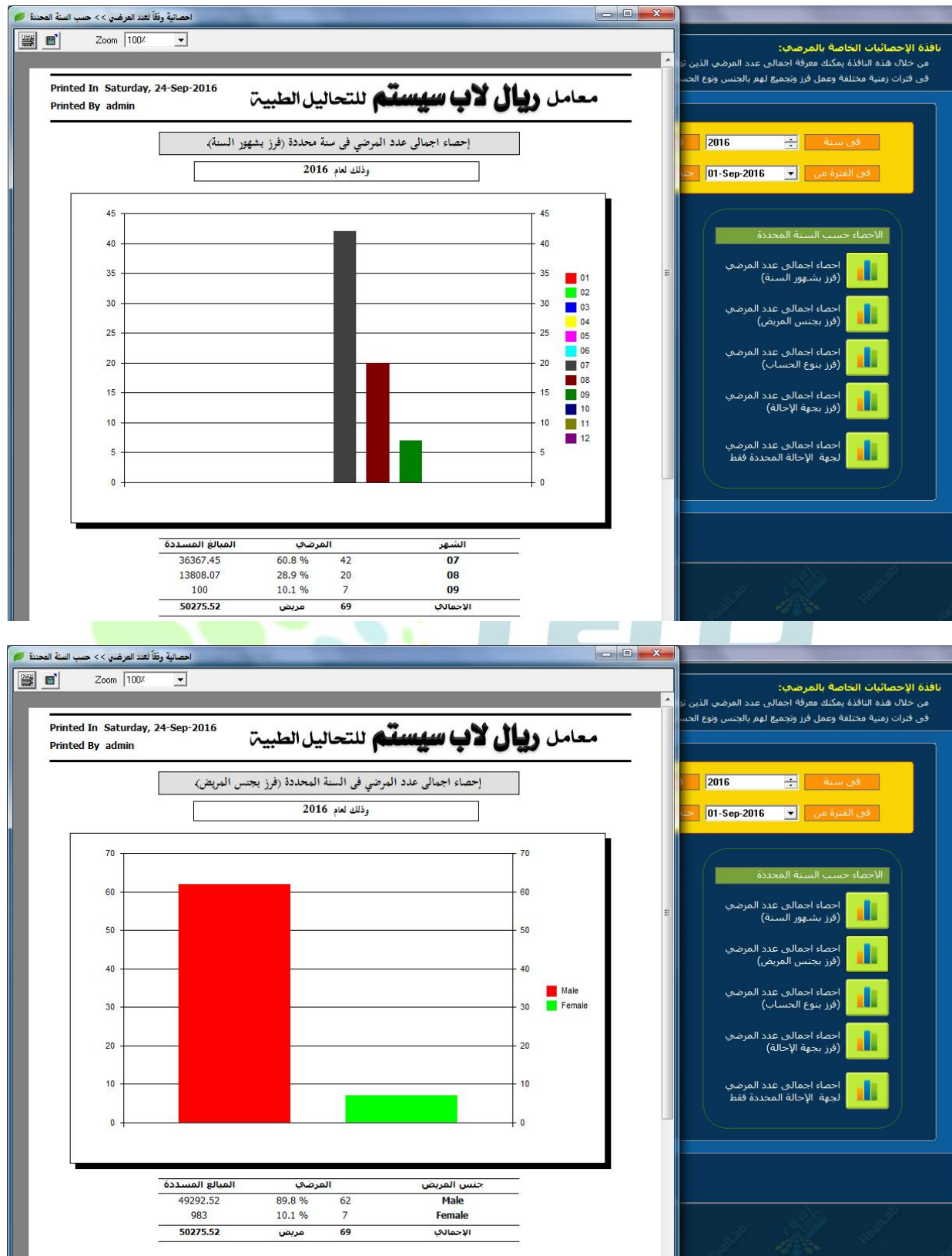


3-5 مثال على إحصائية على عدد المرضى في شهر محدد

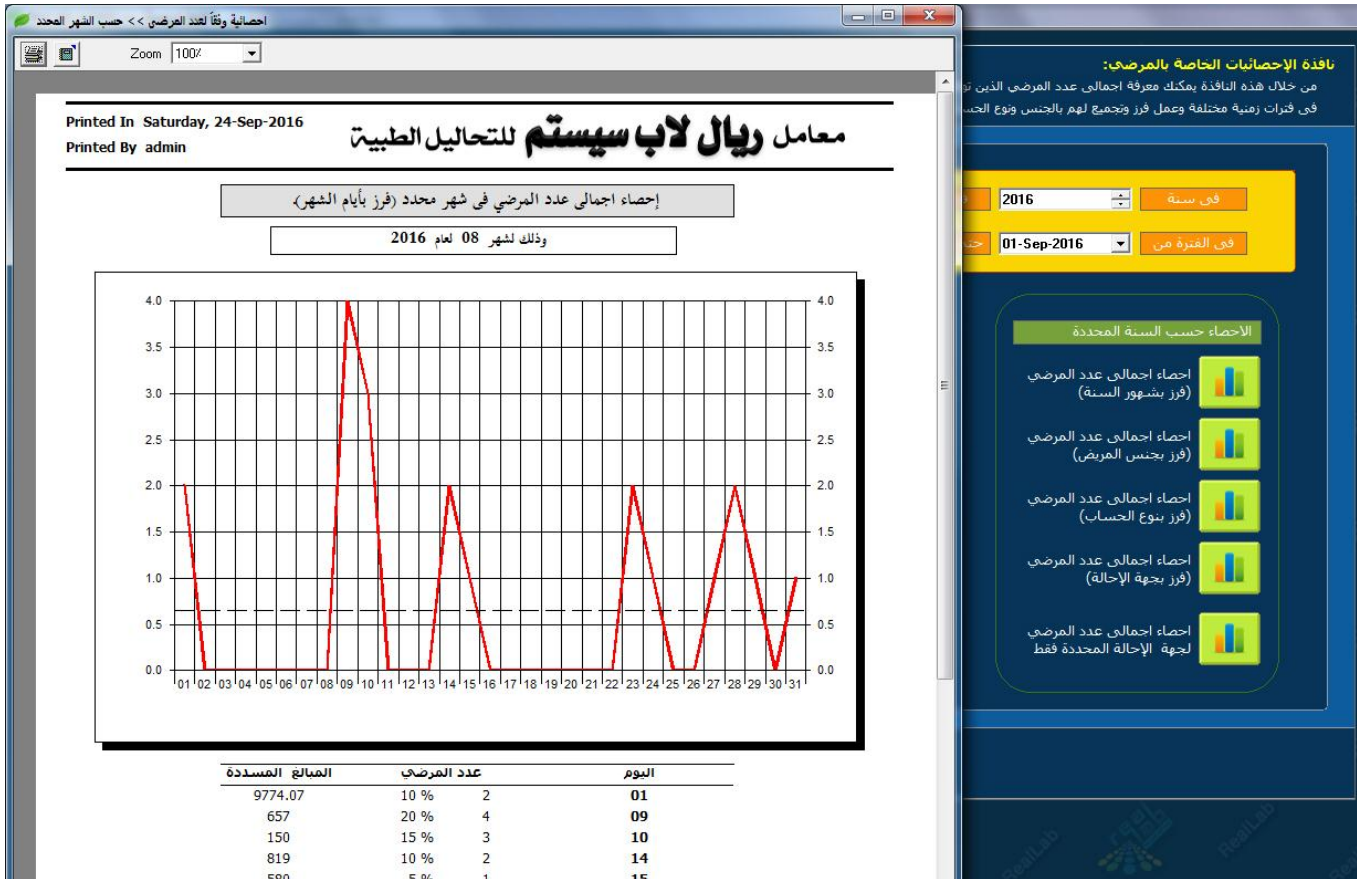

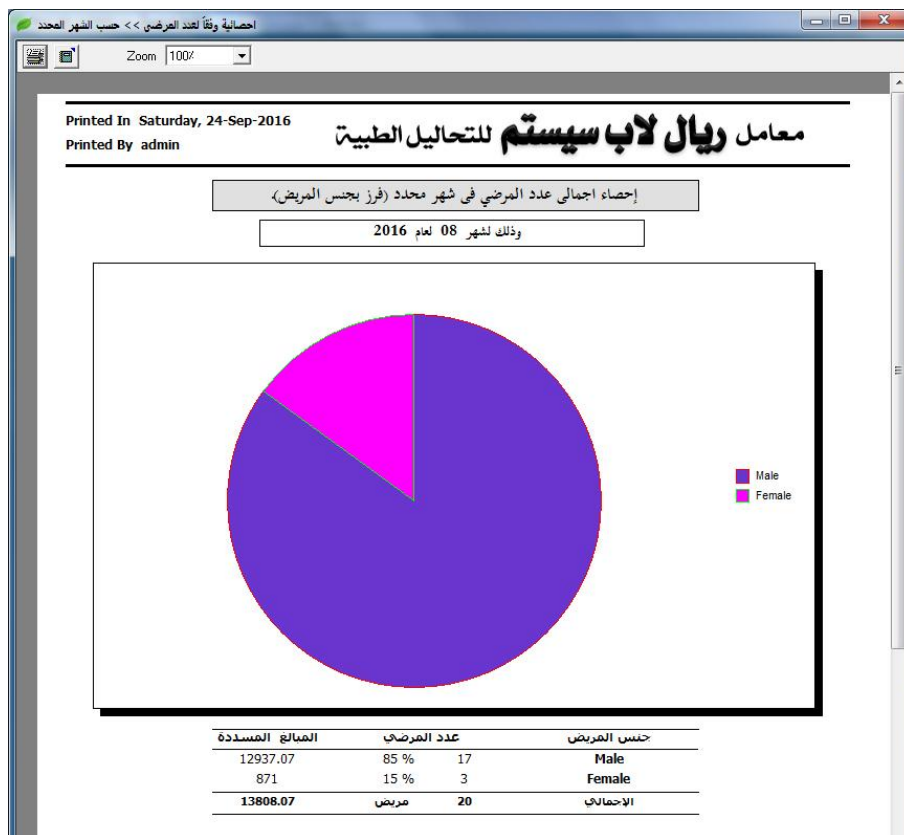

4-5 مثال على إحصائية على معدل طلب تحاليل مجموعة / إحصائية على عدد عينات التحاليل خلال سنة

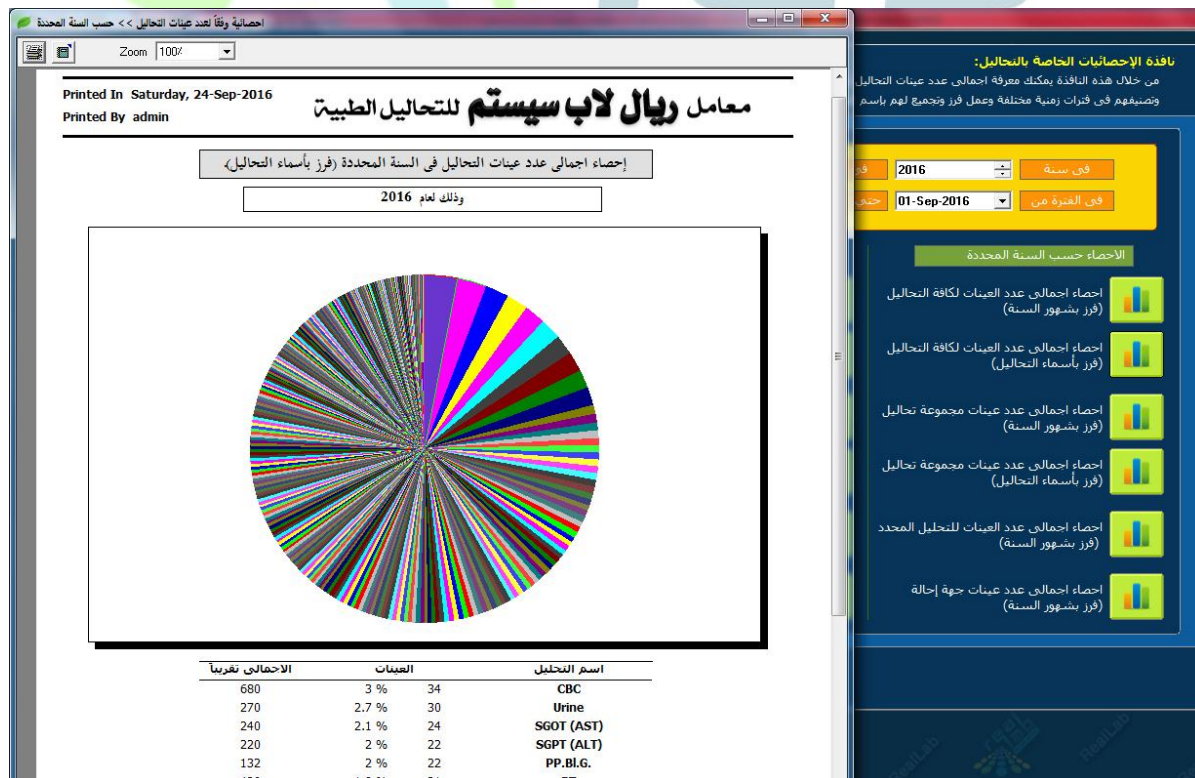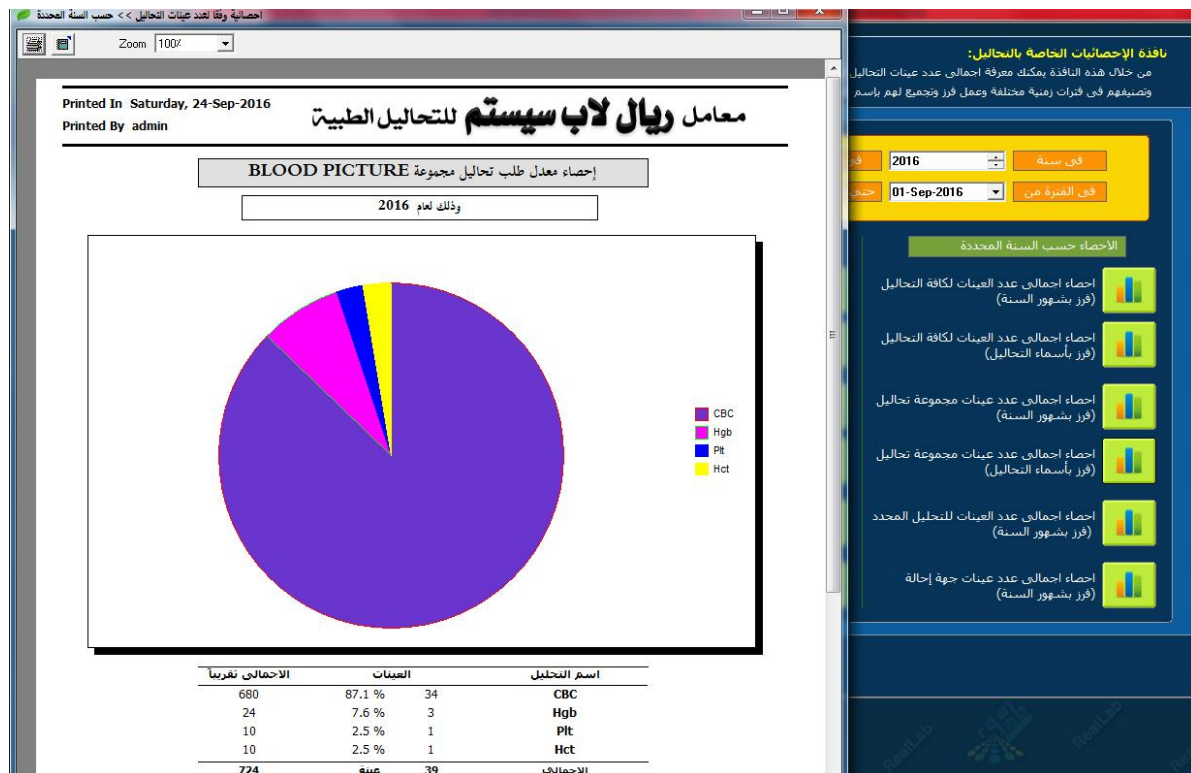



6 – الجرد وحساب المعمل

Real Lab System

المعروض فى هذا الجزء :-

- 1 - الجرد وحساب المعمل
 - 2 - عمل جرد خلال فترة زمنية معينة
 - 3 - عمل جرد على العينات المرسلة
 - 4 - عمل جرد حساب على طبيب معين
 - 5 - عمل جرد حساب لجهة تعاقد
 - 6 - عمل جرد على فرع ضمن عدة فروع مرتبطة معاً (نظام الفروع للمعامل)
 - 8 - تصفية حساب العينات المرسلة
- معرفة أرباح المعمل وعمل جرد يومى أو أسبوعى أو شهرى أو سنوى أو حسب فترات مختلفة .
- معرفة حساب المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة فى فترات زمنية محددة .
- متابعة العينات المرسلة للخارج وحساباتها .
- كيفية عمل صرف وإيداع نقدية للجهات المخصصة لذلك أو لجهات أخرى .

داخل هذا الجزء :-

- 1 - الجرد وحساب المعمل
- 2 - عمل جرد خلال فترة زمنية معينة
- 3 - عمل جرد على العينات المرسلة
- 4 - عمل جرد حساب على طبيب معين
- 5 - عمل جرد حساب لجهة تعاقد
- 6 - عمل جرد على فرع ضمن عدة فروع مرتبطة معاً (نظام الفروع للمعامل)
- 8 - تصفية حساب العينات المرسلة

6 - 1 الجرد وحساب المعمل

يمكن معرفة أرباح المعمل وعمل جرد يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي أو حسب فترات مختلفة ، كما يمكن معرفة حساب المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة في فترات زمنية محددة ومتابعة العينات المرسله للخارج وحساباتها ، ويمكن عمل صرف وإيداع نقدية للجهات المخصصة لذلك أو لجهات أخرى .

يتم ذلك عن طريق الضغط على أيقونة **Accounts** فتظهر لنا النافذة الموضحة .



نقوم بالضغط على زر (الجرد وحساب الدرج) لمعرفة إجمالي عينات المرضى وقيمة الخصومات وما تم تحصيله وما لم يحصل ، والمتاح في الخزينة ، وصافي الربح بعد التحصيل والتسديد .

عند الضغط على زر (الجرد وحساب الدرج) يطلب البرنامج كلمة مرور النوافذ الداخلية
نقوم بإدخال كلمة المرور (123) أو كلمة المرور الخاصة بالمستخدم في حالة قام المستخدم
بتغييرها .



بعد إدخال كلمة المرور تظهر لنا النافذة الموضحة

نافذة حساب الدرج والحدر التومي والشهري:

من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرغ وصافي الربح لوقت زمنية محددة
كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة

الإجمالي بعد الخصم	قيمة الخصومات	إجمالي عيانات المرضى
0	+	= 0
ما تم تحصيله		
0	-	
لم يحصل		
0		

باقي لم يسدد	ما تم سداده	العيان المرسله للخارج
0	+	= 0

مصرفات نفديه	توريدات نفديه
0	0

* **المناخ في الحرينه**

0

عمولات ونسب	باقي للمرضى
0	0

* **صافي الربح بعد التحصيل والتسديد**

0

Branch No. All

عرض

25-Jul-2016

من

الى

25-Jul-2016

المستخدمين

مجموع

مفصل

عيان مرسله

مجموع

مفصل

مفصل

الطبيب المعالج

مجموع

مفصل

مفصل بالاسعار

مفصل بالناتج

جهة الإحالة

مجموع

مفصل

مفصل بالاسعار

مفصل بالناتج

نوع الحساب

Individual

مجموع

مفصل

مفصل بالاسعار

مفصل بالناتج

[القائمة الرئيسية](#)

2-6 فى حالة جهاز واحد أو عدة أجهزة متصلة معا على قاعدة بيانات واحدة وكل المستخدمين على نفس الفرع .

نحدد الـ **Branch no** من أعلى النافذة كما هو موضح

ونختار **All** ثم نقوم بتحديد الفترة الزمنية المراد عرض الحساب خلالها

نقوم بالضغط على زر (عرض) فيقوم البرنامج بعرض إجمالى حساب عينات المرضى وقيمة

الخصومات وصافى الربح بعد التحصيل والتسديد .

- لعمل جرد على مستخدم معين أو جهة إحالة معينة أو طبيب معالج معين أو على العينات

المرسلة يتم تحديد العنصر المطلوب على يمين النافذة وإختيار نوع التقرير المطلوب

(مفصل بالنتائج - مفصل بالأسعار - مفصل - مجمع) .

نافذة حساب الدرج والجرد اليومي والشهري:

من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرج وصافى الربح لليوم أو فترة زمنية محددة كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة

الإجمالي بعد الخصم 39644.55 ماتم تحصيله 36367.45 لم يحصل 3277.1	+	قيمة الخصومات 341.95	=	إجمالي عينات المرضى 39986.5
باقى لم يسدد 200	+	ماتم سداذه 1800	=	العينات المرسلة للخارج 2000
مصرفوات نقدية 0	+	توريدات نقدية 0		
* 34567.45 الصاح فى الخزينة				
عمولات ونسب 425.13		باقى للمرضى 0		
* 37219.42 صافى الربح بعد التحصيل والتسديد				

Branch No. All

عرض 10-Jul-2016 من 25-Jul-2016 الى

المستخدمين مجمع مفصل

عينات مرسلة مجمع مفصل

الطبيب المعالج مفصل مفصل بالنتائج

جهة الإحالة مجمع مفصل مفصل بالأسعار مفصل بالنتائج

نوع الحساب Individual مجمع مفصل مفصل بالأسعار مفصل بالنتائج

القائمة الرئيسية

3-6 فى حالة عدة أجهزة متصلة معا على قاعدة بيانات واحدة وكل مستخدم برقم فرع مختلف (نظام الفروع للمعامل) .

نحدد الـ Branch no من أعلى النافذة كما هو موضح

ونختار رقم الفرع المراد عرضه ثم نقوم بتحديد الفترة الزمنية المراد عرض الحساب خلالها
نقوم بالضغط على زر (عرض) فيقوم البرنامج بعرض إجمالى حساب عينات المرضى وقيمة

الخصومات وصافى الربح بعد التحصيل والتسديد .

- لعمل جرد على مستخدم معين أو جهة إحالة معينة أو طبيب معالج معين أو على العينات

المرسلة يتم تحديد العنصر المطلوب على يمين النافذة وإختيار نوع التقرير المطلوب

(مفصل بالنتائج - مفصل بالأسعار - مفصل - مجمع) .

نافذة حساب الدرج والجرد اليومي والشهري:

من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرج وصافى الربح لليوم أو فترة زمنية محددة كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة

Branch No. All 16 16

عرض

المستخدمين

مجمع مفصل

عينات مرسلة

مجمع مفصل

الطبيب المعالج

مجمع مفصل بالنتائج

جهة الإحالة

مجمع مفصل بالنتائج

نوع الحساب

Individual

مجمع مفصل بالنتائج

إجمالي بعد الخصم 0

قيمة الخصومات 0

إجمالي عينات المرضى 0

ماتم تحصيله 0

لم يتحصل 0

باقى لم يسدد 0

ماتم سداذه 0

العينات المرسلة للخارج 0

مصرفات نقدية 0

توريدات نقدية 0

الصالح فى الخزينة

عمولات ونسب 0

باقى للمرضى 0

صافى الربح بعد التحصيل والتسديد

الرئيسية

لعرض المبالغ بالتفصيل نقوم بالضغط على (إجمالى عينات المرضى) كما هو موضح .

نافذة حساب الدرج والجرد اليومي والشهري:
من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرج وصافى الربح لليوم أو فترة زمنية محددة
كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الاخرى ونسب جهات الإحالة

Branch No. All

عرض 31-Jul-2016 من 21-Aug-2016 إلى

المستخدمين

مجموع مفصل

عينات مرسله

مجموع مفصل

الطبيب المعالج

مجموع مفصل

مفصل بالاسعار

جهة الإحالة

مجموع مفصل

مفصل بالاسعار

نوع الحساب

Individual

مجموع مفصل

مفصل بالاسعار

مفصل بالتالي

القائمة الرئيسية

الإجمالي بعد الخصم 4302.65 + قيمة الخصومات 110.35 = الإجمالي عينات المرضى 4413

ماتم تحصيله 0 - لم يتحصل 4302.65

باقى لم يسدد 0 + ماتم سداؤه 0 = العينات المرسله للخارج 0

مصرفوات نفديه 0 + توريدات نفديه 0

0 المناج فى التجربة

عمولات ونسب 1048.33 باقى للمرضى 0

3254.32 صافى الربح بعد التحصيل والتسديد

كشف حساب المرضى

Zoom 100%

كشف حساب اجمالي عينات المرضى فى الفترة من 21/08/2016 الى 31/07/2016

تاريخ الطلب	كود المريض	اسم المريض	الإجمالي	قيمة الخصم	بعد الخصم	المدفوع	باقى الحساب
01/08/2016	1016080110019	أحمد جمال عبد المنعم	58	2.9	55.1	0	55.1
01/08/2016	1016080110033	أحمد جمال	2149	107.45	2041.55	0	2041.55
09/08/2016	1016080910015	عائى السيد محمد	533	0	533	0	533
09/08/2016	1016080910022	منى محمد عبد الله	52	0	52	0	52
09/08/2016	1016080910039	أحمد على محمد	52	0	52	0	52
09/08/2016	1016080910046	أسماء محمد محمد	20	0	20	0	20
10/08/2016	1016081010011	محمد على عبد الله	50	0	50	0	50
10/08/2016	1016081010028	محمد على أحمد	50	0	50	0	50
10/08/2016	1016081010035	السيد أحمد محمود	50	0	50	0	50
14/08/2016	1016081410019	امل محمد على	799	0	799	0	799
14/08/2016	1016081410026	عائى السيد محمد	20	0	20	0	20
15/08/2016	1016081510016	أحمد على محمد	580	0	580	0	580
			4302.65	0	4302.65	110.35	4413

Branch No. All

عرض 31-Jul-2016 من 21-Aug-2016 إلى

المستخدمين

مجموع مفصل

عينات مرسله

مجموع مفصل

الطبيب المعالج

مجموع مفصل

مفصل بالاسعار

جهة الإحالة

مجموع مفصل

مفصل بالاسعار

نوع الحساب

Individual

مجموع مفصل

مفصل بالتالي

3-6 مثال على عمل جرد على طبيب معين

نافذة حساب الدرج والجرد اليومي والشهري:
من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرج وصافي الربح لليوم أو فترة زمنية محددة كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة

الاجمالي بعد الخصم 67357 + **قيمة الخصومات** 0 = **اجمالي عيانات المرضى** 67357

ماتم تحصيله 160 - **لم يحصل** 66254

باقي لم يسدد 0 + **ماتم سداده** 0 = **العيانات المرسلة للخارج** 0

مصرفات تغذية 0 + **توريدات تغذية** 0

المناخ في الخربة 160

عمولات ونسب 0 + **باقي للمرضي** 0

صافي الربح بعد التحصيل والتسديد 67357

الفائمة الرئيسية

Branch No. All

عرض 06-Mar-2014 من 06-Mar-2015 الى

المستخدمين **مجمع** **مفصل**

عيانات مرسلة **مجمع** **مفصل**

الطبيب المعالج **مجمع** **مفصل** **مفصل بالاسعار**

جهة الإحالة **مجمع** **مفصل** **مفصل بالاسعار**

نوع الحساب Individual **مجمع** **مفصل** **مفصل بالاسعار**

نافذة حساب الدرج والجرد اليومي والشهري:
من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرج وصافي الربح لليوم أو فترة زمنية محددة كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة

الاجمالي بعد الخصم 67357 + **قيمة الخصومات** 0 = **اجمالي عيانات المرضى** 67357

ماتم تحصيله 160 - **لم يحصل** 66254

باقي لم يسدد 0 + **ماتم سداده** 0 = **العيانات المرسلة للخارج** 0

مصرفات تغذية 0 + **توريدات تغذية** 0

المناخ في الخربة 160

عمولات ونسب 0 + **باقي للمرضي** 0

صافي الربح بعد التحصيل والتسديد 67357

الفائمة الرئيسية

Branch No. All

عرض 06-Mar-2014 من 06-Mar-2015 الى

المستخدمين **مجمع** **مفصل**

عيانات مرسلة **مجمع** **مفصل**

الطبيب المعالج **مجمع** **مفصل** **مفصل بالاسعار**

جهة الإحالة **مجمع** **مفصل** **مفصل بالاسعار**

نوع الحساب Individual **مجمع** **مفصل** **مفصل بالاسعار**

نافذة حساب الدرج والجرد اليومي والشهري:
 من خلال هذه النافذة يمكن معرفة حساب الدرج وصافي الربح لليوم أو فترة زمنية محددة
 كما يمكنك معرفة حسابات المختبرات الأخرى ونسب جهات الإحالة

الإجمالي بعد الخصم

67357

+

قيمة الخصومات

0

=

إجمالي عيinat المرضى

67357

ماتم تحصيله

160

-

لم يحصل

66254

باقى لم يسدد

0

+

ماتم سداده

0

=

العيinat المرسلة للخارج

0

مصرفوات نقدية

0

+

توريدات نقدية

0

160

الصاح فى الجرينة

عمولات ونسب

0

+

باقى للمرضى

0

67357

صافى الربح بعد التحصيل والنسب

Branch No. All

عرض

06-Mar-2014 من

06-Mar-2015 الى

المستخدمين

مجمع

مفصل

عيinat مرسلة

مجمع

مفصل

الطبيب المعالج أحمد العربي

مجمع

مفصل

مفصل بالاسعار

جهة الإحالة

مجمع

مفصل

مفصل بالاسعار

نوع الحساب

Individual

مجمع

مفصل

مفصل بالاسعار

الرئيسية

كشف حساب مرضى مفصل لطبيب معالج محدد

Zoom 100%

نافذة

من

كما

كشف حساب إجمالي المرضى المصحولون من أحمد العربي فى الفترة من 06/03/2014 الى 06/03/2015

تاريخ الطلب	كود المريض	اسم المريض	الإجمالي	قيمة الخصم	بعد الخصم	المدفوع	باقى الحساب
27/03/2014	1514032710145	عفاف البيومي	38	0	38	0	38
		Creatinine (Serum)	15				
		Billirubin Total	15				
		R.B.O.	8				
02/04/2014	1414040210197	أحمد يوسف	45	0	45	0	45
		CBC	30				
		Creatinine (Serum)	15				
03/04/2014	1514040310078	عفاف البيومي	38	0	38	0	38
		Creatinine (Serum)	15				
		Billirubin Total	15				
		R.B.O.	8				
09/04/2014	1414040910219	محمود الشاطر	15	0	15	0	15
		Creatinine (Serum)	15				
14/04/2014	1214041410066	محمود مصطفى الشاطر	30	0	30	0	30
		Creatinine (Serum)	15				
		Uric Acid	15				
		الإجمالي	166	0	166	0	166

نافذة

من

كما

كشف حساب مرضي لطبيب معالج محدد

Zoom 100%

كشف حساب اجمالي العينات المخولة من أحمد العربي في الفترة من 06/03/2014 الى 06/03/2015

تاريخ الطلب	كود المريض	اسم المريض	الاجمالي	قيمة الخصم	بعد الخصم	المدفوع	باقى الحساب
27/03/2014	1514032710145	عفاف البيومي	38	0	38	0	38
02/04/2014	1414040210197	أنصاف يوسف	45	0	45	0	45
03/04/2014	1514040310078	عفاف البيومي	38	0	38	0	38
09/04/2014	1414040910219	محمود الشاطر	15	0	15	0	15
14/04/2014	1214041410066	محمود مصطفي الشاطر	30	0	30	0	30
			166	0	166	0	166

for lab service

4-6 تصفية حساب العينات المرسله للخارج :-

لمتابعة العينات المرسله للخارج ومعرفة حساباتها والجهات المرسله إليها وهل تم سداد حسابها أم لا نقوم بالضغط على أيقونة **Accounts** ثم نقوم بالضغط على زر (العينات المرسله للخارج) كما هو موضح .

The screenshot displays the Real Lab software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Exit, About Us, Send Result, Setting, System, Users, Statistics, Accounts (highlighted with a red circle), Tools, Work sheet, Laboratory, and Patients. Below this, the main content area shows a large image of a stack of 100 Egyptian pounds. To the right of the image, there is a list of features in Arabic: "من خلال هذه النافذة يمكنك عمل التالي:" followed by "معرفة حساب الدرج وعمل جرد اسبوعى او شهري او سنوى او حسب فترات مختلفة", "معرفة حساب المختبرات الأخرى ونسب جهات الاحالة فى فترات زمنية محددة", "حسابات العينات المرسله للخارج ومتابعتها", and "صرف وايداع نقدية للجهات المخصصة لذلك او لجهات أخرى". Below the image and text, there are four buttons: "العينات المرسله للخارج" (highlighted with a red circle), "الجرد وحساب الدرج", "حساب شركات ومندوبين", and "صرف وايداع نقدية". On the right side of the interface, there is a vertical label "SQL SERVER". At the bottom, there is a status bar with fields for User Name (admin), Last Login (Tuesday, 26 Jul 2016 09:24 AM), SQL DATABASE, Today (Wednesday, 27-Jul-2016), and a clock showing 10:03 AM.

نحدد الفترة الزمنية المراد إظهار العينات خلالها ونضغط على زر (عرض)
تظهر التحاليل الغير مرسلة فى الفترة الزمنية التى تم تحديدها كما هو موضح .

نافذة حسابات العينات المرسلة للخارج
من خلال هذه النافذة يمكن معرفة العينات الواجب إرسالها للخارج وحساباتها ومعرفة حسابات المختبرات المتعامل معها

بحث بتاريخ الطلب: الكل ● الغير مرسل ●
03-Aug-2016 الى 27-Jul-2016 من

عدد العينات: 0
الباقي: 0
المدفوع: 0
الإجمالي: 0

عرض

Send	Paid	Cost	Lab. Name	Patient Name	Test Name	Request Date
☐	0	55	أوتولاب	إسلام محمد أحمد	Alpha Glucosidase in semen	27/07/2016
☐	0	140	توب لاب	أسماء على محمد	(Aminogram (plasma	27/07/2016
☐	0	20	أوتولاب	إسلام محمد أحمد	GGT	27/07/2016
☐	0	10	أوتولاب	رضا محمد أحمد	.Alk. Ph	03/08/2016

خمس نتيجة البحث للجهة المحددة:

أرسلت: ☐ المدفوع: 0 سعر التحليل: 0 اسم المعمل أو الجهة:

ترسل إلى

العائمة الرئيسية

تحليل لا يرسل

تحليل يرسل للخارج

حساب عينات مدفوع

عرض العينات التى لم ترسل

نختار إحدى العينات المرسلة عن طريق الضغط عليها فيقوم البرنامج بالتعرف على اسم المعمل المرسل إليه هذه العينة وعدد العينات الكلية المرسلة لهذا المعمل فى الفترة الزمنية التى تم تحديدها وإجمالي الحساب لهذا المعمل والمدفوع والباقي كما هو موضح .

نافذة حسابات العينات المرسلة للخارج

من خلال هذه النافذة يمكن معرفة العينات الواجب إرسالها للخارج وحساباتها ومعرفة حسابات المختبرات المتعامل معها

عدد العينات المرسلة للمعمل في الفترة الزمنية المحددة

☐ الكل ☐ الغير مرسل الى

أوتولاب **عدد العينات** **3** **الباقي** **85** **المدفوع** **0** **الإجمالي** **85**

Send	Paid	Cost	Lab. Name	Patient Name	Test Name	Request Date
☐	0	55	أوتولاب	إسلام محمد أحمد	Alpha Glucosidase in semen	27/07/2016
☐	0	140	توب لاب	أسماء على محمد	(Aminogram (plasma	27/07/2016
☐	0	20	أوتولاب	إسلام محمد أحمد	GGT	27/07/2016
☐	0	10	أوتولاب	رضا محمد أحمد	.Alk. Ph	03/08/2016

نقوم بالضغط على زر (ترسل إلى) وندخل المدفوع من سعر التحليل المرسل ونضغط (موافق) .
في حالة سداد كامل المبلغ نضغط على زر (خالص) .

نتبع الخطوة السابقة مع كافة التحاليل المراد إرسالها .

- لحصر تحاليل جهة معينة يمكن استخدام خاصية البحث لجهة معينة كما هو موضح وتظهر التحاليل المرسله للمعمل المحدد فقط .

نافذة حسابات العينات المرسله للخارج

من خلال هذه النافذة يمكن معرفة العينات الواجب ارسالها للخارج وحساباتها ومعرفة حسابات المختبرات المتعامل معها

بحث بتاريخ الطلب: الكل ☒ الغير مرسل ☐ الى

عدد العينات: 3 0 85 85

Send	Paid	Cost	Lab. Name	Patient Name	Test Name	Request Date
☒	55	55	أوتولاب	إسلام محمد أحمد	Alpha Glucosidase in semen	27/07/2016
☒	20	20	أوتولاب	إسلام محمد أحمد	GGT	27/07/2016
☒	10	10	أوتولاب	رضا محمد أحمد	.Alk. Ph	03/08/2016

حصر نتيجة البحث للجهة المحددة:

أرسلت: المدفوع: سعر التحليل: اسم المعمل أو الجهة:

نافذة حسابات العينات المرسلة للخارج

من خلال هذه النافذة يمكن معرفة العينات الواجب ارسالها للخارج وحساباتها
ومعرفة حسابات المختبرات المتعامل معها

Send	Paid	Cost	Lab. Name	Patient Name	Test Name	Request Date
☒	140	140	توب لاب	أسماء على محمد	(Aminogram (plasma	27/07/2016

حصر نتيجة البحث للجهة المحددة:



7 - تعديل إعدادات النظام الأساسية

Real Lab System

داخل هذا الجزء :-

المعروض في هذا الجزء :-

- التحكم في إعدادات النظام الأساسية والتعديل فيها وضبط إعدادات التقارير .
- إعدادات الإيصال وإعدادات الظرف وإعدادات الكارنية وإعدادات خادم قواعد البيانات
- ضبط الطابعات المستخدمة في الطباعة وعمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يوميا
- التحكم في ظهور الباركود واختيار نوع الحساب الافتراضي للنظام .

- 1 - إعدادات التقرير
- 2 - ضبط هوامش التقرير
- 3 - حجم الورق المستخدم في الطباعة
- 4 - طباعة رأس وذيل التقرير
- 5 - تعديل ألوان رأس وذيل التقرير
- 6 - ضبط الطابعات المخصصة للطباعة
- 7 - نوع الحساب الافتراضي للنظام

7- تعديل إعدادات النظام الأساسية

يمكن التحكم في إعدادات النظام الأساسية والتعديل فيها وضبط إعدادات التقارير وإعدادات الاتصال وإعدادات الظرف وإعدادات الكارنية وإعدادات خادم قواعد البيانات وضبط الطابعات المستخدمة في الطباعة وعمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يوميا والتحكم في ظهور الباركود واختيار نوع الحساب الافتراضي للنظام ، وسيتم عرض هذه النقاط بالتفصيل .

1-7 إعدادات التقارير

لضبط الإعدادات الخاصة بالتقرير نقوم بالضغط على أيقونة **Setting** ثم نقوم بالضغط على زر (إعدادات النظام) ونختار (إعدادات التقرير)
تظهر النافذة الموضحة .



نافذة إعدادات النظام:
من خلال هذه النافذة يمكنك تخصيص بعض مهام وبيانات النظام الرئيسية مثل رقم الفرع وقت استلام النتيجة الطباعات الرئيسية ، طباعة إيصال للمريض تلقائياً

إعدادات التقرير

إعدادات الإيصال

إعدادات الطرף

إعدادات الكارثية

إعدادات خادم قواعد البيانات

HP Officejet 6000 E609a Series
HP Officejet 6000 E609a Series
HP Officejet 6000 E609a Series
HP Officejet 6000 E609a Series

تحدد الطباعة المخصصة لطباعة الإقرارية
تحدد الطباعة المخصصة لطباعة الباركود
تحدد الطباعة المخصصة لطباعة الطرף
تحدد الطباعة المخصصة لطباعة الإيصال
تحدد الطباعة المخصصة لطباعة الكارثية

Individual
نوع الحساب الافتراضي للنظام

إدخال اسم المريض والطبيب المعالج باللغة الإنجليزية وباقى العناصر
في حالة ترك خانة جهة الاحالة فارغة يتم وضع herself, Himself حسب جنس المريض
حفظ الطبيب المعالج من نافذة الجهات الخارجية والمعامل وعدم حفظه تلقائياً عند ادخال المرضى
تمكين خاصية البحث عند ادخال اسم المريض في نافذة اضافة وتعديل بيانات المرضى
عدم وضع الألقاب تلقائياً عند تسجيل بيانات المرضى

طباعة التاريخ والوقت على باركود الانابيب
طباعة كود المعمل بدل كود المريض في تقرير النتائج واستكز الباركود

طباعة الباركود الخارجى الخاص بالملف
طباعة حساب المريض والباقي يد تاريخ الطباعة في تقرير النتيجة

مراجعة واكمال التحاليل بطريقة تلقائية
عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يومياً
Path D:\lab_data Check
D:\lab_data\Reallab_Backup
في حالة تفعيل الخاصية وعدم وجود المسار يتم الحفظ في المسار التالي

الحفظ الإعدادات

القائمة الرئيسية

طريقة فرز وتجميع التاريخ المرضى:

فرز وتجميع التاريخ المرضى حسب كود المعمل
فرز وتجميع التاريخ المرضى بإسم المريض

عدم طباعة رأس وذيل التقرير (استخدام ورق مطبوع)
طباعة رأس وذيل التقرير علي هيئة كلمات منفصلة (استخدام ورق أبيض)

Doctor's signature

Doctor's signature: Font
Font
Font

Page margin
هوامش التقرير
Left 1
Bottom 0

حجم الورق المستخدم في طباعة التقارير
A4 (Large)
Report top Space 3.5 cm

المنظومة البرمجية
ريال لاب سيستم
للمساعدة في ادارة المختبرات الطبية

Computer Software
real lab system
For Medical Clinical Laboratory

E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 0144848686 - 0108408154

الدقهية : المنصورة

صورة رأس التقرير كاملة
JPG Image 680 * 140 Pixels

صورة ذيل التقرير كاملة
JPG Image 680 * 50 Pixels

جميع الابعاد المستخدمة بالاستيفير
حجم ملف الصور يجب أن لا يتعدى 1 ميجا بايت

القائمة الرئيسية

رجوع

تعديل ألوان رأس وذيل التقرير

الحفظ الإعدادات

2-7 ضبط هوامش التقرير

نقوم بالتعديل في هوامش التقرير Page Margin و Report top space

لزيادة أو تقليل الهامش العلوي للتقرير لكي يناسب شعار المعمل المطبوع على ورق النتيجة :- نقوم بتعديل قيمة الهامش العلوي من الخانة المخصصة كما هو موضح بحد أقصى 8 سم .

طريقة فرز وتجميع التاريخ المرضي:

- ☐ فرز وتجميع التاريخ المرضي حسب كود المعمل
- ☒ فرز وتجميع التاريخ المرضي بإسم المريض

عدم طباعة رأس وذيل التقرير (استخدام ورق مطبوع)

طباعة رأس وذيل التقرير علي هيئة كلمات منفصلة (استخدام ورق أبيض)

طباعة رأس وذيل التقرير من ملفات الصور المرفقة في البرنامج (استخدام ورق أبيض)

Doctor's signature

Page margin

شوامش التقرير

Left 1

Bottom 0

حجم الورق المستخدم في طباعة التقارير

A4 (Large)

Report top Space

3.5 cm

real lab system

clinical program

3

4

0.5

1.5

المنظومة البرمجية

ريال لاب سيستم

1

2

شعار المعمل

الدقهلية - المنصورة

مصر

صورة رأس التقرير كاملة

JPG Image 680 * 140 Pixels

صورة ذيل التقرير كاملة

JPG Image 680 * 50 Pixels

Computer Software

real lab system

For Medical Clinical Laboratory

المنظومة البرمجية

ريال لاب سيستم

للمساعدة في ادارة المختبرات الطبية

E-mail: ais_soft_group@yahoo.com

Tel: 01144848686

الدقهلية : المنصورة

العائنة الرئيسية

رجوع

تعديل ألوان رأس وذيل التقرير

حفظ الإعدادات

* جميع الأبعاد المستخدمة بالستيمتر

* حجم ملف الصور يجب أن لا يتعدى 1 ميغا بايت

3-7 التعديل فى حجم الورق المستخدم فى طباعة التقرير

من أيقونة **Setting** - إعدادات النظام - إعدادات التقرير

نختار حجم الورق **A4** أو **A5**

4-7 الاختيارات المتاحة لطباعة رأس وذيل التقرير

* عدم طباعة رأس وذيل التقرير **فى حالة** (إستخدام ورق مطبوع) .

* طباعة رأس وذيل التقرير على هيئة كلمات منفصلة ، ويتم ادخال بيانات المعمل فى الخانات المخصصة والتحكم فى حجم الخط ولونه ونوعه

* طباعة رأس وذيل التقرير من ملفات الصور المرفقة فى البرنامج ، ويتم اختيار صورة الرأس والذيل الخاصة بالمعمل من على جهاز الكمبيوتر

بعد الإنتهاء نضغط (حفظ الإعدادات) .

Doctor's signature: [Text Box] Font [Font] [Font] [Font]

Page margin: [Left: 1] [Bottom: 0]

Report top Space: 3.5 cm

طباعة رأس وذيل التقرير (استخدام ورق مطبوع) [X] [Y]

طباعة رأس وذيل التقرير على هيئة كلمات منفصلة (استخدام ورق أبيض) [X] [Y]

Font	0	real lab system
Font	1	clinical program
Font	2	3
Font	3	4
Font	0.5	
Font	1.5	

المنقوشة البرمجية

Font	0	المنقوشة البرمجية
Font	1	ديان لاب سيستم
Font	2	1
Font	3	2

صورة رأس التقرير كاملة [X] [Y] JPG Image 680 * 140 Pixels

صورة ذيل التقرير كاملة [X] [Y] JPG Image 680 * 50 Pixels

Computer Software real lab system For Medical Clinical Laboratory

المنظومة البرمجية ديان لاب سيستم

E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 0144848586 - 0108408154

الذيلية : المنصورة

النافذة الرئيسية [X] [Y] [Z] [W] [V] [U] [T] [S] [R] [Q] [P] [O] [N] [M] [L] [K] [J] [I] [H] [G] [F] [E] [D] [C] [B] [A]

* جميع الأبعاد المستخدمة بالسنتيمتر

* حجم ملف الصور يجب أن لا يتعدى 1 ميجا بايت

5-7 تعديل ألوان رأس وذيل التقرير

نضغط على زر (تعديل ألوان رأس وذيل التقرير) كما هو موضح

نضغط على العنصر المراد تعديل اللون الخاص به فتظهر النافذة الخاصة بالألوان

نختار اللون المناسب ونضغط (موافق) نلاحظ تغير لون العنصر .

Doctor's signature
 Doctor's signature: Font
 Font
 Font

Page margin
 شواهدش التقرير
 Left 1
 Bottom 0
 Report top Space 3.5 cm

حجم الورق المستخدم
 في طباعة التقارير
 A4 (Large)
 Report top Space 3.5 cm

طريقة فرز وتجميع التاريخ المرضي:
☐ فرز وتجميع التاريخ المرضي حسب كود المعمل
☒ فرز وتجميع التاريخ المرضي بإسم المريض
☒ عدم طباعة رأس وذيل التقرير (استخدام ورق مطبوع)
☐ طباعة رأس وذيل التقرير علي هيئة كلمات منفصلة (استخدام ورق أبيض)

Font 0 real lab system
 Font 1 clinical program
 Font 2 3
 Font 3 4
 Font 0.5
 Font 1.5

JPG Image 145 * 95 Pixels

 شعار المعمل
 الدقهلية - المتصورة
 مصر

Font 0 المنظومة البرمجية
 Font 1 ريال لاب سيستم
 Font 2 1
 Font 3 2

صورة رأس التقرير كاملة
 JPG Image 680 * 140 Pixels
 صورة ذيل التقرير كاملة
 JPG Image 680 * 50 Pixels

Computer Software
real lab system
 For Medical Clinical Laboratory
 E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 0144848686 - 0108408154
 E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 0144848686 - 0108408154

المنظومة البرمجية
ريال لاب سيستم
 للمساعدة في ادارة المختبرات الطبية
 اللبثية : المتصورة

القائمة الرئيسية
 رجوع
 تعديل ألوان رأس وذيل التقرير
 حفظ الإعدادات

* جميع الابعاد المستخدمة بالسنتيمتر
 * حجم ملف الصور يجب أن لا يتعدى 1 ميغا بايت

حفظ الأعدادات استعادة الوضع الافتراضي عودة

حفظ الاعدادات استعادة الوضع الافتراضي عودة

☒ Show top line

☒ Patient Name Eng. Ahmed Ibrahim Saleh ☒ Age / Sex 34 Years / Male ☒ Referred By Prof. Dr. Doctor name	☒ Patient Id 0144848686 ☒ Request Date 28-Oct-2010 05:01 AM ☒ Printed In 31-Oct-2010 08:31 PM
--	--

☒ Long date
☒ Show time

Width: 0
 Height: 45
 Top: 0 cm

☒ Show bottom line

Patient Name
 Left = 9.8 Top = 0 cm

Patient Id
 Left = -9.8 Top = 0 cm

Age / Sex
 Left = 0 Top = 0 cm

Request Date
 Left = 0 Top = 0 cm

Referred By
 Left = 0 Top = 0 cm

Printed In
 Left = 0 Top = 0 cm

أي تعديل في هذه النافذة سيظهر في جميع تقارير النتائج

Patient History In Our Lab.

☐ Bold	SGPT	SGOT	GGT	Creat	Uric	☐ Bold
01-Jun-2009	33	26	39		3.5	
29-Feb-2008			42		3.3	
07-Jul-2007	31	26		0.8		
☐ Bold						☐ Bold

Height: 45

عودة

استعادة الوضع الافتراضي

حفظ الاعدادات

يمكن تعديل ألوان رأس وذيل التقرير ليظهر تقرير المريض كما هو موضح

Patient Name	الأستاذة/ نور يسري علي احمد	Patient ID.	 1 017022 510010
Age / Sex	20 Years / Female	Request Date	25-Feb-2017 10:27 AM
Referred By	أ.د/ محمد السعيد	Printed In	25-Feb-2017 02:26 PM

MICROBIOLOGY REPORT

Culture and Sensitivity:

Urine Examination:

Culture:

- ▲ Sample : Mid stream urine
- ▲ Organism A : Gram Negative bacilli
- ▲ Culture Condition : On nutrient agar for 48 hours aerobically
- ▲ Colony Count : More than 10,000 Bacterial/mL

Sensitivity:

▲ Highly (Organism A) For	Sensitive	Inhibition zone	Commercial Name
1 Clavulanic		> 18 mm	Augmentin, Clavucin, Magnabiotic
2 Lomefloxacin		> 18 mm	Lomeflox, Lomex
3 Ampicillin		> 29 mm	Unictam, Sulbin, Unasyn
4 Amoxicillin		> 18 mm	Hiconcil, Ibiamox, Biomox
5 Aztreonam		> 21 mm	Azactam
6 Azithromycin		> 18 mm	Azalide, Azrolid, Aziwok
▲ Moderate (Organism A) For	Sensitive	Inhibition zone	Commercial Name
1 Amoxicillin and Clavulanic		> 18 mm	Augmentin, Clavucin, Magnabiotic
2 Cephadrine		> 58 mm	Velosef, Farcocef, Cephadrine
▲ Low For (Organism A)	Sensitive	Inhibition zone	Commercial Name
1 Cefaclor		> 18 mm	Cedlor, Cefaclor, Servidor
2 Cefprozone		> 18 mm	Cefobid, Cefozone, Cefoperaon T3A
▲ Resistant (Organism A) For	Sensitive	Inhibition zone	Commercial Name
1 Clidamycin		> 18 mm	Dalacine C, Clinacyn, Clindam
2 Cephalixin		> 18 mm	Neocef, Keflex, Ospexin

6-7 ضبط الطابعات المخصصة للطباعة

يمكن التحكم في تحديد الطابعة المستخدمة في طباعة كلا من (التقارير - الباركود - الإيصال - الظرف - الكارنية) من (إعدادات النظام) كما هو موضح .

نافذة اعدادات النظام:

من خلال هذه النافذة يمكنك تخصيص بعض مهام وبيانات النظام الرئيسية مثل رقم الفرع وقت استلام النتيجة الطابعات الرئيسية ، طباعة ايصال للمريض تلقائياً

تحديد الطابعة المخصصة لطباعة الافتراضية

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

تحدد الطابعة المخصصة لطباعة الباركود

تحدد الطابعة المخصصة لطباعة الظرف

تحدد الطابعة المخصصة لطباعة الإيصال

تحدد الطابعة المخصصة لطباعة الكارنية

Individual

نوع الحساب الافتراضي للنظام

إدخال اسم المريض والطبيب المعالج باللغة الانجليزية وباقى العناصر

في حالة ترك خانة جهة الاحالة فارغة يتم وضع himself, Himself حسب جنس المريض

حفظ الطبيب المعالج من نافذة الجهات الخارجية والمعامل وعدم حفظه تلقائياً عند ادخال المرضى

تمكن خاصية البحث عند ادخال اسم المريض في نافذة اضافة وتعديل بيانات المرضى

عدم وضع الألقاب تلقائياً عند تسجيل بيانات المرضى

طباعة الباركود الخارجى الخاص بالملف

طباعة الباركود الخارجى الخاص بالملف

طباعة كود المعمل بدل كود المريض فى تقرير النتائج واستكز الباركود

مراجعة واكتمال التحاليل بطريقة تلقائية

طباعة حساب المريض والباقي بدل تاريخ الطباعة فى تقرير النتيجة

عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يومياً

Path D:\lab_data Check

* فى حالة تفعيل الخاصية وعدم وجود المسار يتم الحفظ فى المسار التالي D:\Lab_data\Reallab_Backup

الفائمة الرئيسية

حفظ الإعدادات

7-7 ضبط نوع الحساب الافتراضى للنظام

نوع الحساب الافتراضى للنظام هو الحساب الذى يقوم البرنامج تلقائيا بالتعامل مع المريض على أساسه من حيث أسعار التحاليل والخصومات والعمولات والعينات المسحوبة خارج المعمل .
يمكن ضبط نوع الحساب الافتراضى عن طريق الضغط على أيقونة **Setting**
ثم نقوم بالضغط على (إعدادات النظام)
ونقوم باختيار نوع الحساب الافتراضى للنظام كما هو موضح .





نافذة اعدادات النظام:

من خلال هذه النافذة يمكنك تخصيص بعض مهام وبيانات النظام الرئيسية مثل رقم الفرع وقت استلام النتيجة الطباعات الرئيسية ، طباعة ايصال للمريض تلقائياً



اعدادات التقرير



اعدادات الإيصال



اعدادات الطرف



اعدادات الكارنية



اعدادات خادم قواعد البيانات

HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخصصة لطباعة الافتراضية
HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخصصة لطباعة الباركود
HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخصصة لطباعة الطرف
HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخصصة لطباعة الإيصال
	تحديد الطباعة المخصصة لطباعة الكارنية

Individual	نوع الحساب الافتراضي للنظام
Individual	ادخال اسم المريض والطبيب المعالج بالـ
Lab To Lab	في حالة ترك خانة جهة الاحالة فارغة يتم
Contracts	حفظ الطبيب المعالج من نافذة الجهات الخارجية والمعامل وعدم حفظه تلقائياً عند ادخال المرضى
Free	تمكين خاصية البحث عند ادخال اسم المريض في نافذة اضافة وتعديل بيانات المرضى
	عدم وضع الأتقاب تلقائياً عند تسجيل بيانات المرضى

طباعة التاريخ والوقت على باركود الانابيب	☒	طباعة الباركود الخارجي الخاص بالملف	☒
طباعة كود المعمل بدل كود المريض في تقرير النتائج واستكرز الباركود	☐		

مراجعة واكمال التحاليل بطريقة تلقائية	☒
طباعة حساب المريض والباقي بدل تاريخ الطباعة في تقرير النتيجة	☐

Path D:\lab_data	Check	عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يومياً	☒
------------------	-------	--	-------------------------------------

* في حالة تفعيل الخاصية وعدم وجود المسار يتم الحفظ في المسار التالي D:\lab_data\Reallab_Backup

القائمة الرئيسية

حفظ الإعدادات

8-7 إعدادات الإيصال

لضبط الإعدادات الخاصة بالإيصال نقوم بالضغط على أيقونة **Setting** ثم نقوم بالضغط على زر (إعدادات النظام) ونختار (إعدادات الإيصال) تظهر النافذة الموضحة .



نافذة إعدادات النظام:

من خلال هذه النافذة يمكنك تخصيص بعض مهام وبيانات النظام الرئيسية مثل رقم الفرع وقت استلام النتيجة الطباعات الرئيسية ، طباعة إيصال للمريض تلقائياً

إعدادات التقرير

إعدادات الإيصال

إعدادات الملف

إعدادات الكارنية

إعدادات خادم قواعد البيانات

HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخضمة لطباعة الإقرارية
HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخضمة لطباعة الباركود
HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخضمة لطباعة الطرق
HP Officejet 6000 E609a Series	تحديد الطباعة المخضمة لطباعة الإيصال
	تحديد الطباعة المخضمة لطباعة الكارنية

نوع الحساب الإقراري للنظام: Individual

إدخال اسم المريض والطبيب المعالج باللغة الإنجليزية وراقى العناصر

في حالة ترك خانة جهة الإحالة فارغة يتم وضع herself, Himself حسب جنس المريض

حفظ الطبيب المعالج من نافذة الجهات الخارجية والمعامل وعدم حفظه تلقائياً عند ادخال المريض

تكنن خامسة البحث عند ادخال اسم المريض في نافذة إضافة وتعديل بيانات المريض

عدم وضع الألقاب تلقائياً عند تسجيل بيانات المريض

مراجعة وإكمال التحليل بطريقة تلقائية

طباعة الباركود الخارجي الخاص بالملف

طباعة كود المعمل بدل كود المريض في تقرير النتائج واستكيز الباركود

طباعة حساب المريض والباقي بدل تاريخ الطباعة في تقرير النتيجة

طباعة رقم الملف أو البطاقة بدل تاريخ الطباعة في تقرير النتيجة

عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يومياً

Path: D:\lab_data Check

* في حالة تفعيل الخاصية وعدم وجود المسار يتم الحفظ في المسار التالي D:\lab_data\RealLab_Backup

الفائمة الرئيسية **حفظ الإعدادات**

تميز العملة المستخدمة **جنيها لا غير** **وقت استلام النتيجة** **الهامشي العلوي للإيصال**

For example: L.E. , L.L. **جنيها لا غير** **09:00 PM** **سم** **0**

For example: 09:00 PM

طباعة رأس وذيل الإيصال علي هيئة كلمات منفصلة

كلمات الجهة اليمنى من رأس الإيصال

ريال لاب سيستم

إدارة معامل التحاليل الطبية

كلمات منتصف الإيصال من أسفل

1

2

طباعة رأس وذيل الإيصال من ملفات الصور المرفقة

صورة رأس الإيصال

معامل ريال لاب سيستم للتحاليل الطبية

JPG Image 460 * 60 Pixels

E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 01144848686

القهيبة : النصورة

JPG Image 720 * 50 Pixels

صورة ذيل الإيصال

شعار المعمل

JPG Image 145 * 95 Pixels

الفائمة الرئيسية **رجوع** **حفظ الإعدادات**

* جميع الابعاد المستخدمة بالستيمتر

* حجم ملف الصور يجب أن لا يتعدى 1 ميغا بايت

نقوم بتعديل الهامش العلوي للإيصال في حالة استخدام ورق مطبوع

يمكن تغيير نوع العملة المستخدمة وتحديد وقت استلام النتيجة – والتحكم في امكانية طباعة الايصال مرة واحدة

فقط – وظهور بيانات الاستلام من موقع نتيجة على الايصال

في حالة استخدام ورق أبيض يمكن تحديد طباعة رأس وذيل الايصال على هيئة كلمات ونقوم بكتابة بيانات المعمل واختيار نوع وحجم ولون الخط وشعار المعمل ، أو اختيار صورة لرأس وذيل الايصال يتم اختيارها من على جهاز الكمبيوتر

بعد الانتهاء نضغط (حفظ الاعدادات) .



9-7 إعدادات الظرف

لضبط الإعدادات الخاصة بالظرف نقوم بالضغط على أيقونة **Setting** ثم نقوم بالضغط

على زر (إعدادات النظام) ونختار (إعدادات الظرف)

تظهر النافذة الموضحة .



نافذة إعدادات النظام:
من خلال هذه النافذة يمكنك تخصيص بعض مهام وبيانات النظام الرئيسية مثل رقم الفرع وقت استلام النتيجة الطباعات الرئيسية ، طباعة إيصال للمريض تلقائياً

اعدادات التقرير

اعدادات الإيصال

اعدادات الظرف

اعدادات الكارنية

اعدادات خادم قواعد البيانات

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

HP Officejet 6000 E609a Series

تحديد الطباعة المختممة لطباعة الإقرائية

تحديد الطباعة المختممة لطباعة الباركود

تحديد الطباعة المختممة لطباعة الظرف

تحديد الطباعة المختممة لطباعة الإيصال

تحديد الطباعة المختممة لطباعة الكارنية

Individual

نوع الحساب الافتراضي للنظام

إدخال اسم المريض والطبيب المعالج باللغة الإنجليزية وراقى العناصر

في حالة ترك خانة جهة الاحالة فارغة يتم وضع herself, Himself حسب جنس المريض

حفظ الطبيب المعالج من نافذة الجهات الخارجية والمعامل وعدم حفظه تلقائياً عند ادخال المريض

تتمكن خامسة البحث عند ادخال اسم المريض في نافذة اضافة وتعديل بيانات المريض

عدم وضع الألقاب تلقائياً عند تسجيل بيانات المريض

مراجعة واكمال التحاليل بطريقة تلقائية

طباعة الباركود الخارجي الخاص بالملف

طباعة كود المعمل بـك كود المريض في تقرير النتائج واستكز الباركود

طباعة حساب المريض والباقي بـك تاريخ الطباعة في تقرير النتيجة

طباعة رقم الملف او البطاقة بـك تاريخ الطباعة في تقرير النتيجة

عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات يومياً

Path: D:\lab_data Check

* في حالة تفعيل الخاصية وعدم وجود المسار يتم التخفظ في المسار التالي D:\lab_data\Reallab_Backup

الفائمة الرئيسية

حفظ الإعدادات

الهاشبي الطوطي للظرف 3

عدم طباعة رأس وذيل الظرف (استخدام ظرف مطبوع)

طباعة رأس وذيل الظرف علي هيئة كلمات منفصلة (استخدام ظرف أبيض)

JPG Image 145 * 95 Pixels

Font 0 3

Font 0.6 4

Font 1.2 5

Font 1.8 6

Font 9 7

Font 9.5 8

شعار المعمل

ريال لاب سيستم

إدارة معاليل التحاليل الطبية

1

2

7

8

طباعة رأس وذيل الظرف من ملفات الصور المرفقة في البرنامج (استخدام ظرف أبيض)

صورة رأس الظرف كاملة
JPG Image 720 * 140 Pixels

صورة ذيل الظرف كاملة
JPG Image 720 * 50 Pixels

Computer Software
real lab system
For Medical Clinical Laboratory

المنظومة البرمجية
ريال لاب سيستم
للمساعدة في إدارة المختبرات الطبية

E-mail: ais_soft_group@yahoo.com Tel: 01144848686

الرقبانية: المنصورة

عدم طباعة عناوين بيانات المريض علي الظرف

محاذاة البيانات المطبوعة علي الظرف

حفظ الإعدادات

الفائمة الرئيسية

الكود: 4311021513313

Left = 0 Top = 0 cm

13-Jun-2011 03:11 PM التاريخ: Left = 0 Top = 0 cm

الأسم: احمد ابراهيم صالح

Left = 0 Top = 0 cm

جهة الاحالة: اسم الطبيب او جهة الاحالة

Left = 0 Top = 0 cm



فصل وسحب العينات

نقوم بالضغط على أيقونة **Laboratory**



ثم نقوم بالضغط على زر (سحب وفصل العينات) تظهر النافذة الموضحة

209



ABOUT US

Real Lab System

ريال لاب سيستم

تصميم :- شركة ريال لاب
م . أحمد إبراهيم صالح الزيني

الدعم الفني والإستفسار :-

ais_soft_group@yahoo.com

01111131571 – 01111131561 – 01111131541

